



Calle 36 N° 2C -22 / Planta 1 Cali – Valle del Cauca. Código Postal: 4447000, Colombia

Telephone: 18000939595

Fax:

Email: servicio_al_cliente_colombia@baxter.com

Work Order # 00382857

Detailed Service Report

Account Name	: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	WO Type	: Field
Account #	: 25646418	Request Type	: Preventive Maintenance
Address	: CALLE 5 NO 36 08 BRR SAN FERNANDO CALI VALLE DEL CAUCA CALI (SANTIAGO DE CALI) Colombia 76 76001000	Created	: 31/Jul/2022
Contact	: NATALIA PEDREROS	Agreement #	:
Customer Reported Problem	:	Warranty	: N
Customer Inventory #	:	Billable	: N
WorkOrderLineItem Start	: 18/Aug/2022 07:15:00	PO #	:
WorkOrderLineItem End	: 18/Aug/2022 12:18:01	Serial #	: SK00606745
Measurement Type	:	Product Code	: ELVP001COL
		Product Description	: EVO IQ LVP COL
		Software Version	: V01.05.00.01
		Status	: Closed
		Closed Date	: 18/Aug/2022

Work Order Line Items Information		
Type	Comments	Owner
Preventive Maintenance	se realiza verificación funcional	Luis Torres

Parts Used					
Part Number	Description	Quantity	Lot or Serial #	Source	Billable
0303000010	TUBING 0.103IDX0.0195WLX24L	1	VS061522HE171	Trunk	N
11506459900	LI-ION BATTERY, SINGLE PACK BAXTER AS LEGAL MANUFACTURER	1	2143357560	Trunk	N

Calibrated Equipment				
Serial #	Internal ID	Product Description	Calibrated Date	Calibrated Due Date
R-0794	n/a	MANOMETRO DIGITAL	24/Jul/2022	16/Jul/2023
R-0810	n/a	FLEXOMETRO	26/Dec/2021	26/Dec/2022
R-1572	n/a	BALANZA	10/Feb/2022	04/Feb/2023

Calibrated Equipment				
R-1694		MICRO JERINGA	08/Aug/2021	08/Aug/2023
R-1126	n/a	BLOQUE DE PESO 20 gr	07/Oct/2021	09/Oct/2022
R-1859		Termometro EVO	27/Sep/2021	27/Sep/2022
R-1002	NA	ANALIZADOR SEG. ELECTRICA ESA609	07/Apr/2022	07/Apr/2023
R-1264		CRONOMETRO	05/Oct/2020	11/Nov/2022

Labor and Travel		
Type	Duration (HH:MM)	Billable
Labor	00:15	N
Labor	00:55	N

Customer Signature

06/Sep/2022

Technician Signature

06/Sep/2022

Disclaimer : Information contained in this document was obtained in a compliant manner and in accordance with specified requirements.

Generated On 06/Sep/2022 10:20 | Report: Global Technical Services - Detailed Service Report

Reporte de datos de la prueba - Copia del cliente

Producto: EVO IQ LVP

Tipo de artículo WOL: Mantenimiento preventivo

Nombre de cuenta: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Activo: SK00606745

Número de cuenta: 25646418

Código del producto (Modelo del Producto): ELVP001COL

Resultado de la lista de verificación: Pasó

Versión de Software: V01.05.00.01

Prueba	Resultado
Actividad de servicio	
Seleccione el flujo de trabajo a ejecutar	Proceda normalmente
Temperatura ambiente [16.1 C a 36.0 C]	25.1
Funcional - 100 mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso Inicial	9.03
Funcional - 100 mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso Final	34.29
Funcional - 100mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso entregado [23.31 g a 28.01 g]	25.26
Funcional - 100mL/h Prueba de la exactitud del flujo Volumen de salida error porcentual	1.24248496993988
Funcional - 400 mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso Inicial	9.21
Funcional - 400 mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso Final	114.89
Funcional - 400mL/h Prueba de la exactitud del flujo Peso entregado [92.40 g a 117.70 g]	105.68
Funcional - 400mL/h Prueba de la exactitud del flujo Volumen de salida error porcentual	5.89178356713427
Visual - Las superficies externas están limpias y sin rayones	Paso
Prueba de agitación - No se producen ruidos anormales en el interior del dispositivo	Paso
Funcional - El resorte rebota y se repone de forma normal	Paso
Visual - Todas las etiquetas están en orden	Paso
Funcional - Revisión de arranque de la batería. El indicador, la luz de alarma y los mensajes de alarma funcionan según lo esperado	Paso
Funcional - Verificación CD. Los indicadores y mensajes de alarma funcionan según lo esperado	No aplica
Funcional - Verificación CA. Los indicadores, la luz de alarma y mensajes de alarma funcionan según lo esperado	Paso
Visual y sonora - El zumbador genera una alarma de tono alto con la luz roja de alarma parpadeando	Paso
Visual y sonora - No se producen alarmas de falla en el sistema	Paso
Visual y sonora - Los tonos y la luz de alarma funcionan correctamente	Paso
Visual - La fecha y hora son correctas conforme a la zona horaria del cliente	Paso
Visual - Versión de Software	V01.05.00.01
Visual - Versión de WiFi	CL4476
Visual - La versión del software es la correcta	Paso
Visual - Sin caracteres borrosos o torcidos, fugas de luz y/o problemas en los píxeles	Paso
Visual - La luminosidad cambia según los ajustes en la configuración	Paso
Sonido - El volumen de la alarma corresponde correctamente con el ajuste	Paso
Funcional - Las teclas funcionan correctamente	Paso
Funcional - Sensor de la puerta	Paso
Funcional - Sensor de la pinza de control azul	Paso
Funcional - Sensor ultrasónico Primer Valor [514 a 2500]	1314
Funcional - Sensor ultrasónico Segundo Valor [514 a 2500]	1126
Funcional - Conexión exitosa	Paso

Reporte de datos de la prueba - Copia del cliente

Producto: EVO IQ LVP

Tipo de artículo WOL: Mantenimiento preventivo

Nombre de cuenta: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Activo: SK00606745

Número de cuenta: 25646418

Código del producto (Modelo del Producto): ELVP001COL


Resultado de la lista de verificación: Pasó

Versión de Software: V01.05.00.01

Prueba	Resultado
Funcional - La alarma se disparó correctamente	Paso
Funcional - Valor de la alarma de presión media [394 mmHg a 656 mmHg]	497
Funcional - Valor de la alarma de presión alta [675 mmHg a 1125 mmHg]	870
Funcional - La alarma se disparó en < 1 min	Paso
Funcional - Corriente de fuga a tierra con neutral cerrado [< 5000 μ A]	9
Funcional - Corriente de fuga a tierra con neutral abierto [< 10000 μ A]	21
Funcional - Pruebas de rigidez dieléctrica: Sin descargas eléctricas o averías	No aplica
Funcional - Prueba de funcionamiento / prueba de fugas de la carcasa. No presenta fallas	Paso
Resultado de la prueba	Paso
Comentarios	
Comentarios	se verifica balanza R-1572 fecha de expiracion 05/feb/2023 con bloque de peso 20g 20g r-1126 fecha de expiracion 10/oct/2022 resultado 20g

Nombre impreso: Jorge Peña

Firma del técnico de servicio

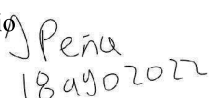

Fecha de la firma: Aug 18, 2022