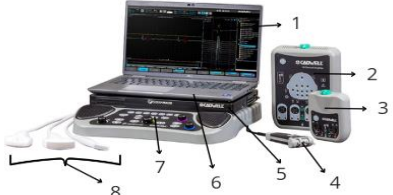
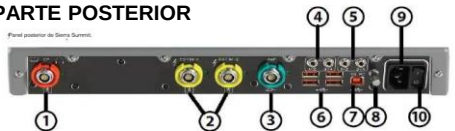
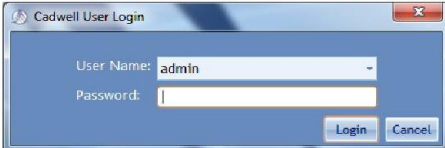
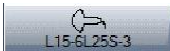
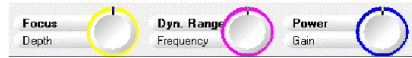


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 19	MES 11	AÑO 2024
Nombre del equipo:	ELECTROMIÓGRAFO	Modelo:	SIERRA SUMMIT		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	CADWELL		Clasificación del equipo:		DIAGNÓSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		ENCENDIDO		
 Cadwell Sierra Summit está indicado para la adquisición, visualización, almacenamiento, transmisión, análisis y generación de informes de datos electrofisiológicos y ambientales, incluyendo electromiografía (EMG), estudios de conducción nerviosa (NCS), potenciales evocados (EP) y respuesta autonómica (variabilidad de intervalo RR). Además, se utiliza para detectar la función fisiológica del sistema nervioso y como apoyo en el diagnóstico de enfermedades o trastornos neuromusculares.		PARTE FRONTAL  1. Pantalla 2. Amplificador 12 canales 3. Amplificador de 2 canales 4. Estimulador portátil stimtroller plus 5. Ordenador 6. Teclado 7. Unidad sierra summit 8. Transductores		1. Conecte el amplificador, los estimuladores y los demás accesorios a la unidad base de Sierra Summit (si aún no están conectados). 2. Para encender el equipo, siga el orden indicado a continuación: -Ordenador -Monitor (si se trata de un ordenador de sobremesa) -Unidad base de Summit		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PARTE POSTERIOR  1. Estimulador de potenciales evocados 2. Conexiones de StimTroller Plus 3. Entrada del amplificador 4. Conexiones de entrada de 5. Conexiones de salida de disparo 6. Concentrador USB de alta velocidad (pedal) 7. Conexión USB para el ordenador 8. Conductor de ecualización de potencial 9. Entrada del aparato		APAGADO 1. Cierre el programa Sierra Summit y cualquier otro programa relacionado que se esté ejecutando en el equipo. 2. Apague la unidad base de Sierra Summit. 3. En la barra de tareas de Windows, haga clic en el icono Start (inicio) y luego seleccione Shutdown (apagar). 4. Apague el monitor (si se trata de un ordenador de sobremesa). 5. No tiene que desconectar el amplificador, los estimuladores ni los accesorios. Puede dejarlos conectados.		
				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. Nota: Realice los procedimientos de limpieza y desinfección de manera periódica para garantizar la operación segura. A medida que los limpia, inspeccionar visualmente los instrumentos y sus componentes en busca de daños o desgaste.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						

7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 19	MES 11	AÑO 2024

Nombre del equipo: ELECTROMIÓGRAFO	Modelo: SIERRA SUMMIT	Riesgo del equipo: IIA
Marca: CADWELL		Clasificación del equipo: DIAGNÓSTICO

ABRIR EL SOFTWARE SIERRA SUMMIT	VENTANA DE INICIO DE SESIÓN	SONDA DEL TRANSDUCTOR	
Ejecute el programa Sierra Summit en su ordenador de una de las formas siguientes: -Haga doble clic en el icono de Sierra Summit en el escritorio de Windows. -Haga clic en el botón Start de Windows, seleccione All Programs (todos los programas), Cadwell y luego Sierra Summit.	Después de iniciar el programa Sierra Summit, aparecerá la ventana Cadwell User Login (inicio de sesión de usuario Cadwell). Tendrá que seleccionar un nombre de usuario de la lista desplegable e introducir luego la contraseña correcta. Si no se ha creado ningún usuario, seleccione el usuario Admin e introduzca la contraseña admin.  Ventana de User Login	El sistema debe detectar automáticamente la sonda del transductor. Para verificar que la ha detectado, mire la esquina superior derecha de la ventana de la ecografía, ahí debería verse el nombre de la sonda.  La sonda del transductor de 15 MHz está conectada. Si la sonda no fue detectada, se mostrará la imagen siguiente:  No hay transductor conectado. Desconecte la sonda y vuelva a conectar el ecógrafo (MicrUS o SmartUS).	
CERRAR EL SOFTWARE SIERRA SUMMIT		VALORES PREESTABLECIDOS	
Para cerrar el programa Sierra Summit: -Haga clic en el menú File (archivo) y seleccione Exit Sierra Summit (salir de Sierra Summit). -Haga clic en la X roja que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.	SOFTWARE DEL ECÓGRAFO		
ALARMAS Y POSIBLES ERRORES	1. Si aparece un mensaje de error: Cierre el programa Sierra Summit y compruebe que la unidad base de Sierra Summit está encendida y que el cable USB está bien conectado en el ordenador y en la unidad base de Sierra Summit. Luego, reinicie el programa Sierra Summit. En sistemas que sólo se utilizan para la revisión de datos, puede desactivar el mensaje de ""error de comunicación"" que se muestra al iniciar la Sierra programa Summit." 2. El usuario predeterminado es Admin (administrador) y la contraseña predeterminada es "admin".	1. Seleccione la prueba de ecografía 2. Verifique que se han detectado el escáner y el transductor. Si el software no ha detectado, aparecerá el icono siguiente en la bandeja del sistema.  Escáner no detectado. En ese caso, compruebe las conexiones  Escáner detectado.	Los valores preestablecidos de escaneo (parámetros) se muestran en el panel de control a la derecha de la ventana de la ecografía. Para cambiar estos ajustes, siga uno de los métodos siguientes: -Botones de la unidad base de Summit: Los tres botones en la unidad base de Summit pueden utilizarse para ajustar Focus (enfoque), Depth (profundidad), Dynamic Range (rango dinámico), Frequency (frecuencia), Power (energía) y Gain (ganancia).  -Ratón: Mueva el ratón hacia el control que desee y utilice los botones con flechas hacia la izquierda o la derecha para ajustar el parámetro, o girando la rueda del ratón cuando el cursor de este se encuentra sobre el parámetro deseado.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo

4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.