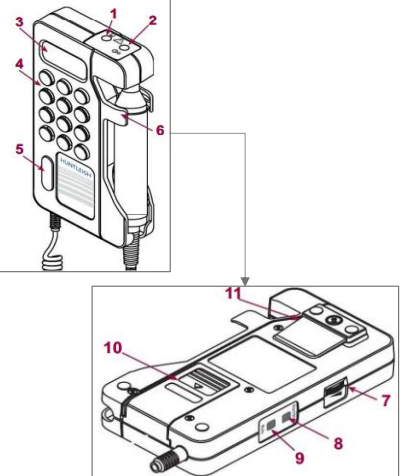


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				15	03	2023
Nombre del equipo: DOPPLER BIDIRECCIONAL		Modelo: DOPPLEX MD2	Riesgo del equipo: Clase II			
Marca: HUNTLEIGH		Clasificación del equipo: Monitoreo				
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Equipo que permite la valoración vascular de alto nivel, ayudando a la detección de enfermedades arteriales periféricas. Su uso con sondas vasculares de alta sensibilidad aporta información del flujo sanguíneo bidireccional.				1. Sacar la sonda: Sostenga el equipo con una mano. Tome la sonda con dos dedos y tire de ella con suavidad. 2. Poner la sonda: Sostenga el equipo con una mano. Alinee la sonda con el soporte en el equipo. Empuje la sonda hacia adentro hasta que haga clic en su posición. Nota: Saque la sonda antes de encender el Doppler y vuelva a colocarla después de apagarlo. 3. Encender / apagar el Doppler: - Para encender: Presione el botón POWER en el panel frontal. - Para apagar: Presione el botón POWER en el panel frontal. 4. Modo Vascular (Solo FD2): Conecte la sonda vascular al FD2. Elija la sonda adecuada según la profundidad del vaso. Aplique gel y coloque la sonda a 45 grados sobre la piel. y ajuste la posición hasta escuchar la señal acústica. 5. Modo obstétrico: Conecte el transductor obstétrico. Use gel y coloque la sonda plana sobre la sínfisis púbica. Ajuste hasta oír la señal claramente. La Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) se muestra en pantalla. Puede seleccionar modos estándar o suavizado (solo FD2). En FD2, use el modo manual para contar latidos débiles. Nota: El equipose apaga automáticamente en 3 minutos si no se usa.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Permite la conexión con sondas de alta sensibilidad (2, 3, 4, 5, 8, 10 MHz) y sondas intraoperatoria reutilizable para mayor sensibilidad. 2. Peso: 295 grs (incluyendo batería y sonda) 3. Alimentación : batería 9 V 4. Dimensiones: alto 140, ancho 74mm, profundidad 27mm. 5. Equipo no apto para uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno y óxido nítrico. 6. Tipo de batería: CEI 6LR61 o CEI 6LP3146 7. Salisa máxima de audio: 500mW rms.		1. Toma de auriculares 2. Waveform Enchufe y Puerto RS232 3. Panel LCD 4. Altoparlante 5. Botón de encendido / apagado 6. Soporte de la sonda 7. Control de volumen 8. Botón de inicio / parada. Y botón de calibración 9. Botón de modo 10. Compartimiento de la batería. 11. Clip de bolsillo		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
				ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. No limpie el equipo con material abrasivo. 2. En caso de usar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en el equipo con trapo seco. 3. Llevar registro de limpieza y desinfección mínimo una vez al		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						