

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: EQUIPO DE ALTO FLUJO	CÓDIGO: NA
	MARCA: FISHER Y PAYKEL	VERSIÓN: 1
	MODELO: AIRVO 2	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

USO DEL EQUIPO




El equipo Airvo 2 es un sistema de alto flujo que brinda soporte respiratorio a pacientes con respiración espontánea con una perfecta mezcla de aire y oxígeno que busca través de estos flujos de hasta 60 LPM vencer la resistencia de la vía aérea mejorando la oxigenación y el intercambio gaseoso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modificar en caso de ser necesario tipo de paciente: Adulto-Pediátrico.
- Ajuste el nivel de oxígeno suministrado según sea necesario.
- Mantenga el equipo conectado a la red eléctrica AC.
- Si el equipo se desconecta, inmediatamente la terapia es interrumpida.

PARTES DEL EQUIPO

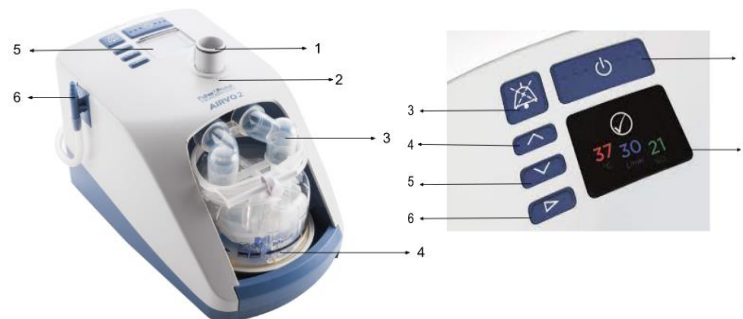

Partes del equipo delanteras:


1. Puerto de conexión del tubo respiratorio calentado
2. Punto de medición de la temperatura del punto de condensación mostrada
3. Puertos de cámara
4. Cámara de agua automática con adaptador instalado
5. Panel de control del equipo
6. Puerto de entrada de oxígeno

Partes del panel de control:

1. Botón de ON/OFF
2. Pantalla LCD
3. Pausa del audio
4. Botón para seleccionar arriba el menú
5. Botón para seleccionar abajo el menú
6. Botón para modo de paciente

CONFIGURACIÓN INICIAL DEL EQUIPO

1. Fijación del equipo a una Bandeja Montada a Pedestal (900PT405) por debajo de la altura de la cabeza del paciente.
2. Instalación de la cámara de agua.

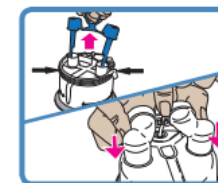

3. Ajuste la cámara de agua en el protector.
4. Cuelgue la bolsa de agua estéril en la abrazadera colgante, abra la tapa de ventilación en el lateral de la espiga de la bolsa, Finalmente, La cámara se llenará automáticamente al nivel requerido y mantendrá ese nivel hasta que la bolsa de agua esté vacía.
5. Instalación del tubo respiratorio calentado.

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO



1. Encienda el equipo
2. Compruebe el estado de desinfección del equipo, donde la misma unidad indicara si es seguro el uso del equipo.

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: EQUIPO DE ALTO FLUJO		CÓDIGO: NA	
MARCA: FISHER Y PAYKEL		VERSIÓN: 1	
MODELO: AIRVO 2		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022	

INTERFACES DEL PACIENTE

Cánula nasal			Interfaz de traqueostomía	Adaptador de interfaz de la máscara
				
Optiflow™+ OPT942 OPT944 OPT946	Optiflow™ OPT842 OPT844 OPT846	Optiflow™ Junior/Junior 2 OPT316/OPT318/ OJR416/OJR418 (Consulte «Utilizar AIRVO 2» - «Modo Junior»)	OPT970 / OPT870	OPT980 / RT013 (con máscara) Tenga en cuenta que el adaptador de la interfaz de la máscara OPT980/RT013 está diseñado para ser utilizado solo con máscaras que dispongan de ventilación. No utilice máscaras selladas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar Alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES

ERROR (E###)	
ERROR (E###)	
Compruebe si hay fugas	
Verifique si hay obstrucciones	
O2 Demasiado bajo	
O2 Demasiado alto	
Verifique el agua	

La unidad ha detectado un fallo interno, apáguela y reinicie el equipo.

Verifique que el tubo respiratorio calentado no está dañado y está conectado correctamente. Y verifique si la interfaz nasal está instalada

Verifique si hay obstrucciones en el filtro de aire o en el portafiltros

Compruebe que la fuente de oxígeno sigue estando en funcionamiento y está correctamente conectada.

Compruebe que el caudal de AIRVO se ha ajustado correctamente

Reemplace la cámara y la bolsa de agua.

3. Se inicia el calentamiento del equipo
4. Encender el modo junior en caso de ser necesario.
5. Configuración de los ajustes y modos deseados del equipo.
6. Conexión del oxígeno.
7. Ajuste del oxígeno.
8. Conexión del paciente.
9. Control de la condensación en caso de ser necesario.



PROCESO DEL CAMBIO DE FILTRO

Después de que AIRVO 2 haya estado encendido durante 1000 horas, aparecerá un mensaje al inicio del siguiente ciclo de desinfección indicando que debe cambiarse el filtro del aire:

1. Extraiga la porta filtros de la parte posterior de la unidad y saque el filtro.
2. Sustituya el filtro por uno nuevo.
3. Vuelva a conectar el porta filtros a la unidad.
4. Presione el botón de modo para desplazarse hasta la pantalla
5. Pulse el botón arriba para seleccionar «Ahora».
6. Presione el botón de modo para confirmar. El contador de horas se restablecerá a cero.