

|                                                                                   |                                                                            |                  |         |        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | CÓDIGO           |         |        |     |  |
|                                                                                   |                                                                            |                  | VERSIÓN | PÁGINA | DE  |  |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                                                         | FECHA DE EMISIÓN | DÍA     | MES    | AÑO |  |
|                                                                                   |                                                                            |                  |         |        |     |  |




**MONITOR DE SIGNOS VITALES**

**MARCA:** ADVANCED  
**MODELO:** PM-200M


### Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

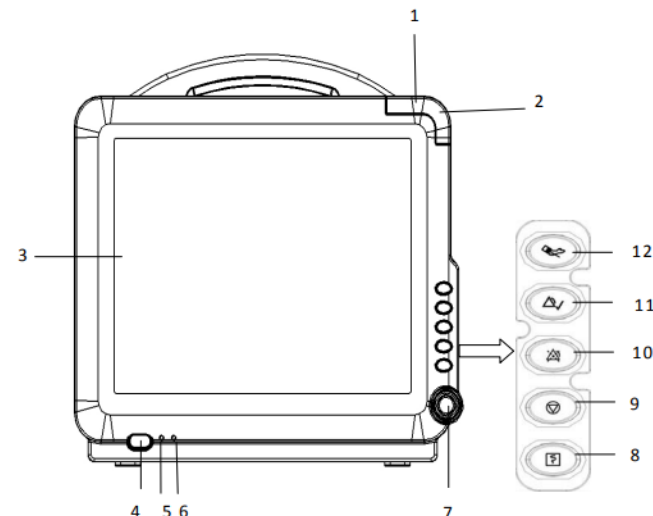

| No. | Nombre                               | No. | Nombre                                                                    |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Luz indicadora de alarma fisiológica | 7   | Perilla de ajuste                                                         |
| 2   | Luz indicadora de alarma técnica     | 8   | Botón de iniciar grabación                                                |
| 3   | Pantalla                             | 9   | Botón de congelar y descongelar ondas                                     |
| 4   | Botón de encendido/apagado           | 10  | Botón para pausar y reactivar alarmas                                     |
| 5   | Luz indicadora de encendido/apagado  | 11  | Botón de confirmar las alarmas activas. Apaga los indicadores de alarmas. |
| 6   | Luz indicadora de batería cargándose | 12  | Botón para iniciar o detener la medición de PANI.                         |

|                                                                                   |                                                                            |                  |         |        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | CÓDIGO           |         |        |     |  |
|                                                                                   |                                                                            |                  | VERSIÓN | PÁGINA | DE  |  |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                                                         | FECHA DE EMISIÓN | DÍA     | MES    | AÑO |  |

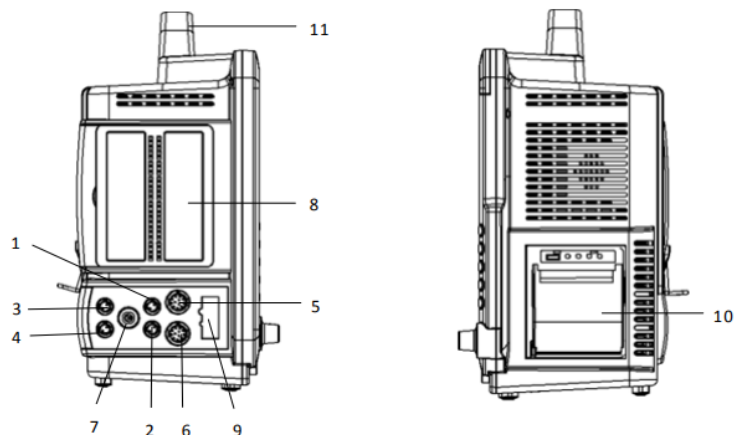

| No. | Nombre          | No. | Nombre                                      |
|-----|-----------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Conector TEMP 1 | 7   | Conector PANI                               |
| 2   | Conector TEMP 2 | 8   | Ranuras del modulo                          |
| 3   | Conector PI 1   | 9   | Conector SpO2 (especial para NelloCor SpO2) |
| 4   | Conector PI 2   | 10  | Grabar                                      |
| 5   | Conector SpO2   | 11  | Manija                                      |
| 6   | Conector ECG    |     |                                             |

### Aceptar paciente nuevo.

Ingresa a [Gestión Paciente] → [Admitir paciente] → [S1] para descargar al paciente si se ha admitido a otro paciente antes. Ingresa los datos básicos del paciente, configure [Tipo de Paciente] (adulto, pediátrico o neonato) y [Marcapasos].

### Monitorización ECG/RESP:

- Prepare la piel del paciente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor este encendido y preparado para monitorizar.
- Seleccione el área de parámetros ECG, ingrese al menú de configuración de parámetros del ECG, seleccione [Tipo de derivación] y seleccione la configuración usada.
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos, asegúrese de que aparezca el icono  en pantalla, de no ser así revise la sección “RECOMENDACIONES ANTES DE USAR” para configurar el marcapasos.
- La respiración se mide al evaluar el cambio de impedancia que se produce entre los electrodos, para su configuración seleccione el área de parámetros de Resp, seleccione [Deriv Resp] y puede seleccionar [RA - LA] o [RA - LL]

### Monitorización SpO2:

- Asegúrese de que el monitor se encuentre encendido.
- Seleccione el sensor SpO2 según se requiera.
- Enchufe el cable del sensor SpO2 en el conector del SpO2 en el módulo de medición.
- Coloque el sensor correspondiente (dactilar o neonatal) en el paciente en el sitio adecuado.

### SÍMBOLOS

|                                                                                       |                   |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Encendido/apagado |  | Alarmas apagadas |
|  | Corriente alterna |  | Sonido apagado   |

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

### Monitorización PANI (NIBP):

- Verifique la categoría del paciente. Para cambiarla seleccione [Menu principal] → [Gestion Paciente] → [Admitir Paciente] y seleccione el tipo de paciente según se requiera.
- Seleccione el brazalete apropiado según la categoría del paciente.
- Conecte el enchufe de la bomba de aire del brazalete al conector del monitor hasta que el enchufe y el tomacorriente hagan contacto correctamente. (para retirarlo deberá pellizcar la parte del enchufe de la bomba de aire del brazalete con los dedos antes de tirar y sacarlo)
- Ajuste el brazalete a la parte superior del brazo o del muslo del paciente y asegúrese de que la marca “Φ” se encuentre por arriba de la arteria del paciente.

Utilice el botón  para iniciar la medición o la tecla  para detenerla


### Monitorización de temperatura (Temp)

- Seleccione el tipo y tamaño correcto de sonda para su paciente.
- Inserte el cable de temperatura en el conector de temperatura del monitor.
- Aplique la sonda al paciente correctamente.
- Verifique que la configuración de alarma sea adecuada para el paciente.

### Monitorización de IBP:

- Inserte el cable IBP en el conector IBP del monitor.
- Conecte el cable IBP al transductor de presión descartable.
- Llene el transductor y el tubo de extensión con agua salina mezclada con heparina. Presione la llave para expeler el agua salida de la salida de aire y eliminar todo el aire de la tubería. Asegúrese de que no haya burbujas de aire en el transductor y las llaves.

- Calibre el transductor a presión cero:
  - Desactive la llave del paciente (Llave 2).
  - El transductor debe ventilar a presión atmosférica.
  - El transductor se coloca al mismo nivel que el corazón del paciente, aproximadamente en la línea media axial.
  - Seleccione la tecla inteligente [Cero] o presione el botón  del módulo IBP y seleccione la etiqueta IBP a calibrar a cero.
  - Espere 3 segundos hasta que el procedimiento finalice. La válvula de presión que aparece en pantalla volverá aproximadamente a cero.
  - Cierre la llave a presión atmosférica y abra la llave al paciente.
- Conecte el tubo de extensión del transductor al vaso sanguíneo con las agujas para arterias y asegúrelo. Asegúrese de que la llave 1 y la llave 2 de tres vías este encendidas, deberán aparecer las formas de onda de PS en la pantalla del monitor.
- Enjuague el sistema con agua salina mezclada con heparina una vez cada 15 minutos para evitar atascos en la tubería.

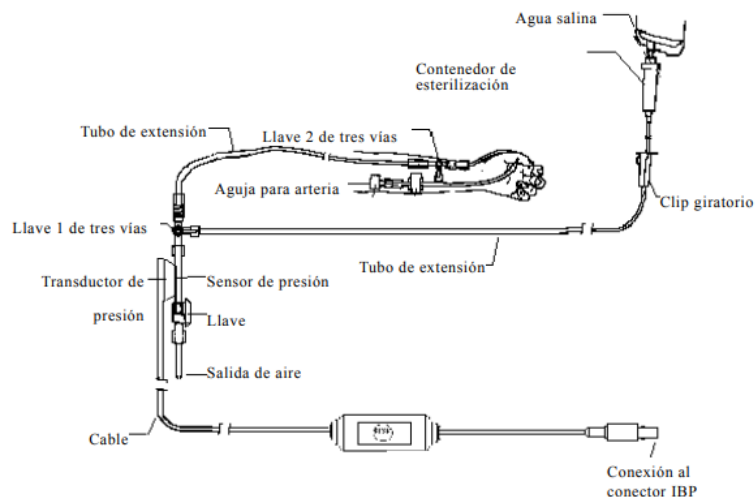

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

| Parte/Accesorio       | Limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave o con una esponja embebida en detergente.</li> <li>● No sumerja el monitor en líquidos y asegúrese de no derramar liquido sobre el instrumento.</li> <li>● Secar a temperatura ambiente durante al menos una hora</li> </ul>                                                                                   |
| Cable ECG             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Limpie la superficie del cable con un paño suave rociado con agua o agua con jabón neutro</li> <li>● Friegue el cable con un paño suave rociado con desinfectante.</li> <li>● Quite el desinfectante remante con un paño suave rociado con agua.</li> <li>● Coloque el cable en un lugar refrigerado y a la sombra para que se airee.</li> </ul>                        |
| Sensor SpO2           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se puede utilizar el método del cable ECG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensor de temperatura | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se puede utilizar el método del cable ECG.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brazalete PANI (NIBP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Extraiga el brazalete del conector y quite la bolsa de aire de la funda</li> <li>● Limpie la bolsa de aire y el tubo con un paño sumergido en agua potable o con jabon neutro y séquelos con un paño.</li> <li>● Limpie la funda del brazalete en el agua limpia con jabón neutro.</li> <li>● Coloque la cámara de aire dentro de su cubierta una vez secos.</li> </ul> |

### RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

### ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el desfibrilador, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

| FALLA                                                   | POSIBLE CAUSA                                                                                                                  | ACCIÓN POR REALIZAR                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El equipo no enciende.</b>                           | Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.                                                               | Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.                                                                    |
|                                                         | Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.                                            | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
| <b>Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo</b> | Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta. | Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión. |
| <b>Medición falsa de los parámetros</b>                 | Ruptura o falso contacto de los cables.                                                                                        | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
|                                                         | Incorrecta colocación de los electrodos ECG                                                                                    | Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.                                                                                                     |
| <b>Descargas eléctricas en el paciente</b>              | Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.         | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
|                                                         | Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.                                                               | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
| <b>Deterioro de la salud del paciente.</b>              | Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.                                                                 | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |