

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: ISOLETTE	VERSIÓN: 1
	MODELO: C550H-1	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo empleado para dar soporte vital a los bebés recién nacidos, bien sean prematuros o a término, que no estén preparados para adaptarse al medio extrauterino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra
- Evite la radiación directa del sol y otra fuente infrarroja la cuales pueden causar sobrecalentamiento del bebé
- Agregue agua destilada en la incubadora hasta la línea límite y así se evita la pérdida de agua del infante.
- Recuerde revisar constantemente los valores de humedad del equipo.

PARTES DEL EQUIPO

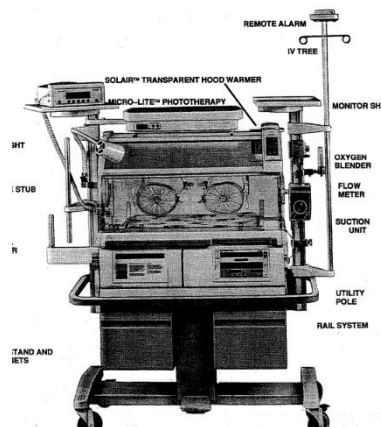

Partes del equipo delanteras:

1. Compartimento para el bebé
2. Panel de control del equipo
3. Base de la incubadora
4. Gabinete móvil de la incubadora
5. Repisa de la incubadora para accesorios
6. Atril
7. Alimentación y sensores para el bebé
8. Suministro de O₂ y H₂O

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO


1. Verifique que el equipo esté conectado a la red eléctrica
2. Verifique que los accesorios de monitoreo estén conectados
3. Verifique que los frenos estén activados
4. Adicionar el agua destilada en el compartimento de suministro del equipo
5. Revise los filtros de aire del equipo
6. Accione el botón de ON/OFF
7. Configurar los parámetros según sean necesarios
8. Mantener el compartimento del bebé lo más cerrado posible.



ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO

1. No excederse ni limitarse a la medida de H₂O del equipo
2. Evite las altas temperaturas
3. Evite ubicar el equipo cerca de gases medicinales
4. Evite ubicar el equipo cerca de campos electromagnéticos

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: ISOLETTE	VERSIÓN: 1
	MODELO: C550H-1	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2022

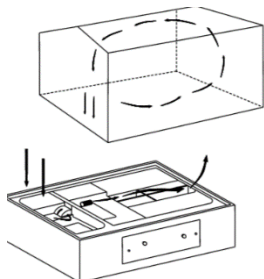PRINCIPIO DE CONTROL DE TEMPERATURA El funcionamiento de control de temperatura dentro de la cámara se logra por medio del sistema de circulación forzada de aire: 1. El aire exterior se filtra 2. Fluye a través del calentador 3. El aire entra a la cámara a través del puerto de entada 4. Ese aire baja directamente al motor de ventilador 5. Se convierte en flujo de aire, y este llega al tanque de agua 6. Finalmente, entrara a la cámara de vapor sobre el agua. 	NIVELES DE ALARMA <table><tr><td>ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA</td><td>Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible</td></tr><tr><td>ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA</td><td>Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales</td></tr><tr><td>ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO</td><td>Indica que los motores no están trabajando</td></tr><tr><td>ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR</td><td>Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.</td></tr></table> CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIA de Riesgo moderada.	ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA	Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible	ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA	Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales	ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO	Indica que los motores no están trabajando	ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR	Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.	 MODOS DE TRABAJO 1. MODO AIRE: Control de la salida del calentador por el sensor de T° aire. 2. MODO BEBÉ: Control de la salida del calentador por el sensor de T° de la piel. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  1. No limpie el monitor con material abrasivo. 2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco. 3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA	Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible									
ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA	Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales									
ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO	Indica que los motores no están trabajando									
ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR	Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.									