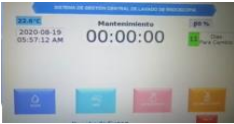
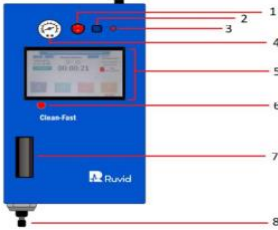


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012				
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
					9	01	2024		
Nombre del equipo: LAVADORA DE PROCESAMIENTO		Modelo:	CLEAN FAST		Riesgo del equipo:		NO APLICA		
Marca: RUVID				Clasificación del equipo:		APOYO			
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		3. Verifique que las mangueras se encuentran conectadas a los adaptadores de gases medicinales.		CARACTERISTICAS					
El Clean-Fast es un dispositivo tecnológico para el reprocesamiento de endoscopios. Incluye limpieza, desinfección y secado de los endoscopios. 		4. Seleccione la opción indicada de acuerdo al líquido a irrigar. (agua, detergente, desinfectante) o aire.		Realiza pruebas de fugas, lavado, desinfección y secado de canales.					
				Cuenta con indicadores de temperatura y humedad.					
				El equipo tiene pantalla táctil para su interacción.					
		5. Espere que el Clean-Fast termine el ciclo de irrigación y luego		Compatible con todas las marcas de endoscopios.					
				Compatible con todas las marcas de desinfectantes.					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PARTES DEL EQUIPO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN					
Fuente de alimentación: 110 V				La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%					
Temperatura: 18 - 70 °C				RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO					
Humedad: 0 - 70%				Después de cada ciclo de reproceso, limpie la superficie externa de los conectores de ensamble con paño y solución de detergente. Enjuague con agua limpia.					
Pantalla touch				Nunca limpie el equipo mientras se encuentre conectado a la red eléctrica					
1024X600, 7 inch capacitive. touch screen LCD, interfaz HDMI				SOLUCION DE PROBLEMAS					
Soporta win7 / win8 / win10				Si su Clean-Fast no está funcionando correctamente, verifique lo siguiente:					
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		1. Switch de encendido		Asegúrese de que la unidad esté enchufada a una toma de pared con corriente. Asegúrese de que el interruptor GFCI no haya sido disparado.					
1. Presione el botón de encendido		2. Indicador auditivo							
2. En la pantalla introduzca su usuario y la contraseña.		3. Indicador visual		Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado (ubicado en la parte frontal) esté encendido.					
		4. Manómetro de presión							
		5. Pantalla touch cream							
		6. Botón de reset							
		7. Contenedor de líquidos							
		8. Válvulas de conexiones de mangueras al endoscopio							
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:									
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.									
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica									
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo									
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y cómo utilizar cada uno de ellos.									
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.									
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y cómo solucionarlas									
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.									