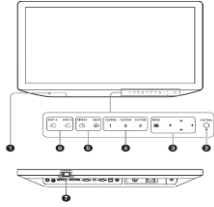


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:			
		DÍA: 4 MES: 01 AÑO: 2024				
Nombre del equipo:	Monitor	Modelo:	LMD-2435MD	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	SONY			Clasificación del equipo:	APOYO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MENSAJES DE ERROR		
Los monitores LCD Sony LMD-2735MD/2435MD están diseñados para la visualización en color de imágenes de vídeo en dos dimensiones de cámaras quirúrgicas de endoscopia/laparoscopia y otros sistemas de imágenes médicas compatibles. Son monitores panorámicos en alta definición para el sector médico para utilizar en tiempo real en procedimientos quirúrgicos poco invasivos y están indicados para su utilización en quirófanos de hospitales, centros de cirugía, clínicas, consultas médicas y otros entornos médicos similares.				Si aparecen los siguientes mensajes en la pantalla, apague el equipo y póngase en contacto con un distribuidor Sony autorizado.		
		1. Indicador de encendido.		Mensajes		
		2. Tecla de control.		Descripcion		
		3. Boton del menu de operaciones y flechas para desplazarse.		Error de temperatura		
		4. Botones para personalizar sus funciones		La temperatura de esta unidad a subido.		
		5. Botones de ajuste de visualización de varias imágenes.				
		6. Botones de selección de entrada.		SOLUCION DE PROBLEMAS		
		7. Interruptor (encendido)/ (en espera)		La pantalla aparece en color verde o púrpura: Si está seleccionado HD15, realice la selección RGB/YPbPr correctamente.		
		CARACTERISTICAS		La unidad no funciona: La función de protección de teclas está activada. Establezca el ajuste de Bloqueo de control en No en el menú Bloqueo de control.		
		Imágenes Full HD de 24" nítidas y de alta resolución		Las imágenes de vídeo no aparecen en la pantalla: Si se recibe la señal de PC en HD15, seleccione RGB en RGB/YPbPr.		
ESPECIFICACIONES TECNICAS				No aparece la imagen de la señal DVI-D: Cuando la señal protegida con HDCP se recibe en el conector DVI-D y Conf. HDCP está establecido en "Desactivar", la imagen no aparece en la pantalla. Establezca Conf. HDCP en "Activar".		
1. Panel: LCD de matriz activa TFT a-Si		Diseño de empuñadura sencillo y ergonómica		PRECAUCIONES		
2. Resolucion (H x V): 1920 x 1080 (full HD)		Marco mas pequeño y pantalla de mayor tamaño		Evite entrar en contacto con los terminales de los conectores del panel trasero y los pacientes simultáneamente.		
3. Aspecto 16:09		Funcionamiento fácil e intuitivo		No se debe exponer el aparato a goteos ni salpicaduras. Tampoco se deben colocar sobre él objetos llenos de líquido, como los floreros.		
4. Retroiluminacion: LED		Diseño empotrado sin bordes fácil de limpiar		No use el dispositivo en un entorno de RM (resonancia magnética). Es posible que se produzca una avería, un incendio o un movimiento no deseado.		
5. Tecnologia de panel: LCD con IPS		Amplia gama de entradas de señal digital y analógica				
6. Luminacion: 300 cd/m2		Gran variedad de formatos de visualización				
7. Colores: 16,7 millones de colores aproximadamente						
8. Angulo de Visión: 89°/89°/89°/89° (típico)						
9. Tamaño de la imagen (diagonal): 604,7mm						
10. Tamaño efectivo de la imagen (H x V): 527.0 x 296,5 mm / 20 3/4x11 4/4 pulg						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invim.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						