

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE SERVICIO CARDIOLOGÍA			 Res. No. 16740, 2017-2021.	 Universidad AUTÓNOMA de Occidente Vigilada MinEduación.	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Pulsioxímetro			CÓDIGO: NA			
MARCA: Huntleigh			VERSIÓN: 1			
MODELO: Minipulse			FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022			

USO DEL EQUIPO




Equipo usado para el monitoreo continuo no invasivo de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca, a través de un sensor tamaño adulto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Conectar el equipo a un punto de red eléctrica de 120V y que tenga conexión a tierra
- Baterías de aproximadamente 60 horas, cuando sea necesario cargar durante 6.5 horas
- No recargue el equipo conectado a un paciente
- Este dispositivo está diseñado para indicar una alarma si se mide la saturación o la frecuencia

PARTES DEL EQUIPO

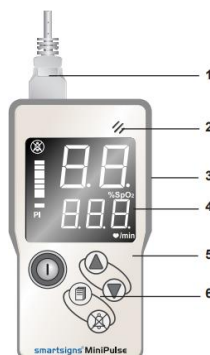

Partes

1. Conexión del sensor
2. Altavoz
3. Zona de sujeción protectora
4. Pantalla
5. Panel frontal
6. Teclado

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO


1. Asegúrese de que el pulsioxímetro se encuentre con pilas por lo cual deslice el pestillo del compartimento de las pilas para extraer la tapa.
2. Verifique que el equipo tenga cuatro pilas de tamaño "AA", ubicadas en la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas antes de utilizar el dispositivo.
4. Pulse el botón de Encendido/Apagado. Durante el encendido, el sistema realiza una autocomprobación, las pantallas se iluminan durante 3 segundos y se entra en el modo de medición.
5. Conecte la sonda al pulsioxímetro
6. Introduzca el dedo del paciente en la punta de la sonda del oxímetro
7. Asegúrese de que el cable se extienda a lo largo del dorso de la mano del paciente
8. Tras un breve período de tiempo, el sistema muestra el nivel de saturación y la frecuencia del pulso del paciente. El indicador de pulso se sincronizará con el tono de pulso sonoro (si está activado)

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: Pulsioxímetro		CÓDIGO: NA	
MARCA: Huntleigh		VERSIÓN: 1	
MODELO: Minipulse		FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022	

cardíaca se encuentran fuera de los límites de alarma establecidos por el usuario.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El oxímetro utiliza un tipo especial de luz que atraviesa la piel y llega a la sangre. El oxímetro tiene un sensor que mide la cantidad de luz. Esa medición se usa para calcular su nivel de oxígeno en sangre. Después de unos segundos, el oxímetro muestra su frecuencia cardíaca y su nivel de oxígeno.

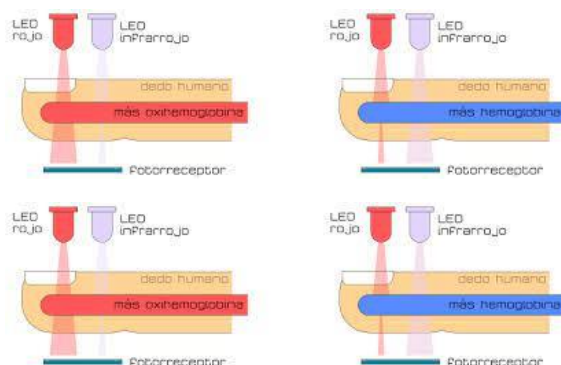

PANTALLA Y ALARMAS DEL EQUIPO



Elemento	Descripción	
1	%SpO ₂	- Saturación del paciente - La alarma 'intermitente' indica que se ha superado el umbral
2	♥/min	- Frecuencia del pulso del paciente - La alarma 'intermitente' indica que se ha superado el umbral
3	Fuerza de pulso	Fuerza de pulso e indicador de pulso (PI) con barra gráfica de 8 segmentos
4	Interrupción de alarma	Iluminado: alarma desactivada

- Pulse y mantenga pulsado el botón ARRIBA para que aparezca la fuerza de pulso. La barra gráfica se ilumina en función de la fuerza de la señal de pulso.
- Pulse el botón de Encendido/ Apagado para apagar el equipo

LIMPIEZA Y DESINFECCION

Asegúrese que el equipo este apagado

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

CLASIFICACION DE RIESGO

Clasificación IIA de Riesgo moderada