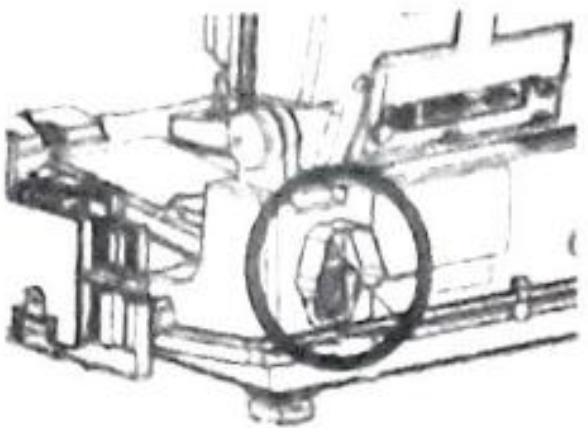
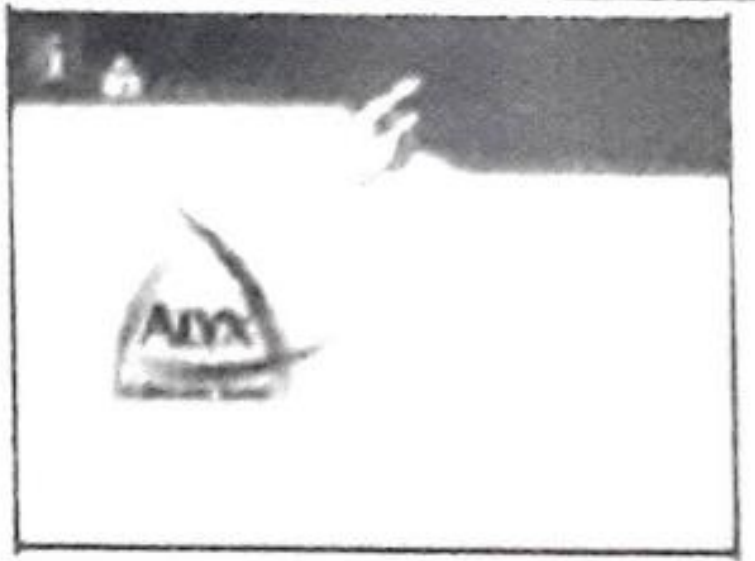
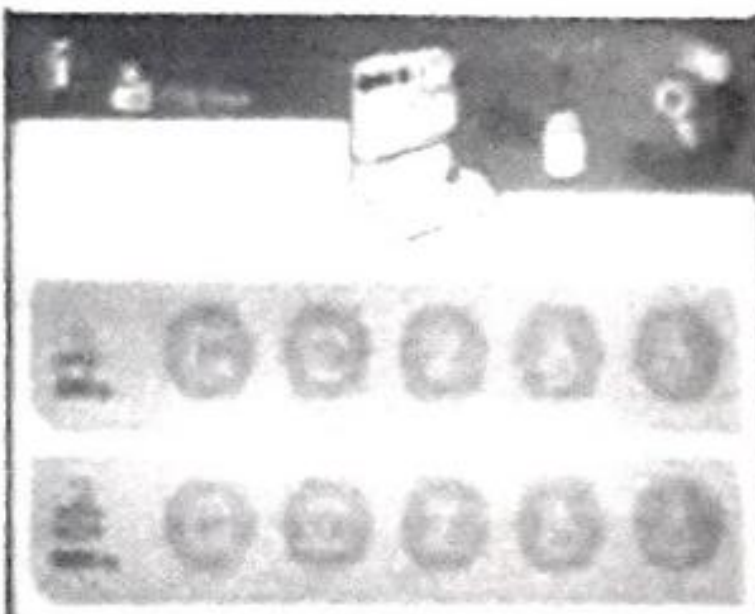
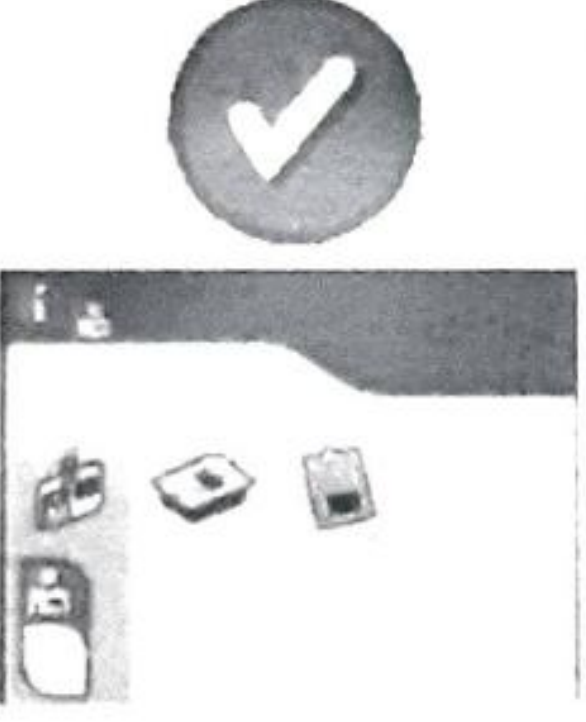
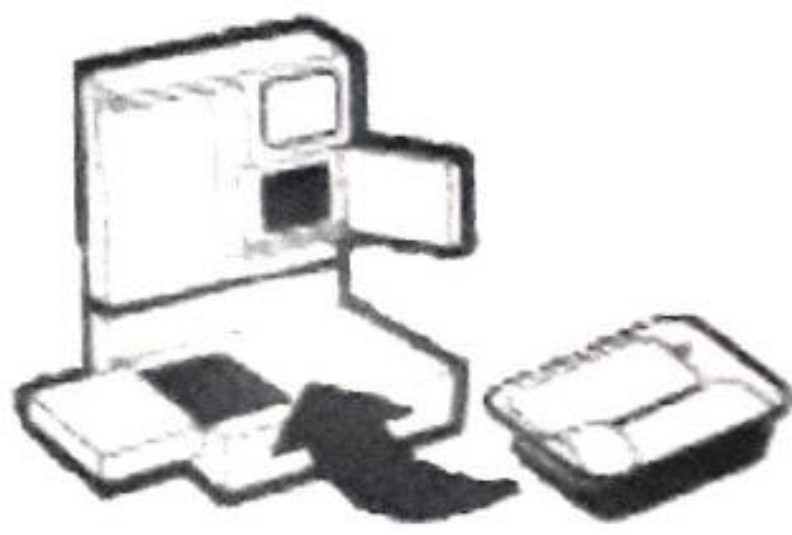


Ref. Guía Rápida de Utilización Alyx

1. Encienda la máquina del botón de encendido ubicado en la parte trasera.		2. Ahora debe aparecer en la pantalla táctil la pantalla de la prueba del botón de parada.	
3. Pulse el botón de parada y compruebe que aparezca en pantalla el indicador Comprobación de sonido.		4. Compruebe que aparezca en la pantalla táctil el indicador Colgar pesas. Realice las comprobaciones de balanzas utilizando pesas calibradas de 500 g y 1.000 g.	
5. Coloque las pesas en cada balanza (solución salina, anticoagulante, plasma, hematíes y proceso). Si la comprobación es satisfactoria, el icono de cada balanza será sustituido por el icono Aprobación de la balanza.		6. Si una comprobación no es satisfactoria, aparecerá el icono Fallo de la balanza.	
7. Pulse el botón Comprobar una vez que se hayan realizado con éxito las comprobaciones de balanzas. Aparecerá la pantalla principal de introducción de datos, en la que deben introducirse los datos del operador, el kit y el donante.		8. Luego de introducir los datos asegúrese de que aparezca el indicador Cargar kit en la pantalla táctil, que le indica que puede instalar el estuche de Alyx según indicaciones de entrenamiento previo recibido por el operador.	
9. Luego de instalar el kit presione el botón Comprobar. Aparecerá en la pantalla táctil el indicador Cerrar pinza de la vía del donante.		10. Asegúrese de que las dos pinzas de la vía del donante y de la bolsa de la muestra estén cerradas. Pulse el botón Comprobar para verificar que se haya cerrado la pinza de la vía del donante.	
11. El icono Autocomprobación aparece en la esquina superior derecha de la pantalla táctil durante el tiempo restante aproximado para las comprobaciones del kit.		12. Aparecerá el indicador Romper cánulas. Rompa las cánulas de los recipientes de solución (solución salina, solución conservante de hematíes y anticoagulante).	

13. Pulse el botón Comprobar para verificar que se han roto todas las cánulas.		14. Aparecerá el icono Cebiar con el tiempo restante aproximado de la secuencia de cebado.	
15. Una vez terminado el cebado, aparece en pantalla el indicador Realizar venopunción.		16. Coloque el manguito de presión en el brazo del donante y pulse el botón Manguito de presión insuflándolo.	
17. Realice la venopunción, fije la aguja al brazo del donante y pulse el botón Comprobar.		18. Aparecerá en la pantalla táctil el indicador Tomar muestra. Abra la pinza de la bolsa de la muestra y obtenga una cantidad de sangre suficiente para las muestras y pulse el botón Comprobar.	
19. Aparecerá en la pantalla táctil el indicador Abrir pinza. Abra la pinza de la vía del donante. Pulse el botón Extraer para verificar que se haya abierto la pinza e iniciar el procedimiento. El procedimiento comenzará la primera fase de extracción.		20. Al finalizar la donación suena una señal Sonora y se muestra el indicador Desconectar donante. Mientras lo desconecta, el ALYX comenzará a procesar los hematíes y se mostrará el icono Procesamiento. Esto indica que el sistema ALYX ha comenzado a procesar los productos de hematíes.	 
			
21. Cuando se pulsa el botón Comprobar después de desconectar al donante, aparece en la pantalla táctil el indicador Eliminación de aire del producto.		22. Después de retirar el aire selle la vía entre el filtro de leucorreducción y la bifurcación en "Y", justo al lado de la "Y". También selle y retire las bolsas de ACD, Adsol y solución salina.	
23. Compruebe que aparezca en la pantalla táctil el indicador Colgar producto. A continuación, pese los productos de hematíes, deje que las lecturas se estabilicen y pulse el botón Comprobar para confirmar que los productos se han colgado y pesado.		24. Aparece en la pantalla táctil el indicador Descargar kit y los resultados del proceso realizado. Retire el kit conforme al entrenamiento recibido previamente por el operador.	