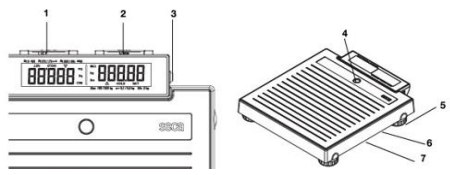


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA: 6	MES: 09

Nombre del equipo:	Báscula de piso	Modelo:	874DR	Riesgo del equipo:	I
Marca:	SECA			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	FUNCIONAMIENTO PRELIMINAR
 El equipo determina el peso y ofrece la función 2in1. La estructura tiene burbuja niveladora. Esta especialmente diseñada para su uso en las prácticas médicas. La pantalla LCD puede leerse desde posiciones opuestas y dispone de un botón que permite encender la báscula cómodamente con el pie, por lo que la convierte en el dispositivo ideal para todo consultorio médico. Es lo suficientemente ligera para que se pueda trasladar a varias salas de tratamiento y lo suficientemente sólida para que pueda confiar durante años en su funcionamiento.	 1. Tecla 2 in 1 2. Tecla START 3. Interruptor CON/DES 4. Fiolá 5. Tornillo nivelador 6. Conexión de red	1. Inspeccionar partes y accesorios en busca de averías o señales de golpes. 2. Coloque las pilas en el compartimento para las baterías, recuerde también que el equipo tiene la opción de conexión a corriente. 3. Posicione el equipo en una superficie plana y firme.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Capacidad de carga: 200 kg / 440 lbs 2. División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs 3. Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 361 mm / 12.6 x 2.4 x 14.2" 4. Dimensiones de la plataforma (AxAxP): 288 x 60 x 280 mm / 11.3 x 2.4 x 11". 5. Peso neto: 4.1 kg / 9 lbs. 6. Alimentación: baterías, adaptador de red eléctrica (opcional). 7. Funciones: Función madre/bebé, Auto-HOLD,	RECOMENDACIONES 1. El equipo debe ser usado solo por personal capacitado. 2. El equipo debe mantener sobre una superficie plana y estable. 3. Para configuraciones, ajustes y demás funcionalidades del equipo, dirigirse estrictamente al	INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO 1. Recuerde mantener el equipo en una superficie plana y firme, sin ningún peso sobre la plataforma. 2. Luego de encender el equipo, espere que aparezca en pantalla "0.00", pida al usuario o paciente que se ubique en la plataforma de la báscula. Seguido, lea en pantalla el valor de peso. 3. La función "2in1", permite pesar bebés y niños pequeños que se encuentren en brazos. Para utilizar esta función, el paciente debe subirse a la báscula sin bebé y quedarse quieto, luego oprimir el botón "2in1" para activar la función. La báscula memoriza el peso de la persona adulta y luego la pantalla aparece en cero "0.00", seguido cargue al niño en brazos sobre la báscula, de esta manera el equipo calcula el peso del niño.
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	ALARMAS Y POSIBLES ERRORES 1. La balanza con carga no indica ningún peso: La báscula no tiene alimentación eléctrica. Comprobar que la báscula esté conectada. Comprobar que se han puesto las pilas. 2. Antes del pesaje no aparece 0.00: El peso se colocó antes de encender la báscula. Retirar el peso de la báscula. Apagar y volver a encender la báscula. 3. Aparece el aviso bAtt: Las pilas están gastadas. Colocar pilas nuevas 4. Aparece el aviso St0p: Se ha superado el peso

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.