

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
MARCA: ATOM	VERSIÓN: 1
MODELO: v-2100G	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo empleado para dar soporte vital a los bebés recién nacidos, bien sean prematuros o a término, que no estén preparados para adaptarse al medio extrauterino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra
- Evite la radiación directa del sol y otra fuente infrarroja la cuales pueden causar sobrecalentamiento del bebé
- Agregue agua destilada en la incubadora hasta la línea límite y así se evita la pérdida de agua del infante.
- Recuerde revisar constantemente los valores de humedad del equipo.

PARTES DEL EQUIPO

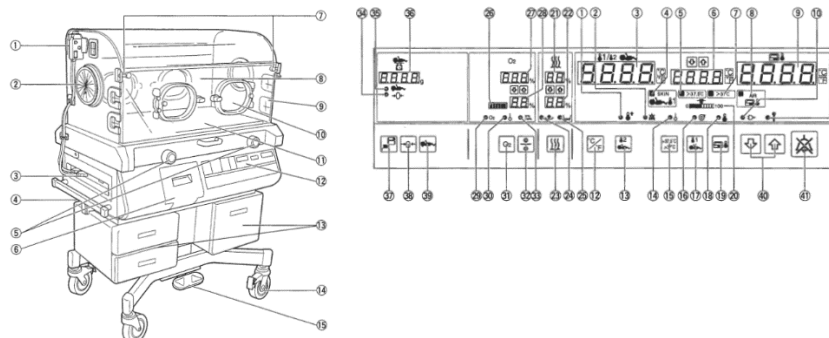

Partes delanteras del equipo:

1. Módulo del sensor
2. Acceso al puerto iris
3. Caja de relés
4. Carril de MF
5. Perilla para la inclinación de la plataforma del colchón
6. Cobertura del canal de humedad
7. Perilla de operación del panel de entrada frontal
8. Panel de entrada frontal
9. Hendidura del tubo de introducción
10. Acceso al puerto Snap-open
11. Colchón
12. Panel de control
13. Cajón
14. Accesorio de las ruedas
15. Pedal de freno o elevación

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que el equipo esté conectado a la red eléctrica
2. Verifique que los accesorios de monitoreo estén conectados
3. Verifique que los frenos estén activados
4. Adicionar el agua destilada en el compartimento de suministro del equipo
5. Revise los filtros de aire del equipo
6. Accione el botón de ON/OFF
7. Configurar los parámetros según sean necesarios
8. Mantener el compartimento del bebé lo más cerrado posible.



ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO


1. No excederse ni limitarse a la medida de H₂O del equipo
2. Evite las altas temperaturas
3. Evite ubicar el equipo cerca de gases medicinales

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: ATOM	VERSIÓN: 1
	MODELO: v-2100G	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/2022

PRINCIPIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

El funcionamiento de control de temperatura dentro de la cámara se logra por medio del sistema de circulación forzada de aire:

1. El aire exterior se filtra
2. Fluye a través del calentador
3. El aire entra a la cámara a través del puerto de entada
4. Ese aire baja directamente al motor de ventilador
5. Se convierte en flujo de aire, y este llega al tanque de agua
6. Finalmente, entrara a la cámara de vapor sobre el agua.

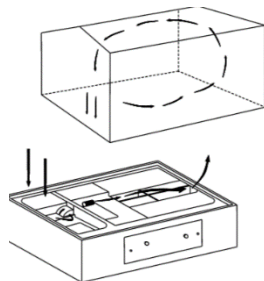

Partes del panel frontal:

1. Indicador de alarma de temperatura alta
2. Indicador de que la alarma esta en silencio
3. Display o LCD de temperatura de la piel
4. Indicador del servo
5. Indicador de que la temperatura es >37.5
6. Display de temperatura
7. Indicador de que la temperatura es <37.5
8. Indicador de control manual
9. Display de temperatura del aire
10. Indicador del estado de batería
11. Indicador del sistema de alarmas

NIVELES DE ALARMA



ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA	Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible
ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA	Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales
ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO	Indica que los motores no están trabajando
ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR	Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de Riesgo moderada

4. Evite ubicar el equipo cerca de campos electromagnéticos
5. Evite usar extensiones de conexión



MODOS DE TRABAJO

1. **MODO AIRE:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° aire.
2. **MODO BEBÉ:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° de la piel.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.