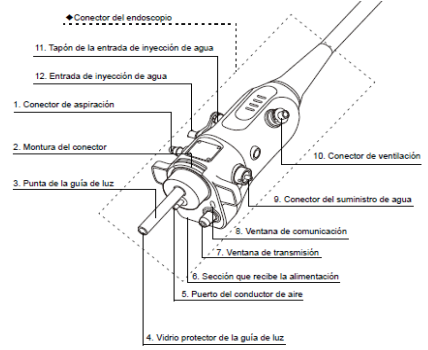
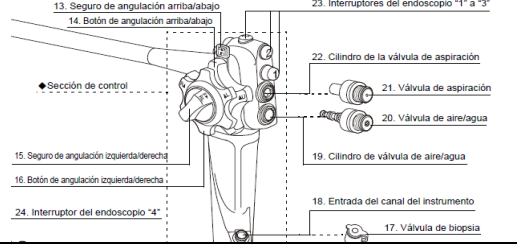
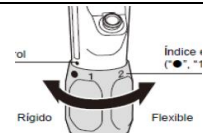
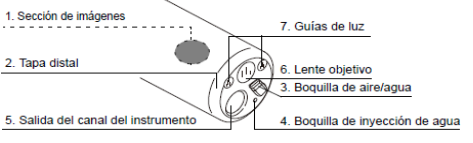
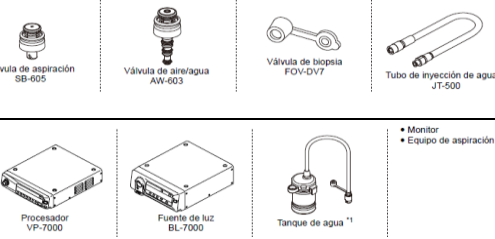
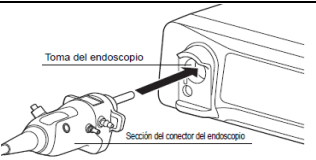


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01
		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA 15 MES 03 AÑO 2023
Nombre del equipo:	Videocolonoscopio	Modelo:	EC-760R-V/L / EC-760ZP	
Marca:	FUJIFILM	Riesgo del equipo:	IIA	
		Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		
 Dispositivo médico de diagnóstico y tratamiento para el tracto gastrointestinal inferior destinado a la observación, diagnóstico y tratamiento endoscópico del recto, el colon sigmoideo y el intestino.				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PARTES DEL EQUIPO		
1. Dirección de visualización: Frontal				
2. Campo de visión: 170º		13. Seguro de angulación arriba/abajo.		
3. Rango de observación normal: 2 - 100mm		14. Botón de angulación arriba/ abajo.		
4. Longitud de trabajo: 1690mm		15. Seguro de angulación izquierda/ derecha.		
5. Diametro de canal de trabajo: 3.8 mm / 3.2 mm		16. Botón de angulación izquierda/ derecha.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		17. Válvula de biopsia.		
1. Lavado preliminar del colonoscopio con jabon enzimático.		18. Entrada del canal del instrumento.		
2. Desmontaje del endoscopio de la unidad.		19. Conexión de válvula de aire/ agua.		
3. Realizar el procedimiento de desinfección /o esterilización.		20. Válvula de aire/ agua.		
4. Realizar la pre limpieza del equipo.		21. Válvula de aspiración.		
5. Realizar las pruebas de fuga correspondientes.		22. Conexión para válvula de aspiración.		
6. Realizar limpieza mecanica del equipo.		23. Interruptores de endoscopio 1 a 3.		
7. Realizar desinfección de alto nivel del equipo.		24. Interruptor de endoscopio Nº 4.		
8. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.		AJUSTE DE FLEXIBILIDAD DEL EQUIPO		
		1. De acuerdo a la imagen, si ajusta la flexibilidad hacia la derecha el tubo se vuelve más rígido.		
		2. De acuerdo a la imagen, si ajusta la flexibilidad hacia la izquierda el tubo se vuelve más flexible		
				
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:				
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.				
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica				
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo				
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.				
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.				
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas				
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.				

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	02	DE	02
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				15	03	2023		

Nombre del equipo:	Videocolonoscopio	Modelo:	EC-760R-V/L	Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	FUJIFILM			Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO

PARTES DEL EXTREMO DISTAL DEL ENDOSCOPIO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO	
		1. Realice la inspección del extremo distal, realizando pruebas de funcionamiento y verificación de la punta: Revisando que no presente rasguños, grietas ni anomalías. 2. Gire los seguros de angulación para realizar diferentes pruebas de funcionamiento. 3. Coloque la válvula de biopsia en la entrada del canal del instrumento del endoscopio. 4. Coloque la válvula de aspiración en la conexión del equipo, alinee las dos crestas metálicas de la válvula de aspiración con los dos orificios de conexión y empuje la válvula con firmeza		10. Encienda el carro, el procesador, la fuente de luz y el monitor. 11. Realice pruebas básicas para visualizar que la imagen se este entregando de manera correcta en el monitor. 12. Coloque al paciente de forma adecuada siguiendo los protocolos de la institución. 13. Dirija el extremo distal del endoscopio hacia el lugar de la biopsia y realice el procedimiento requerido. 14. Realice las tomas necesarias para el estudio. 15. Endurezca la parte curva del endoscopio hasta que quede casi recta accionando las perillas de control de Angulo.	
1. Sección de imágenes. 2. Tapa distal. 3. Boquilla de aire/ agua. 4. Boquilla de inyección de agua 5. Salida del instrumento.		5. Conecte la válvula de aire/agua en la conexión del equipo y empuje la válvula con firmeza.		16. Extraiga lentamente el equipo, después de terminar el estudio.	
PASOS A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR EL COLONOSCOPIO 1. Prepare los equipos y los accesorios del mismo.		6. Coloque el tubo J en el endoscopio después de conectar el endoscopio a la fuente de luz. 7. Inserte el conector del endoscopio en la toma de la fuente de luz del endoscopio con la etiqueta. donde el nombre de modelo este orientado hacia arriba		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES	
				No hay imagen en el monitor de video. Imagen oscura en la pantalla	
ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO 1. Válvula de biopsia FOV-DV7 2. Válvula de aire/agua AW-603 3. Válvula de aspiración SB-605 4. Cepillo de limpieza para canales WB7024FW 5. Adaptador de limpieza CA-610 6. Kit de lavado del equipo 7. Maletín de transporte		8. Alinee la clavija del conector del suministro de agua del endoscopio con la ranura en el conector del tanque de agua. 9. Coloque el tanque de agua en la posición especificada.		El endoscopio no está conectado correctamente a la fuente de luz. El nivel de brillo está ajustado en la posición "MIN" El modo iris está ajustado en "MAXIMO" El extremo distal se encuentra sucio	
		El equipo no ajusta la flexibilidad No se pueden grabar las imágenes		La sección de inserción está doblada. El grabador de imágenes no está conectado.	

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.	