

ASPIRADOR PULMO MED 7EA

- 1** Equipo biomédico encargado de succionar, irrigar y aspirar secreciones en la vía aérea, lo hace a partir de vacío.



2

COMPONENTES

1. Manómetro de vacío.
2. Conexión de manguera hacia el canister.
3. Canister.
4. Conexión de manguera hacia el canister.
5. Conexión sonda hacia el paciente.
6. Manija de transporte.
7. Perilla reguladora de succión.
8. Botón "encendido/apagado".

3

ACCESORIOS

1. Filtro hidrofóbico
2. Canister
3. Manguera de succión



4

MODO DE USO

Una vez el equipo esté con sus accesorios y conectado a la red eléctrica, dirija la sonda en la zona donde se realizará la succión, encienda el equipo desde el botón (8) y regule con la perilla (7) la succión deseada.



ADVERTENCIA



A la hora de usar el equipo, conectarlo a la red eléctrica y cerciorarse que en su uso no se desconecte, dado que el equipo NO cuenta con batería.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

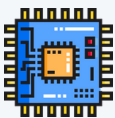

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos