

Báscula Electrónica Para Cama SECA 984

Guía Rápida:

1: Deberá conectarse antes el equipo de alimentación a una caja de enchufe durante 12 horas como mínimo

2: – Llevar el carro hasta junto a la cama.

– Apretar hacia abajo el fijador de las ruedas para bloquear el carro del aparato.

– Quitar una pata de medición y colocarla junto a una rueda de la cama. Plegar hacia fuera la palanca. Para desbloquear la palanca, apretar el botón redondo (Figura 1)

3: – Sujetar la palanca a un ángulo de aprox. 45° del suelo y empujar la pata de medición hacia la cama. El balancín debe estar ahora junto a la rueda de la cama.

– Avanzar ahora la pata de medición. Sujetar el balancín con la otra mano. Ahora se encuentra el balancín debajo de la rueda. (Figura 2)

4: Apretar la palanca hacia abajo. La pata de medición se mete debajo de la rueda de la cama y la levanta. (Figura 3)

5: – Plegar la palanca a la pata de medición.

– Proceder de la misma manera para posicionar las otras patas. (Figura 4)

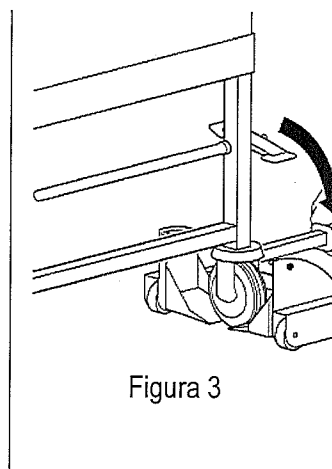
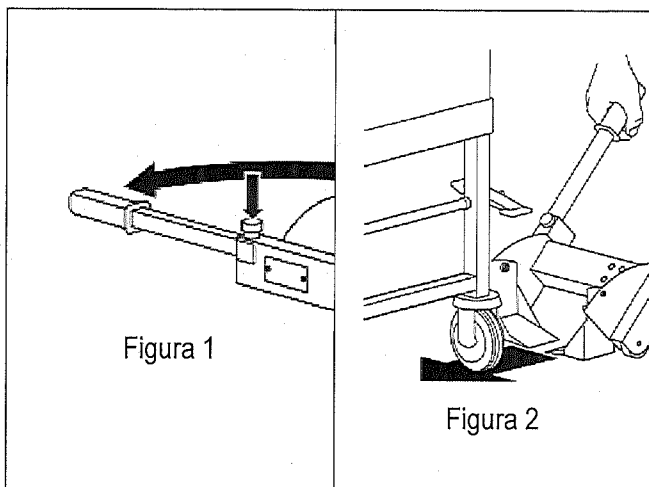


Figura 3

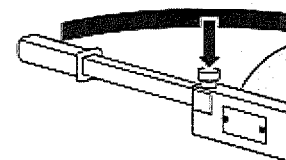


Figura 4

Identificación y uso del panel de control:



Conexión/desconexión de la báscula



corta presión de tecla → conmutación entre l
larga presión de tecla → conmutación entre l
en el menú de funciones → Aumentar el valor, r



Pulsación breve de tecla → Activar/desactivar la
Pulsación larga de tecla → Reponer la indicación
Activar/desactivar la
en el menú de funciones → Reducir el valor, hoj



Activación de las funciones (BMI- Pre-Tare y valo
Tecla confirmadora para entradas, ajuste de la ar

Para más información, Consultar el manual de usuario.

* La báscula seca 984 puede arrancarse con cargas previas de hasta 300 kg. De esta forma es posible arrancar la báscula con la cama montada. Tenga en cuenta que no se debe superar la carga total de 500 kg encima de la báscula y que, al superar la carga total, la báscula reacciona con la indicación de "STOP" o un mensaje de error.

El protocolo de Limpieza y Desinfección se describe a continuación:

- Realizar inspección visual del equipo.
- Realizar la limpieza y desinfección del equipo con desinfectantes tales como: surfasafe o jabón con PH neutro, mediante aplicación directa o a través de limpiadores húmedos, no se recomienda el uso de materiales abrasivos, ni limpieza con tinher o sustancias similares puesto que pueden ocasionar desgaste o averías en el material del equipo.
- No se debe realizar esterilización mediante uso de autoclave.
- Realizar Limpieza y Desinfección todos los días.
- Evitar el uso de agua o productos que puedan caer en la pantalla digital o en el almacenamiento de las baterías.