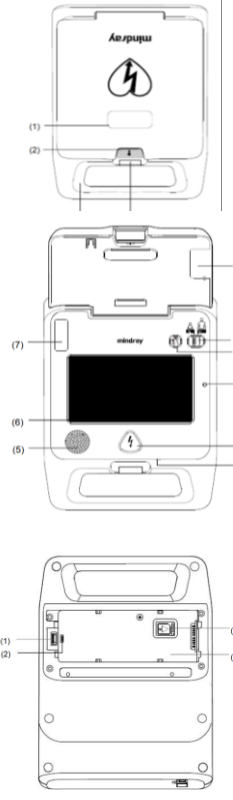


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01	DE 01	
FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA 15	MES 03	AÑO 2023
Nombre del equipo:	DEA	Modelo:	BENEHEARTH C1A		Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	MINDRAY			Clasificación del equipo:	Tratamiento y soporte de la vida	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
Los desfibriladores automáticos BeneHeart de las series C y S están diseñados para el tratamiento de irregularidades en el ritmo cardíaco que puedan poner en peligro la vida del paciente. Existen dos tipos de modelos del producto: semiautomáticos y totalmente automáticos. El equipo analiza el ritmo cardíaco del paciente cuando los electrodos se colocan en su tórax. Si se detecta un ritmo desfibrilable, el modelo semiautomático requiere que el operador administre la descarga; el modelo totalmente automático administra la descarga sin la intervención del operador. Si no se detecta un ritmo desfibrilable, el equipo pasa al estado RCP de forma predeterminada. ■ Los dos tipos de modelos ofrecen indicaciones de voz que guían al usuario en el proceso de desfibrilación. El modelo semiautomático también cuenta con un botón de descarga parpadeante para reforzar las indicaciones de voz				Semiautomático		
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
1. Asegúrese de que el paciente está: Inconsciente, y sin respiración o sin respiración normal 2. Abra la tapa. Escuchará: Encendido. Está tranquilo y siga las instrucciones. 3. Mueva el interruptor de modo adulto/pediatría a la izquierda o a la derecha: • Adultos: mayores de 8 años o más de 25 kg de peso • Niños: menores de 8 años o menos de 25 kg de peso 4. Descubra el tórax del paciente: • Compruebe que la piel está limpia y seca. • Seque el torso del paciente y rasure el exceso de vello si es necesario. 5. Aplique los electrodos al paciente como se indica en su envase. • Colocación del parche azul (ápex): coloque el parche azul como el área azul (debajo del pezón izquierdo, en la línea axilar anterior izquierda) que se muestra en la imagen. • Colocación del parche rojo (esternón): coloque el parche rojo como el área roja (debajo de la clavícula, al lado del esternón) que se muestra en la imagen. 6. No toque al paciente, espere a que se realice el análisis del ritmo cardíaco 7. Administrar energía (si se recomienda) de lo contrario hacer RCP				Para limpiar el equipo, siga estas normas: 1. Apague el equipo, desconecte los cables y quite la batería. 2. Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedecido con limpiacristales. 3. Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave, limpio y humedecido con limpiacristales. Los agentes de limpieza recomendados son: Agua ■ Lejía hipoclorito sódico (10%, hipoclorito sódico) ■ Peróxido de hidrógeno (3%) ■ etanol (75%) ■ Alcohol isopropílico (70%) 4. Retire toda la solución limpiadora con un paño seco después de la limpieza, si es necesario. 5. Seque el equipo en un lugar fresco y ventilado		
				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		
				Indicador de estado • Verde: el equipo está encendido y puede funcionar correctamente. • Verde con parpadeo: el equipo se encuentra en el estado de espera y está listo para su uso en cualquier momento. • Rojo con parpadeo: se ha detectado un error en la autocomprobación del equipo. • Apagado: la batería no está instalada o no está funcionando correctamente		
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
				Modo de desfibrilación: desfibrilación externa semiautomática Onda de desfibrilación: Onda bifásica truncada exponencial (BTE), compensación automática de acuerdo con la impedancia del paciente Electrodos de desfibrilación: Electrodos multifunción o parches Rango de energía seleccionado: Para adultos: 100 J, 150 J, 170 J, 200 J, 300 J, 360 J. Para niños: 10 J, 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						