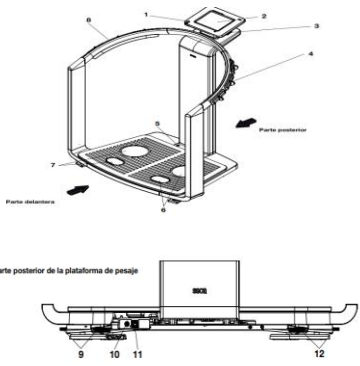
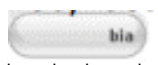
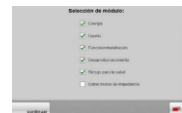
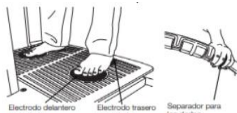


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 2	MES: 09	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	Analizador médico de la composición corporal	Modelo:	514		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	Seca		Clasificación del equipo:		Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		
 Sirve para registrar mediciones de peso, de longitud y de impedancia bioeléctrica, así como para el cálculo automático de parámetros que pueden derivarse de ello, p. ej. la masa magra (FFM). Los resultados se muestran de forma gráfica en la pantalla y ayudan al médico responsable del tratamiento a realizar diagnósticos.				1. Inspeccionar partes y accesorios en busca de averías o señales de golpes. 2. Conecte el equipo a una toma de corriente de red que sea fácilmente accesible y se pueda realizar rápidamente una desconexión de la red de corriente. 3. Posicione el equipo en una superficie plana y firme.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO		
1. Dimensiones (AxAxP): 976 x 1,251 x 828 mm 2. Capacidad: 300 kg 3. División: 50 g < 150 kg > 100 g 4. Peso: 36 kg 5. Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 8.4", giratoria en 360° 6. Alimentación de corriente: Fuente de alimentación 7. Tensión de red: 100 V – 240 V 8. Frecuencia de red: 50 Hz – 60 Hz 9. Registro de insumos para la salud: Clase I 10. Interfaces: Pantalla táctil USB 2.0, plataforma de báscula Ethernet (10/100 Base-T) 11. Impresora compatible: seca 360°, impresora inalámbrica láser e impresora de inyección mediante el software para PC seca analytics 115		1. Tecla CON/DES 2. Visor táctil 3. Interfaz USB 4. Pares de electrodos para las manos, derecha 5. Fiolá 6. Pareja de electrodos para los pies, derecha 7. Pareja de electrodos para los pies, izquierda 8. Pareja de electrodos para las manos, izquierda 9. Tornillos niveladores, derecha 10. Conexión de la fuente de alimentación 11. Interfaz Ethernet 12. Tornillos niveladores, izquierda		1. Al conectar el equipo a la corriente, este se encenderá automáticamente. Recuerde cerciorarse que no haya ningún peso sobre la plataforma. 2. Si la pantalla se ve apagada oprima el botón de encendido para activarla. Verifique también el nivel del equipo estableciendo que la burbuja de aire ubicada en plataforma este dentro del centro del círculo. El equipo estará listo para el uso. 3. Para iniciar una medición, pida al paciente que suba a la plataforma y ubique los pies en los indicadores visuales y recomíendele que se mantenga quieto para una correcta medición.  4. Espere hasta que la indicación del peso y el valor Hold ya no parpadeen. Posteriormente, Lea el resultado de la medición.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA: 01 DE 01	
		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 2	MES: 09	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	Analizador médico de la composición corporal	Modelo:	514	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	Seca	Clasificación del equipo:		Diagnóstico	
INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO (BIOIMPEDANCIA)		POSICIÓN DEL PACIENTE		RECOMENDACIONES	
1.Introducir manualmente la estatura pulsando en el campo estatura e introduciendo dicho valor tomado con anterioridad (peso) con tecla:  2.El equipo con los anteriores datos tomados realizara de forma automática el cálculo IMC visualizado en la pantalla.  3.Para Continuar con la medición de bioimpedancia, debe presionar la pestaña ubicada en la pantalla.  Posteriormente debe seleccionar dado el caso los datos brutos de impedancia Energía y Riesgos para la salud en la ventana de Dialogo Selección de Modulo.  4.Pulse la tecla continuar e indique afirmando en el siguiente ventana de dialogo Indicación de Seguridad el paciente no pertenece al grupo de personas a las cuales no se les puede realizar medición.		Las manos del paciente deben estar ubicadas en los electrodos en cada lado, haciendo uso del separador para los dedos. De igual forma pida al paciente la correcta ubicación de los pies en los electrodos de la plataforma.  Visualice posteriormente que se presente el contacto correcto con los electrodos para manos en pies en la imagen presentada en la pantalla.  Si los contactos son los adecuados se presentara un indicador verde en cada miembro. Posteriormente a ello se mostrara la siguiente imagen del proceso restante de la medición.  En cuanto finalice la medición aparecerá un mensaje de Medición finalizada. Pulse posterior a ello tecla continuar.		-Cerciórese de que el aparato está colocado en una superficie estable y plana. -Cerciórese de que la plataforma de pesaje está seca antes de que suba el paciente. -Mantenga los aparatos de AF, como los teléfonos móviles, a una distancia mínima de aprox. 1 metro para evitar mediciones erróneas, interferencias en la transmisión inalámbrica. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN -Desenchufe la clavija de alimentación a corriente antes de cualquier preparación higiénica. -La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. ALARMAS Y POSIBLES ERRORES •El aparato no se puede encender: Comprobar si el suministro de corriente está establecido. •El visor táctil permanece oscuro (aparato en Standby): Tocar el visor táctil, pulsar la tecla CON/DES, Cargar el aparato. •El visor táctil no reacciona: El aparato se encuentra en estado indefinido después de realizar entradas no plausibles: Apagar el aparato (mantener pulsada la tecla CON/DES unos 3 segundos), Volver a encender el aparato. •Aparece el aviso STOP: Carga máxima sobrepasada, retirar el peso del aparato •Aparece el aviso: «El reconocimiento de los electrodos ha fallado.»: Piel del paciente demasiado seca: Humedecer la piel en los puntos de contacto con un poco de aerosol para electrodos.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					