

Configuración de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere

1. Coloque de forma segura la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere o móntelo en un soporte compatible.
2. Abra la puerta de la batería en el panel inferior derecho de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere y coloque la batería.
3. Conecte el cable de alimentación al panel trasero del monitor y enchúfelo a un tomacorriente de grado hospitalario. Nota: después de colocar la batería por primera vez, la batería debe estar completamente cargada y acondicionada. Consulte el manual del operador para obtener información adicional.
4. Inserte el módulo o cable de tecnología hemodinámica que desee. Consulte las instrucciones del módulo o cable para conocer los procedimientos adecuados de inserción/conexión.
5. Presione el botón de encendido en la parte frontal del monitor. Nota: en la puesta en marcha inicial, se puede seleccionar el idioma de la pantalla, lo que afecta el formato de hora/fecha y unidades de medida.


Siga las instrucciones contenidas en el manual del operador de la plataforma de monitoreo avanzado HemoSphere para conseguir el módulo de tecnología hemodinámica deseado o monitoreo de cables.



Edwards

Parte trasera del monitor

1. Conexión del cable de alimentación principal
2. Puerto HDMI
3. Puerto Ethernet
4. Puerto USB
5. Conector del puerto serie COM1 (RS-232)
6. Entrada analógica 1
7. Entrada analógica 2
8. Entrada ECG
9. Salida de presión
10. Perno de terminal equipotencial

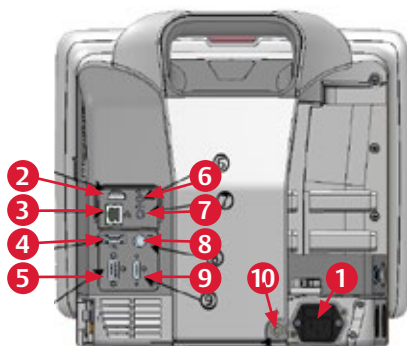


Panel derecho del monitor

1. Puerto USB
2. Puerta de la batería



Panel izquierdo del monitor

1. Ranura del módulo de expansión L-Tech
2. Ranuras para módulos de expansión (2)
3. Puertos de cable inteligente (2)

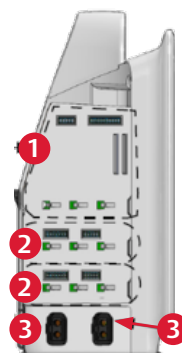

Funciones de la pantalla de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere

Barra de navegación



Globos de parámetros

Barra de información

Barra de estado

Ventana principal

Sensor FloTrac

Guía de preparación

Funciones de la pantalla de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere

Zero y Waveform		Zero sensor FloTrac
Seguimiento de PGDT		Indicador de tiempo en el objetivo
Selección de pantalla		Elija entre ocho pantallas de apoyo clínico visual, la pantalla seleccionada aparecerá en la ventana principal
Acciones clínicas		- Calibración de oximetría - Revisión de eventos - Calculadora de valor derivado
Configuraciones		- Datos del paciente - Configuración del monitor - Configuración avanzada - Ayuda
Instantánea		Captura una imagen de la pantalla en el momento actual
Silenciar alarma audible		Este icono silencia todas las alarmas durante dos minutos

Pantalla de puesta a cero



Para poner en cero con la llave de paso cerrada al paciente y abrir para airear:

1. Mantenga presionado el botón cero en el cable de presión para levantar la pantalla cero
2. Mantenga presionado el botón cero hasta que se escuche un tono para completar la puesta a cero

O la puesta a cero se puede completar seleccionando el botón "Quick Zero" para abrir la pantalla de cero, luego seleccione "cero".

Barra de información de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere



Estado de Wi-Fi

Estado de HIS

Tiempo

Fecha

Batería

Modo de monitoreo

Promedio de tiempo

Pantalla de bloqueo

Configuración del Sensor FloTrac

1. Abra el empaque del sensor FloTrac e inspeccione su contenido. Reemplace todas las tapas con tapas sin ventilación y asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
2. Monte el sensor FloTrac en un portasueros usando el soporte apropiado.
3. Para quitar el aire y cebar la bolsa intravenosa y el sistema FloTrac: Inserte la bolsa intravenosa en la bolsa de presión y cuélguela en el portasueros (no inflar).
4. Con solo gravedad (sin presión en la bolsa de presión), enjuague el sensor FloTrac sosteniendo el tubo de presión en posición vertical mientras la columna de fluido sube a través del tubo, empujando el aire fuera del tubo de presión hasta que el líquido llega al final del tubo.
5. Presurice la bolsa de presión hasta que alcance los 300 mmHg.
6. Enjuague rápidamente el sensor FloTrac y golpee el tubo y las llaves de paso para eliminar las burbujas residuales.
7. Conecte el tubo al catéter arterial, luego aspire y lave el sistema para asegurarse de que no queden burbujas residuales.
8. Nivele el sensor FloTrac al eje flebostático.
Nota: Es importante mantener el nivel del sensor FloTrac en el eje flebostático en todo momento para garantizar la precisión del gasto cardíaco.



Sensor Acumen IQ

Guía de preparación

Funciones de la pantalla de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere

Zero y Waveform		Zero sensor Acumen IQ
Seguimiento de PGDT		Indicador de tiempo en el objetivo
Selección de pantalla		Elija entre ocho pantallas de apoyo clínico visual, la pantalla seleccionada aparecerá en la ventana principal
Acciones clínicas		• Calibración de oximetría • Revisión de eventos • Calculadora de valor derivado • Zero sensor Acumen IQ • Ingrese PVC
Configuraciones		• Datos del paciente • Configuración del monitor • Configuración avanzada • Ayuda • Exportar datos • Modo demostración • Ingeniería
Instantánea		Captura una imagen de la pantalla en el momento actual
Silenciar alarma audible		Este icono silencia todas las alarmas durante dos minutos

Globos de parámetros



1. Para cambiar un parámetro mostrado, toque fuera del globo que desea cambiar.
2. El parámetro seleccionado aparece resaltado. Se describen los otros parámetros que se muestran. Los parámetros disponibles no aparecen resaltados.
3. Toque el parámetro de reemplazo para actualizar.

Barra de información de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere



Configuración del Sensor Acumen IQ

1. Abra el empaque del sensor Acumen IQ e inspeccione su contenido. Reemplace toda las tapas con tapas sin ventilación y asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas.
2. Monte el sensor Acumen IQ en un portasueros usando el soporte apropiado.
3. Para quitar el aire y cebar la bolsa intravenosa y el sistema Acumen IQ: Inserte la bolsa intravenosa en la bolsa de presión y cuélguela en el portasueros (no inflar).
4. Con solo gravedad (sin presión en la bolsa de presión), enjuague el sensor Acumen IQ sosteniendo el tubo de presión en posición vertical mientras la columna de fluido sube a través del tubo, empujando el aire fuera del tubo de presión hasta que el líquido llega al final del tubo.
5. Presurice la bolsa de presión hasta que alcance los 300 mmHg.
6. Enjuague rápidamente el sensor Acumen IQ y golpee el tubo y las llaves de paso para eliminar las burbujas residuales.
7. Conecte el tubo al catéter arterial, luego aspire y lave el sistema para asegurarse de que no queden burbujas residuales.
8. Nivele el sensor Acumen IQ al eje flebotático.
Nota: Es importante mantener el nivel del sensor Acumen IQ en el eje flebotático en todo momento para garantizar la precisión del gasto cardíaco.



Catéteres de arteria pulmonar Swan-Ganz

Guía de preparación

Funciones de la pantalla de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere

Iniciar/detener el monitoreo		 Iniciar el monitoreo de GC  Detener el monitoreo de GC
Selección de pantalla de monitor		Elija entre seis pantallas de apoyo clínico visual, la pantalla seleccionada aparecerá en la ventana principal
Acciones clínicas		• Calibración de oximetría • Prueba del cable GCC del paciente • Revisión de eventos • iCO • Calculadora de valor derivado
Configuraciones		• Datos del paciente • Configuración del monitor • Configuración avanzada • Ayuda • Exportar datos • Modo de demostración • Ingeniería
Instantánea		Captura una imagen de la pantalla en el momento actual
Silenciar alarma audible		Este ícono silencia todas las alarmas durante dos minutos

Globos de parámetros




1. Para cambiar un parámetro mostrado, toque fuera del globo que desea cambiar.
2. El parámetro seleccionado aparece resaltado. Se describen los otros parámetros que se muestran. Los parámetros disponibles no aparecen resaltados.
3. Toque el parámetro de reemplazo para actualizar.

Barra de información de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere



Configuración del módulo HemoSphere Swan-Ganz

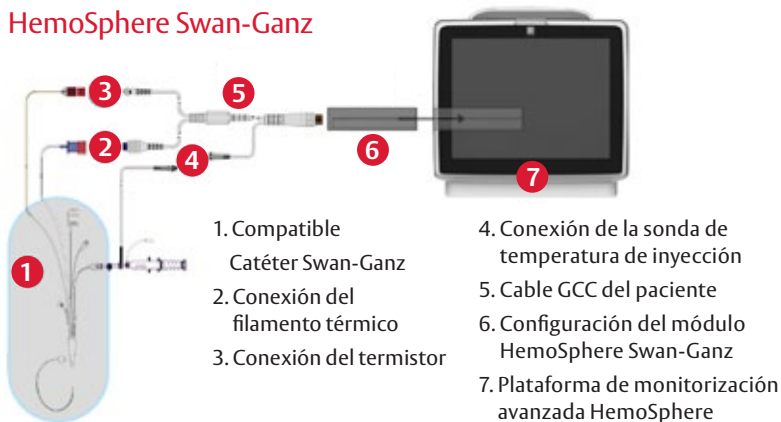

Configuración del módulo HemoSphere Swan-Ganz

1. Inserte el módulo HemoSphere Swan-Ganz en un módulo estándar ranura en el panel izquierdo de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere. El módulo encajará en su lugar cuando esté correctamente acoplado.
2. Encienda el interruptor de encendido del monitor y siga los pasos para ingresar los datos del paciente.
3. Enchufe el cable GCC del paciente en el módulo utilizando las flechas de la guía de conexión para una orientación adecuada. Para la prueba del cable GCC, consulte el manual de operaciones.
4. Conecte el catéter Swan-Ganz compatible al cable GCC del paciente.
5. Consulte el manual del operador de la plataforma de monitorización avanzada HemoSphere para conocer las pautas de conexión del catéter y los procedimientos de monitoreo.

Producto Médico de uso exclusivo profesional y de venta exclusiva a Instituciones Sanitarias y Profesionales de la Salud.

Colombia: Sistema FloTrac, INVIMA 2017DM-0017125; Catéter Swan-Ganz, INVIMA 2019DM-0002660-R1; Sensor Acumen IQ, INVIMA 2019DM-0020202; HemoSphere INVIMA 2018EB-0018307 | México: Autorizado por COFEPRIS, Sistema FloTrac, 1952E2014SSA; Catéter Swan-Ganz, 1038C2013 SSA; HemoSphere, 2247E2017 SSA; Sensor Acumen IQ, 0244E2020SSA | Ecuador: FloTrac, DM-1991-04-11; Swan-Ganz, 7629-DME-1119; HemoSphere, 7168-DME-0619 | Perú: FloTrac, DM20793E; Swan-Ganz, DM13798E; HemoSphere, DB5116E; Acumen IQ, DM18151E | Costa Rica: Sistema FloTrac, 1005-EMB-5552; Swan-Ganz, 1005-EMB-6240; Sensor Acumen IQ, EMB-US-19-04160; HemoSphere, EMB-US-18-01091 | Argentina: Sistema FloTrac, PM 340-154; Swan-Ganz, PM-340-1; Sensor Acumen IQ, PM 340-154; HemoSphere, PM 340-154 | Guatemala: Sistema FloTrac, PMQ-2277; Sensor Acumen IQ, PMQ-14048 | Bolivia: Sistema FloTrac, DI-51771/2014; Swan-Ganz, DI-51771/2014 | Nicaragua: Sistema FloTrac, I105-270515-1824 | Panamá: Sistema FloTrac, C.S.S. MQ-0366-05-18 | Uruguay: Sistema FloTrac 75684, Swan-Ganz 75686 | 75687 | 75688.

El producto HemoSphere no está disponible para su venta y distribución en Bolivia y Uruguay.

Léase las instrucciones de uso para obtener instrucciones completas de prescripción incluyendo indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y eventos adversos.

Edwards, Edwards Lifesciences y el logotipo de la E estilizada, Acumen IQ, FloTrac, HemoSphere y Swan-Ganz son marcas comerciales de Edwards Lifesciences Corporation o de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2021 Edwards Lifesciences Corporation. Todos los derechos reservados. LA083/092021/CC

Edwards Lifesciences • edwards.com

Carrera 7 No 114 - 33 Oficina 505 - Bogotá - Colombia - PBX: (57) 1 7456572

Av. Insurgentes Sur 1431, 15vo Piso Int. 02 Col. Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03920 - México - PBX: (52) 55 5292-7923

