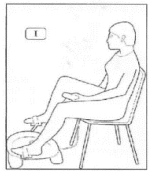
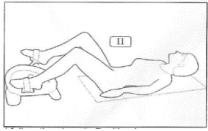
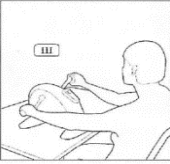


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 18 MES 09 AÑO 2024			
Nombre del equipo: Ergometro	Modelo: MiniBike	Riesgo del equipo: I				
Marca: MoviFit		Clasificación del equipo: REHABILITACIÓN				
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 Consola removible para facil manejo del usuario, con indicadores de velocidad, tiempo, distancia y calorías. permite ejercitar los brazos y las piernas en un solo equipo. Diseñada especial mente para rehabilitación y personas de la tercera edad; permite que lo utilicen		 1. Pantalla digital 2. Teclade encender 3. Tecla para tiempo seleccionado de 1-15min 4. Tecla para disminuir velocidad (12 velocidades) 5. Tecla para aumentar velocidad (12 velocidades) 6. Tecla de dirección de pedal, cambio de marcha (Adelante y atras) 7. Tecla de selección de modo para visualización de parametros: Velocidad, tiempo, distancia, calorías.		Posición 1: Paciente sentado, para uso con extremidades inferiores.  Posicion 2: Paciente acostado, para uso con extremidades inferiores.  Posicion 3: Paciente sentado, para uso con extremidades superiores. 		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Ejercicio pasivo asistido por motor (Bidireccional): Correas de seguridad en los pedales. 2. Diseñado para el máximo rendimiento y portabilidad: Se puede utilizar con las manos o los pies. 3. Velocidades: 12 4. Peso máximo de usuario: 125kg		 1. Control 2. Pedales 3. Correas de seguridad 4. Interruptor 5. Base		RECOMENDACIONES No usar en pacientes con: 1. Convalecencia despues de una cirugia reciente. 2. Historia con problemas cardiacos ó de cadera. 3. Pacientes con cancer. 4. Trombosis. 5. Fracturas 6. Ataques epilécticos		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se ealiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.						
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Conecte el equipo al toma corriente. 2. presione el boton de encendido/apagado 3. Presione el boton de Velocidad para ajustarla. 4. ajuste la dirección de los pedales con el boton de "avanzar/retroceder".						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						