


GUÍA RÁPIDA DE USO Y MANEJO



MONITOR DE SIGNOS VITALES BSM-3000 SERIES – NIHON KOHDEN

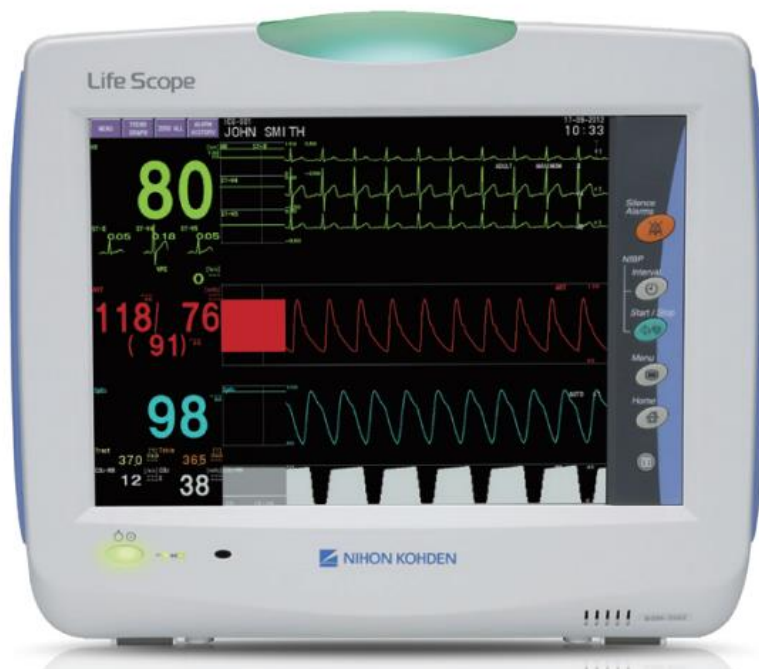

Los monitores de la serie BSM-3000 son monitores de signos vitales para un solo paciente; neonatal, pediátrico o adulto. Cuentan con pantalla táctil y a color con despliegue de graficas de hasta 14 o 15 a la vez.

Los parámetros fisiológicos que pueden monitorizarse son: ECG, Frecuencia respiratoria, SPO2, PANI, Temperatura y CO2, a la vez que cuenta con alarmas para cada una. Se puede disponer de más parámetros utilizando los conectores múltiples.

Este monitor debe utilizarlo personal médico cualificado con un conocimiento absoluto de su funcionamiento.

A continuación, se describe las principales diferencias entre los monitores de la serie BSM-3000:

	 BSM-3500	 BSM-3700
Display Size	12-inch	15-inch
Waveforms	14	15
Multi Connectors	2	3
Parameters	ECG (3/6/10 lead), Resp, SpO₂, NIBP, Temp, CO₂, IBP, CO, EEG, BIS, Gas, FLOW/Paw	
Data Storage	24 hours (72 hours with optional QM-601P memory card)	
Network	LAN and transmitter interface are standard	
Battery Operation	1.5 hours	1 hour
Interbed	16 beds	
Multi Link Interface (QI-372P option)	2 parameters	


Existen 6 modelos distintos dentro de esta familia de monitores, con tecnologías para adquisición de SPO2 diferentes:

MODELO	TECNOLOGÍA DE SPO2
BSM-3562	NK (blue-pro)
BSM-3532	Masimo
BSM-3552	Nellcor
BSM-3763	NK (blue-pro)
BSM-3733	Masimo
BSM-3753	Nellcor




Descripción del equipo


Panel frontal:

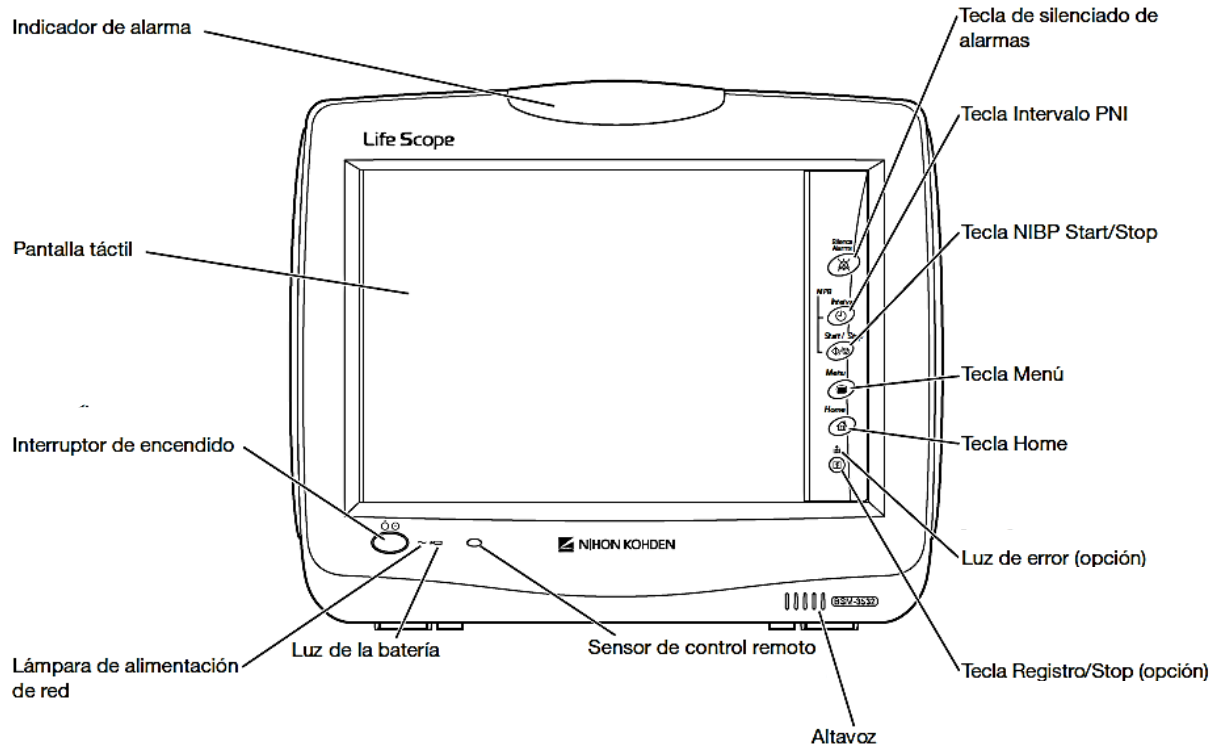


Panel izquierdo:

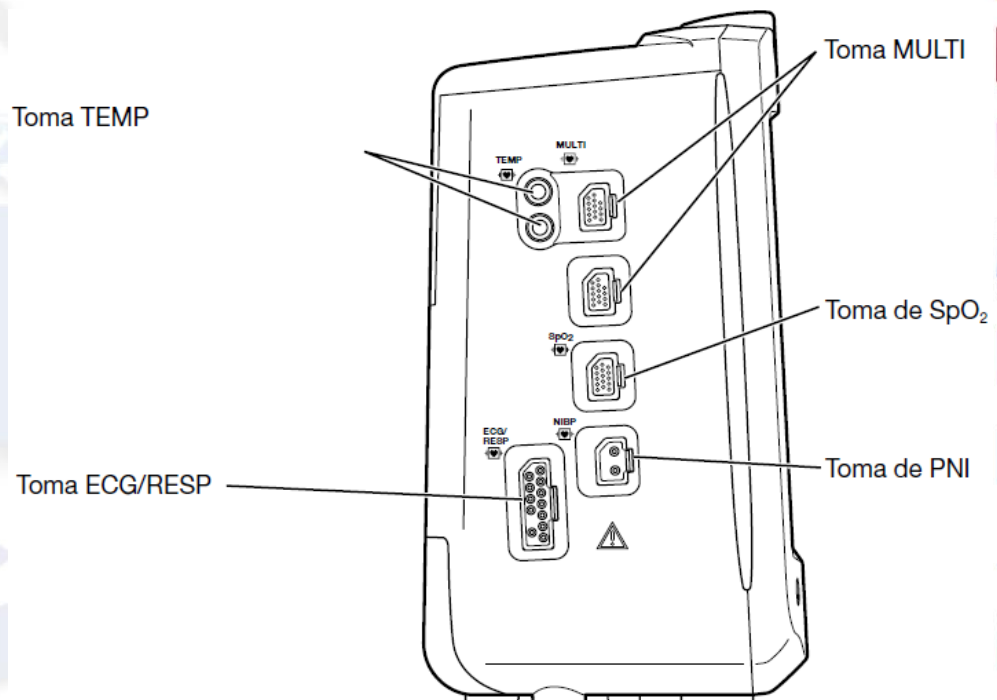

Panel derecho:

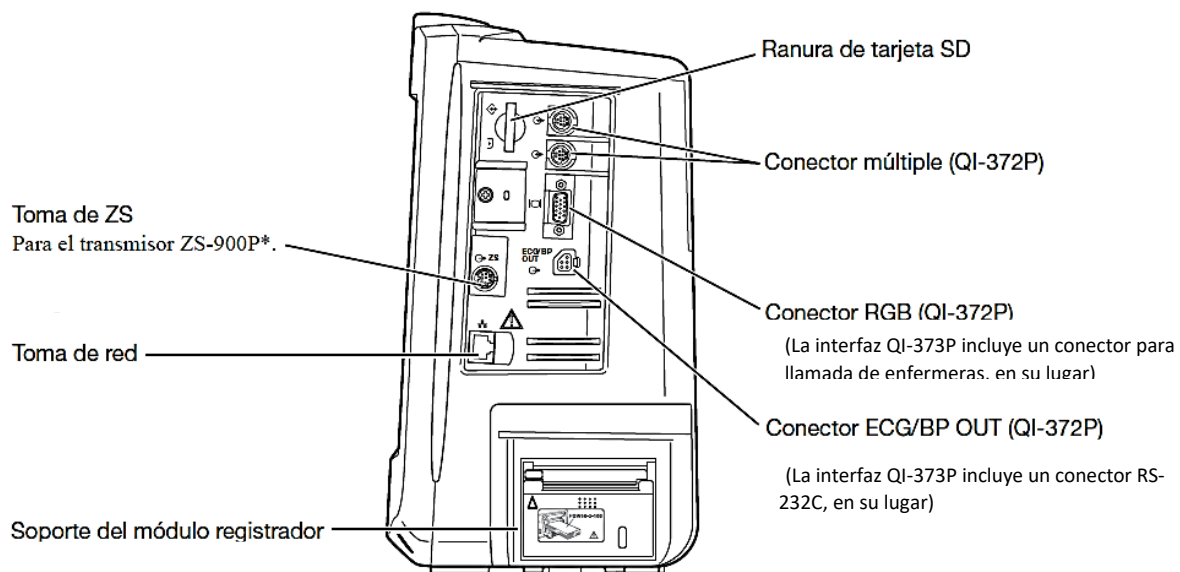

Panel trasero:

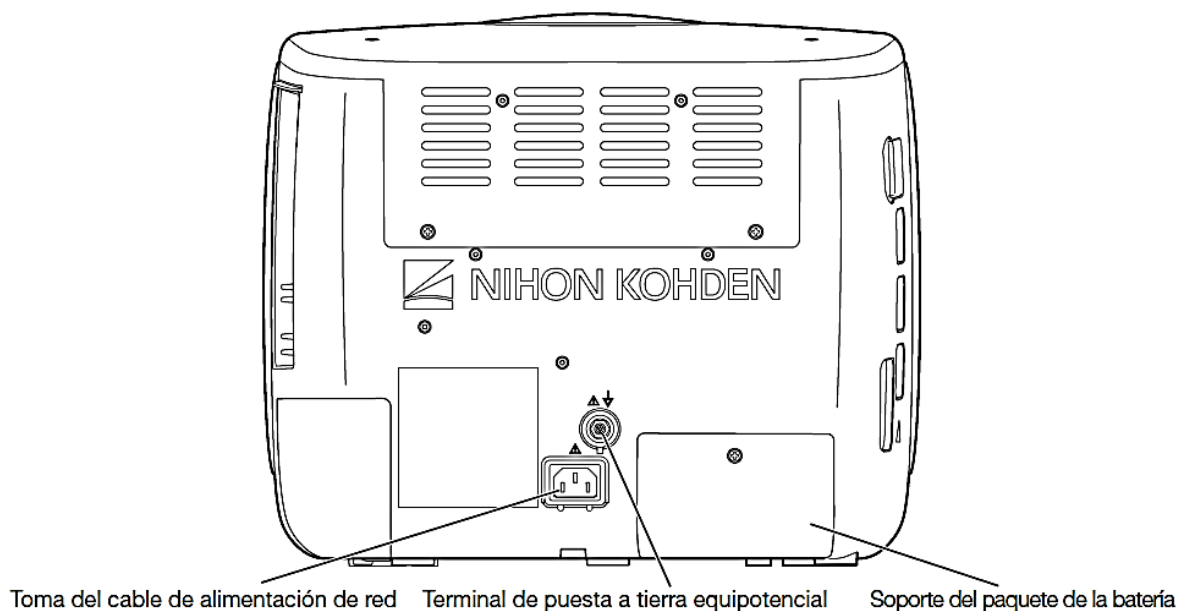

Operación


Indicaciones previo al uso con paciente:

Antes de comenzar a utilizar el equipo, asegúrese de que esté conectado al sistema de tierra equipotencial. Si existen otros equipos conectados al paciente, se podría generar una corriente eléctrica que puede ocasionar daño al paciente.

- Utilice únicamente el cable de alimentación.
- No instale el monitor y las unidades opcionales sobre el paciente.
- Utilice únicamente el soporte, carro o equipo especificado para instalar el monitor y los instrumentos.
- Antes de conectar o desconectar instrumentos, asegúrese de que todos ellos estén apagados.
- Asegúrese de que haya más de 5 cm de separación entre el monitor y la pared para que la ventilación sea adecuada.
- Hay electrodos y derivaciones de electrodos suficientes listos.
- Los sensores y los transductores limpios y esterilizados están listos.
- Hay suficiente papel de registro en el registrador (cuando se utiliza un registrador opcional).
- Hay instalada una batería totalmente cargada en el monitor para el supuesto de que se produzca un fallo de alimentación de manera repentina.

El monitor puede operar con batería o conectado al tomacorriente. Dependiendo del modelo de monitor, este puede durar con batería 60 min (BSM-3700) o 90 minutos (BSM-3500) aproximadamente.

Encendido y apagado del equipo:

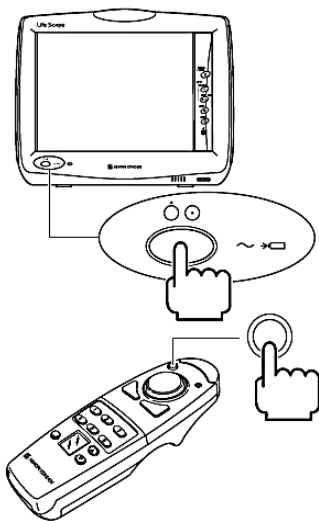

Pulse el conmutador (Power) del panel frontal o del control remoto para encender la alimentación. El indicador de alimentación y el de alimentación de CA se encienden y empieza la comprobación automática. Cuando la comprobación finaliza, aparece la pantalla principal.

Cuando se enciende el monitor, compruebe que se emite un único sonido y que las luces roja, amarilla, azul y verde del indicador de alarma parpadean una vez. De esta manera, se indica que la alarma funciona correctamente. El monitor no mostrará ninguna señal ni alarma hasta que se conecten al paciente los distintos sensores. Una vez hecho esto, comenzará la monitorización de alarmas.

Pulse el conmutador (Power) del monitor o del control remoto durante más de tres segundos para apagar el monitor. La pantalla se pone oscura y el indicador de alimentación del panel frontal se apaga.



Carga de la batería:


La batería se carga directamente en el monitor. Un paquete necesita aproximadamente 10 horas para cargarse con el proceso de monitorización activo y 2 horas cuando no se encuentra activo.

Cuando cargue la batería, mantenga la temperatura ambiente a unos 20 °C para preservar la duración óptima de su funcionamiento.

Después de la carga continua, el monitor cambia automáticamente a modo de carga lenta para mantener la batería completamente cargada. La carga lenta es necesaria porque la batería se descarga, aunque no se use.

Pantalla principal:

La pantalla principal muestra los valores numéricos y las formas de onda de los parámetros de monitorización, los gráficos de tendencia actual, mensajes diversos y las teclas de operación. Hay disponibles distintas disposiciones de pantalla cambiando la configuración en la ventana CONFIG. SISTEMA.

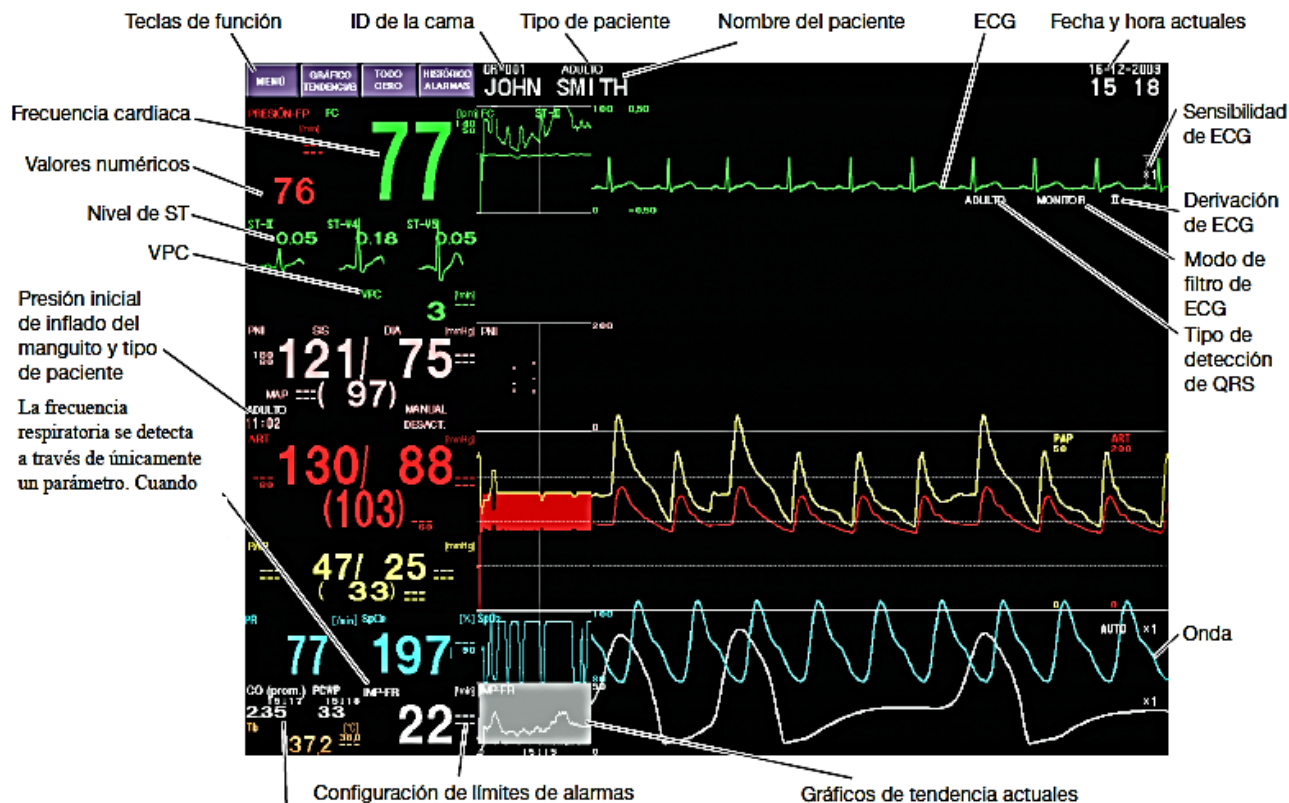


- Para cerrar la ventana abierta y volver a la pantalla principal, pulse la tecla [Home].
- Puede congelar (dejar de realizar barridos) las formas de onda en la pantalla principal con solo tocar la tecla de función CONGELAR de la esquina superior izquierda de la pantalla o en el control remoto.
- Los últimos 30 minutos de datos del parámetro se pueden visualizar como gráfico de tendencia en la pantalla principal. Este gráfico de tendencia se puede arrastrar a la izquierda o a la derecha tocando en la pantalla en el borde derecho del gráfico.
- Para evitar que el monitor moleste al paciente durante las horas de sueño o en otro momento, utilice el MODO DORMIR. En el modo Dormir, la pantalla se oscurece y se desactiva el sonido de sincronización. Para activar el modo Dormir, toque la tecla DORMIR de la ventana MENÚ.

Acceso a la Ventana “configuración de sistema”

Silence
Alarms



Estando el equipo apagado, presione el botón de encendido mientras mantiene presionada la tecla “silenciar alarmas” ubicada en el panel frontal, hasta que la pantalla de “diagnostics check” aparezca.

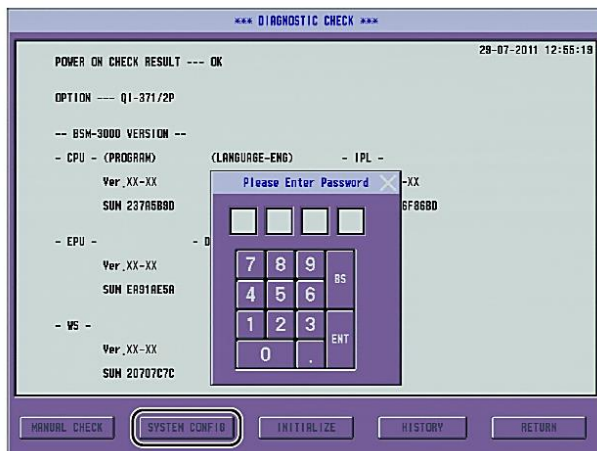


Una vez que aparezca esta ventana, coloque la contraseña, por default es “1 2 3 4”, y puede cambiarse en caso de que así lo desee. Ingrese a la tecla de “system config” para que pueda realizar las configuraciones de usuario correspondientes.

Ingreso a la ventana “Menú”

Pulse la tecla [Menú] del monitor de cabecera para mostrar la ventana MENÚ. Se puede visualizar cualquier ventana desde la ventana MENÚ, excepto la pantalla CONFIG. SISTEMA y la principal.

En esta pantalla podrás hacer la mayoría de las configuraciones de la interfaz de usuario, como configuración de parámetros, alarmas, volumen del sonido, fecha y hora, así como ajustes de la impresora.



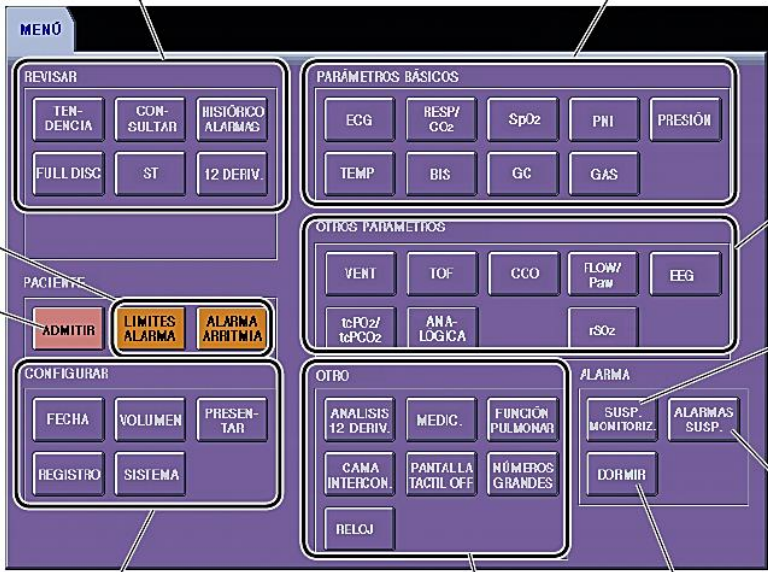

Abre la ventana de revisión.

Abre la ventana de parámetros básicos para modificar la configuración de los parámetros relacionados.

Abre la ventana de parámetros para modificar la configuración de los parámetros relacionados.

Suspende todas las alarmas de forma indefinida en modo UCI/NICU en modo quirófano.

Suspende todas las alarmas durante el tiempo especificado (1, 2 o 3 minutos).

Activa el modo de dormir (solo en modos UCI y NICU).


Abre la ventana de análisis/ cálculo, muestra la ventana CAMA INTERCON., activa/desactiva las funciones del teclado táctil y muestra

Abre la ventana para modificar fecha y hora, volumen del sonido de la alarma/sincronización, brillo de la pantalla, curvas, registro y asignación de funciones las teclas del control remoto y la


Cambia la configuración de la alarma.

Introduce información del paciente y borra datos.


Carga del papel de registro

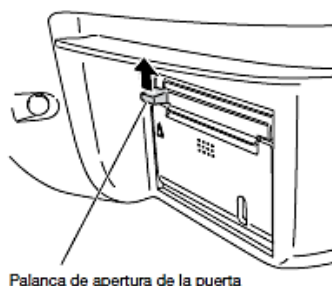

1. Mueva la palanca de apertura de la puerta en dirección de la flecha (→) para liberar el seguro.

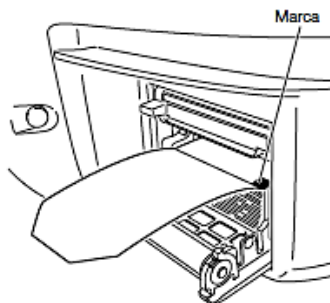

2. Abra la puerta del registrador

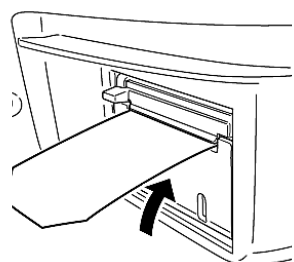

3. Coloque el papel dentro del registrador, de modo que la marca de detección (pequeño cuadrado negro de la esquina) del papel quede en el lado derecho.

4. Saque una hoja de papel hacia usted y cierre la puerta del registrador. Si el indicador que advierte de que se ha quedado sin papel sigue encendido, significa que la puerta del registrador no se ha cerrado correctamente.



Limpieza y desinfección

Antes de proceder con la limpieza o la desinfección, apague la unidad y desconecte el cable de alimentación del conector de CA.

Una vez finalizada la limpieza, deje que se seque completamente antes de conectar el cable de alimentación y encender el monitor.

No permita que se introduzca agua en el interior del monitor.

Limpieza

Limpie la superficie del monitor una vez al mes con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol isopropílico (de 76,9 a 81,4 % por vol.) y, a continuación, séquela con un paño seco.

Quite el polvo del altavoz y de los orificios de ventilación de los paneles con un trozo de algodón.

Desinfección

Para desinfectar la superficie exterior del monitor, límpiela con un paño humedecido con cualquiera de los desinfectantes que se indican a continuación:

- Solución de gluconato de clorhexidina -----0,5%
- Solución de clorhidrato de bencetonio -----0,2%
- Solución de glutaraldehído ----- 2,0%
- Cloruro de benzalconio -----0,2%
- Hidrocloruro de alquilodiaminoetilglicina -----0,5%

Limpieza de la pantalla táctil

Antes de limpiar la pantalla táctil, desactive el teclado táctil.

Limpie la pantalla táctil utilizando un paño suave humedecido con detergente neutro o alcohol isopropílico.

Información adicional:

Para más información, puede solicitar y consultar los siguientes documentos:

- Manual de usuario
- Guía del administrador
- Guía de usuario

