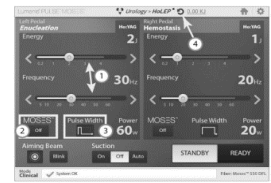
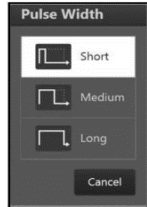


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012															
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01													
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 20	MES: 08	AÑO: 2024												
Nombre del equipo:	Sistema de laser holmios	Modelo:	Pulse 120H		Riesgo del equipo:	IIB												
Marca:	Lumenis			Clasificación del equipo:	Tratamiento													
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		INDICADORES DE SEGURIDAD														
 El sistema de láser de holmio Lumenis Pulse 120H brinda aplicaciones en urología, ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología, ginecología y cirugía en general. La aplicación de fibra de energía láser de holmio es ideal para cirugías mínimamente invasivas.				1.El LED redondo de la parte frontal muestra el estado de actividad de la consola láser Lumenis Pulse 120H. 2.Durante el señalamiento láserico se emite una señal sonora. Se oye un sonido diferente para el pedal derecho y el izquierdo. 3.Si el sistema está en el modo READY (Listo) y no hay ninguna fibra conectada a este, se emitirá un tono de advertencia o un mensaje de voz. 4.Cuando el láser esté en funcionamiento, el indicador de emisión láser se mostrará en la pantalla.														
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Haz de tratamiento -Medio/Fuente de energía del láser: Barra de cristal de holmio:YAG -Longitud de onda: 2,1 µm -Modo láser: Pulsado -Potencia máxima promedio: 120 vatios -Energía del pulso: 0,2-6 J (Japón: 0,2-3,5 J) -Frecuencia de pulsos: 5-80 Hz -Duración máxima del pulso: 1300 µs -Clasificación láser US FDA CDRH: Clase IV -Clasificación láser europea EN 60825: Clase 4 Haz de guía -Tipo: DPSS -Alimentación: Máximo de 5 mW, onda continua -Configuraciones: Baja, media y alta -Longitud de onda: 532 nm -Clasificación láser: Clase IIIa / Clase 3R -Color: Verde Especificaciones eléctricas del sistema -Operación: Continua -Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I -Grado de protección contra descargas eléctricas para las piezas aplicadas: BF -Protección contra la entrada de agua: Sistema IP20 -Protección contra la entrada de agua: Interruptor de pedal		1.Consola láser: Abarca la pantalla de control. 2.Pantalla de control giratoria:Monitor LCD que le permite seleccionar las configuraciones del tratamiento desde afuera de la zona estéril. 3.Interruptor de dos pedales: Activa el haz de tratamiento del láser al presionarla, ofrece la posibilidad de seleccionar un tratamiento entre dos conjuntos de parámetros usando el interruptor de pedal izquierdo o derecho, y tiene incorporado un botón STANDBY/READY (En espera/Listo) que se activa con el pie. 4.Bomba de succión integrada: Junto con el control de succión determinan la tasa de flujo de succión. También, puede usarse en combinación con el láser. 5.Brazo de soporte de fibra: se puede usar para direccionar la fibra y el tubo de succión de forma ordenada u controlada.		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Color</th> <th>Iluminación</th> <th>Estado de actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azul</td> <td>Estable</td> <td>Encendido/Standby (En espera)</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>Estable</td> <td>Modo READY (Listo)</td> </tr> <tr> <td>Naranja</td> <td>Parpadeo</td> <td>Láser</td> </tr> </tbody> </table>			Color	Iluminación	Estado de actividad	Azul	Estable	Encendido/Standby (En espera)	Naranja	Estable	Modo READY (Listo)	Naranja	Parpadeo	Láser
Color	Iluminación	Estado de actividad																
Azul	Estable	Encendido/Standby (En espera)																
Naranja	Estable	Modo READY (Listo)																
Naranja	Parpadeo	Láser																
				CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE PEDAL Inserte el conector del interruptor de pedal dentro del receptáculo del interruptor de pedal en la parte trasera de la consola láser Lumenis Pulse 120H. Alinee el punto rojo del conector del pedal con el punto rojo del receptáculo, luego presione hacia adentro. 														
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																		
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																		
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																		
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																		
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																		
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																		
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																		
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																		

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
			VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 20 MES 08 AÑO 2024	
Nombre del equipo:	Sistema de laser holmios	Modelo:	Pulse 120H	Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	Lumenis			Clasificación del equipo:	Tratamiento
INSERCIÓN DEL INTERRUPTOR (SEGURIDAD DE LA PUERTA)		ENCENDIDO DEL SISTEMA		PASOS PARA MODIFICAR LAS CONFIG. DE TRATAMIENTO	
El bloqueo de la puerta externa es un elemento que desactiva el sistema de láser en caso de que se abran las puertas de la sala de tratamiento o se desenchufe el conector de bloqueo cuando el sistema de láser está en modo Ready (Listo). El láser permanece inactivo hasta que se introduce el conector: 1. Conecta el conector del interruptor de seguridad a la toma correspondiente. 2. Introduce el conector en su receptáculo. 3. Enrosca la traba de metal hacia la derecha. 4. Si se abre la puerta o se desconecta el conector, el láser se desactiva y muestra una notificación. 5. Para reanudar, cierra la puerta o vuelve a conectar el interruptor y presiona el botón LISTO.		1. Compruebe que el interruptor esté en la posición Open (Abierto). 2. Pulse el botón de Encendido/Apagado principal y sosténgalo por un segundo, luego suéltelo. • Si el interruptor se encuentra en la posición Cerrado, el sistema solo le permitirá acceder a los informes. Para encender el láser, necesitará reiniciar el sistema con el interruptor en la posición Abierto. • El procedimiento de prueba automática y calentamiento del sistema lleva cerca de un minuto. Se mostrará una barra de progreso en la pantalla de control durante el procedimiento de prueba automática y calentamiento.		PASO 1: Arrastre los botones de la barra deslizante o pulse las flechas para ajustar los valores de Energy (Energía) y Frequency (Frecuencia) (1). PASO 2: Si el sistema está conectado a una fibra compatible con Moses, seleccione primero el botón MOSES (2). Se abrirá el menú emergente de opciones de Moses, en el que podrá seleccionar el modo Moses. También se establecerá el ajuste Pulse Width (Anchura de impulso) en AUTO (Automática) y no será necesario seleccionarla. PASO 3: En el modo normal (es decir, Moses apagado) pulse el botón Pulse Width (Anchura de impulso) (3) para abrir un menú emergente (que se muestra a la izquierda) en el que puede seleccionar el uso de una anchura del impulso corta, media o larga. PASO 4: para volver a los ajustes predefinidos originales, pulse el icono Undo (Deshacer) (4).	
 Puerto del bloqueo		TRAS ENCENDER EL SISTEMA Después de encender el sistema y completar la prueba automática, realiza lo siguiente: 1. Comprueba que se haya seleccionado la especialidad correcta. Si se necesita cambiar, pulsa "Specialties" (Especialidades) y selecciona la correcta. 2. Selecciona los valores predeterminados que correspondan al tratamiento. Si no se muestra el valor predeterminado necesario, pulsa el botón "View all..." (Ver todo) para acceder a más opciones. 3. Comprueba que los parámetros de los valores predeterminados sean adecuados para el tratamiento, sin exceder el máximo de energía o la configuración de energía. 4. Edita los parámetros según sea necesario. Recuerda que los parámetros de cada lado de la pantalla pueden actualizarse de manera independiente. Los parámetros del lado izquierdo de la pantalla se activarán cuando pulses el pedal interruptor izquierdo, y viceversa.		 	
BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA Desactiva de inmediato las emisiones de la energía del láser. Verificación de las conexiones: 1. Verifique que el sistema introductor esté bien conectado con el láser. 2. Si el equipo quirúrgico lo requiere, conecte el accesorio quirúrgico al sistema de aspiración. 3. Verifique que el pedal esté conectado como corresponde. 4. Compruebe que todas las personas presentes en la sala de operación tengan la protección ocular adecuada.				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					