

VENTILADOR MECANICO ETERNITY SH300



UB SAS



ETERNITY 易世恒

SERVICIO AL CLIENTE UB SAS

CALL CENTER: 3186205880

EMAIL: CALLCENTERUBSAS@GMAIL.COM



UB SAS

FIGURA 1 PANEL FRONTAL VENTILADOR

PANEL FRONTAL

1. PANTALLA TÁCTIL PARA VISUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN EQUIPO, PACIENTE, MODOS VENTILATORIOS, ONDA DE MONITOREO.
2. CONTROLES E INDICADORES
3. PERILLA DE SELECCIÓN
4. PUERTO INSPIRATORIO
5. CONEXIÓN AL NEBULIZADOR
6. MODULO DE VÁLVULA ESPIRATORIA



FIGURA 3 PANEL POSTERIOR

PANEL POSTERIOR

1. INTERRUPTOR ENCENDIDO Y APAGADO
2. CONEXIÓN CABLE AC
3. ENTRADA DE O2
4. ENTRADA DE AIRE

PANTALLA LCD

1. MENÚ BARRA LATERAL
2. PARÁMETROS DE MONITOREO INTERFAZ PRINCIPAL: MV, VTE, PEEP, FIO2, NIVEL INFERIOR CONFIGURACIÓN DE ALARMA.
3. BARRA INFERIOR PARÁMETROS DE VENTILACIÓN
4. TIPOS DE ONDA SEGÚN CONFIGURACIÓN
5. BARRA DE INFORMACIÓN PERMITE VISUALIZAR MODO PROGRAMADO Y ALARMAS



FIGURA 2 PANTALLA LCD

PANELES

CONEXIÓN A RED ELECTRICA Y RED NEUMATICA

1. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A LA TOMA CORRIENTE. VERIFIQUE EL ENCENDIDO DEL INDICADOR DE CONEXIÓN.



FIGURA 4. INDICADOR CONEXIÓN DE LA RED ELECTRICA

2. CONECTE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DEL VENTILADOR A LA RED DE OXIGENO DEL HOSPITAL.



FIGURA 5. TOMA CONEXION DE OXIGENO

3. CONEXIÓN SUMINISTRO DE AIRE:

- ❑ OPCIÓN 1 : CONECTE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DEL VENTILADOR A EL COMPRESOR



FIGURA 6. CONEXIÓN SUMINISTRO DE AIRE. DEL COMPRESOR.

- ❑ OPCIÓN 2: CONECTE LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DEL VENTILADOR A LA RED DE AIRE DEL HOSPITAL.



FIGURA 7. TOMA CONEXION DE AIRE

BSA

SISTEMA DE ARRANQUE

1. PRESIONE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y UBÍQUELO EN LA POSICIÓN ON . LA PANTALLA SE ENCENDERÁ Y MOSTRARÁ LA INTERFAZ DE INICIO



FIGURA 8. INTERFAZ DE INICIO

2. CONFIGURE LOS PARÁMETROS INICIALES DEL PACIENTE Y SELECCIONE APLICAR PARA GUARDAR LOS DATOS.

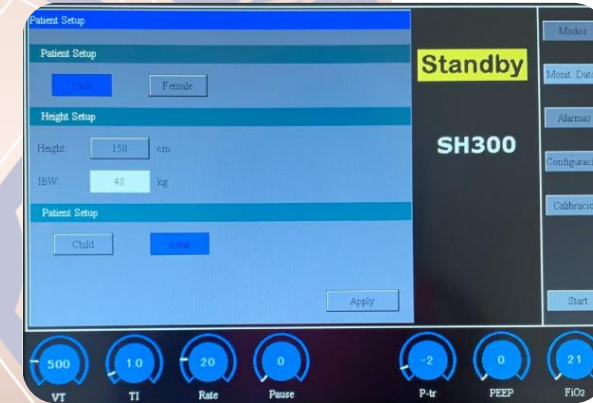


FIGURA 9 INTERFACE INICIAL

3. UNA VEZ INGRESADOS LOS DATOS ANTERIORES RETORNAR A LA INTERFAZ PRINCIPAL.



FIGURA 10. INTERFACE INICIAL

OPERACIÓN DEL VENTILADOR

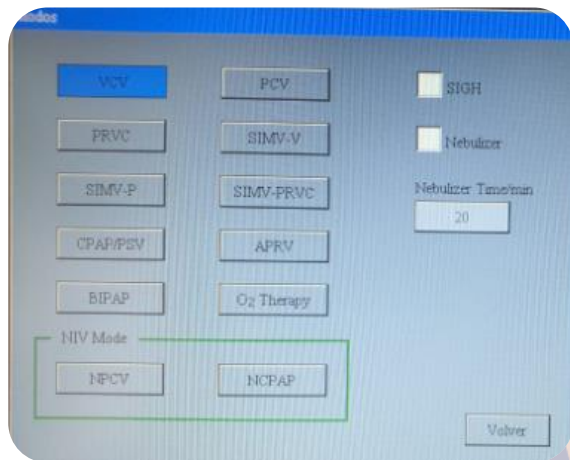


FIGURA 11 SELECCIÓN DEL MODO VENTILATORIO



FIGURA 12 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VENTILACIÓN

1. CONFIGURACIÓN DE MODOS:
GIRE LA PERILLA O TOQUE LA PANTALLA PARA SELECCIONAR LA OPCIÓN “MODOS” UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA PANTALLA. SE VISUALIZARAN LOS DIFERENTES MODOS DE VENTILACIÓN Y OPCIÓN DE NEBULIZACIÓN.

2. CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL MODO VENTILATORIO
GIRE LA PERILLA Y SELECCIONE EL PARÁMETRO QUE DESEA CONFIGURAR . PRESIONE “APLICAR” PARA GUARDAR LOS DATOS.

3. INICIO DE VENTILACIÓN
UNA VEZ CONFIGURADOS LOS PARÁMETROS SELECCIONE “START”, PARA INICIAR LA VENTILACIÓN DEL PACIENTE. EL LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA SE VISUALIZARA EL MODO VENTILATORIO, EL TIPO DE PACIENTE , ENTRE OTROS INDICADORES.



FIGURA 13. GRAFICAS DE VENTILACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BATERÍA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DC 16.2 VDC, 6900MAH; PAQUETE DE BATERÍA DE LITIO.
- CARGA: 6 HORAS COMO MÍNIMO
- PROTECCIÓN DE TEMPERATURA: 65 °C
- PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO: 6A

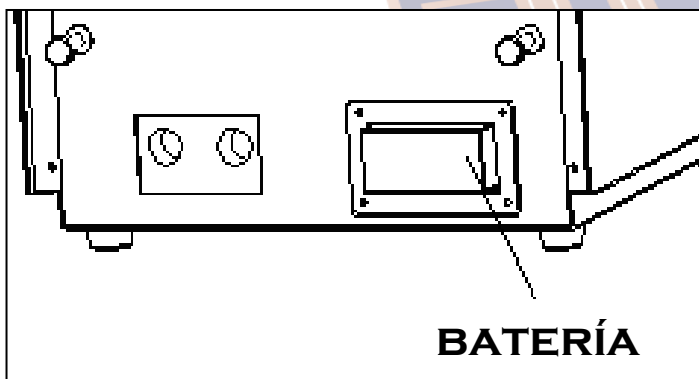


FIGURA 15 UBICACIÓN DE LA BATERÍA

CONEXIÓN AC

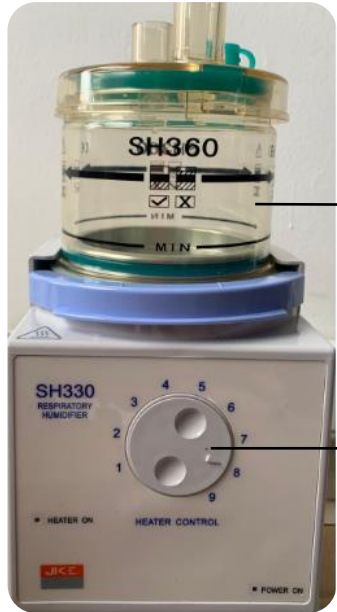


FIGURA 14 PANEL POSTERIOR

2. PRECAUCIONES

- CARGA: UNA VEZ SE CONECTE EL VENTILADOR A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA Y ENCIENDA EL INTERRUPTOR; EL SISTEMA CARGARÁ LA BATERÍA AUTOMÁTICAMENTE. SE RECOMIENDA QUE EL TIEMPO DE CARGA SEA MAYOR A 6 HORAS.
- DESCARGA: LA BATERÍA TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 60 MINUTOS . LA ALARMA "¡BATERÍA BAJA!" ES MOSTRADA EN LA PANTALLA CUANDO LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA NO ES SUFICIENTE HASTA QUE EL SISTEMA SE APAGUE. UNA VEZ GENERADA ESTA ALARMA ES NECESARIO CARGAR LA BATERÍA AL MENOS POR 10 HORAS PARA GARANTIZAR UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.


HUMIDIFICADOR



RESERVORIO

CONTROL DE TEMPERATURA

FIGURA 16. VISTA FRONTAL

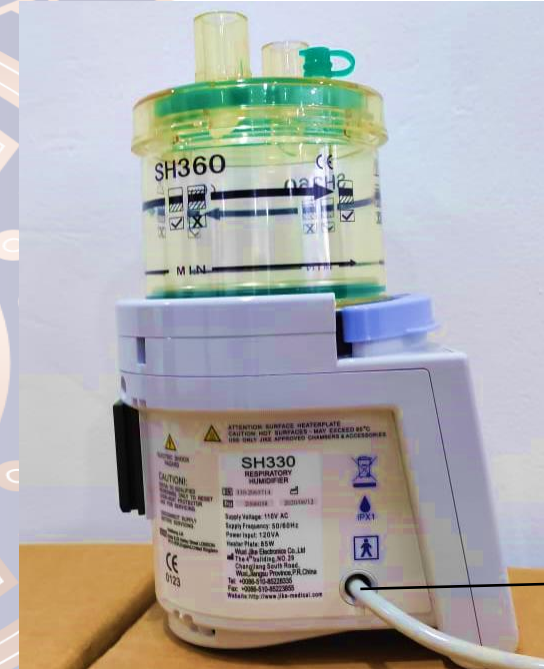

CABLE AC

FIGURA 18. VISTA IZQUIERDA



INTERRUPTOR

FIGURA 17. VISTA LATERAL DERECHA

OPERACIÓN DEL HUMIDIFICADOR

1. AJUSTE EL RESERVORIO SOBRE LA BASE DEL HUMIDIFICADOR
2. CONECTE EL CIRCUITO EN EL VENTILADOR Y EN EL HUMIDIFICADOR (CIRCUITO DE PACIENTE, TRAMPA DE AGUA Y PIEZA EN “Y”)
3. CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAGE Y PULSE EL INTERRUPTOR Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR POWER ON ENCIENDA
4. SELECCIONE LA TEMPERATURA DE TRABAJO

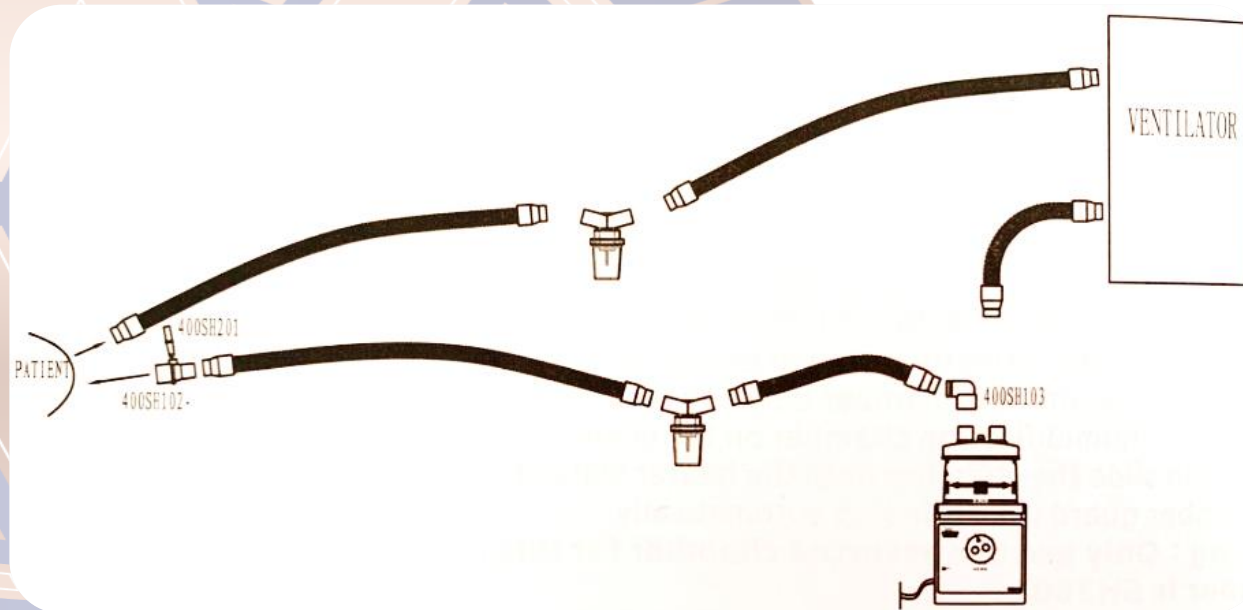


FIGURA 19. CONEXIÓN DEL HUMIDIFICADOR AL VENTILADOR

UB SAS

COMPRESOR



FIGURA 20 VISTA FRONTAL



FIGURA 21 VISTA POSTERIOR

1. MANÓMETRO DE PRESIÓN
2. LED INDICADOR DE ENCENDIDO
3. CONEXIÓN CABLE AC
4. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
5. CONEXIÓN MANGUERA DE AIRE
6. TRAMPA DE AGUA
7. FILTRO DE POLVO
8. VÁLVULA DE ALIVIO

SAS

OPERACIÓN DEL COMPRESOR

INSTRUCCIONES

1. VERIFIQUE LA CONEXIÓN DEL COMPRESOR A FUENTE DE ALIMENTACIÓN
2. COMPRUEBE QUE LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE AIRE AL VENTILADOR CUENTE CON LA TRAMPA DE AGUA
3. ENCIENDA EL EQUIPO Y VERIFIQUE QUE EL INDICADOR SE ENCIENDA
4. ESPERE QUE EL MANÓMETRO SE ESTABILICE E INDIQUE UNA PRESIÓN DE AIRE ENTRE 0.4 – 0.5MPa



FIGURA 22. FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR

UB SAS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

1. LIMPIE LOS FILTROS DE POLVO DEL VENTILADOR Y COMPRESOR UNA VEZ POR SEMANA.
2. DRENE LAS TRAMPAS DE AGUA UNA VEZ AL DÍA Y LIMPIE SU INTERIOR CON AGUA SI ES NECESARIO.
3. SUMERJA EL RESERVORIO DEL HUMIDIFICADOR EN LÍQUIDOS (GLUTARALDEHÍDO) MÁXIMO 12 MINUTOS, ENJUAGAR CON AGUA DESTILADA Y DÉJELO SECAR AL AIRE.
4. LIMPIE LAS SUPERFICIES DEL VENTILADOR CON UN PAÑO SUAVE HACIENDO USO DE AMONIO CUATERNARIO CERTIFICADO POR EL INVIMA. USAR AGUA DESTILADA PARA ENJUAGAR LOS RESIDUOS.
5. LIMPIEZA DE CUERPO DE LA VÁLVULA DE EXHALACIÓN Y DIAFRAGMA
 - REMOJAR EN QUIRUGER O GLUTARALDEHÍDO DE 10 A 12 MIN.
 - ENJUAGAR CON AGUA DESTILADA Y LIMPIAR LAS SUPERFICIES HASTA ESTAR SEGURO DE REMOVER TODO EL EXCESO DE LA SOLUCIÓN CON EL FIN DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS. SECAR CON UN PAÑO SUAVE O DEJAR SECAR AL AIRE.

CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACIÓN

PARÁMETRO	VENTILADOR	HUMIDIFICADOR	COMPRESOR
TEMPERATURA °C	10°C ~ 40°C	18°C ~ 26°C	5°C ~ 40°C
HUMEDAD RELATIVA %	≤ 80%	≤ 80%	≤ 80%