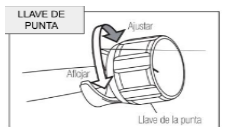
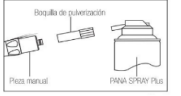
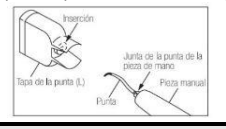


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001								
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>03</td> <td>2023</td> </tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	15	03
DÍA	MES	AÑO									
15	03	2023									
Nombre del equipo:	SCALER ULTRASONICO	Modelo:	AS2000	Riesgo del equipo:	IIA						
Marca:	NSK			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO Y						
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO							
 Dispositivo medico neumático de alta velocidad utilizado como herramienta de apoyo equipado con punta vibratoria la cual permite tratar diferentes patologías y realizar diferentes procedimientos odontológicos tales como: eliminar el sarro o cálculos dentales.				1. Antes de iniciar verifique que la unidad tiene agua y aire, y que las válvulas de paso a la conexión borden estén abiertas. 2. Conecte el scaler al acople borden de la unidad odontológica apretando en sentido horario y aflojando en sentido antihorario.  3. Inserte la punta 4. Active la pieza con el reostato y emplee normalmente en el paciente. 5. Para evitar accidentes o heridas con las puntas utilice la cubierta de punta.							
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		RECOMENDACIONES GENERALES		PASOS DE INSTALACIÓN DE LA PUNTA							
1. Peso 65G		1. Cuerpo del Scaler		1. Coloque la llave de puntas en el Scaler como se ve en la siguiente figura:							
2. Frecuencia de oscilación 5.600-5850 Hz		2. Rosca									
3. Borden 2/3 vías		3. Puerto de conexión para la punta		3. Ponga atención al detalle y observe que la punta se encuentra alineada con la llave							
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		4. Acople borden		4. Gire la llave hasta que se oiga 2/3 clicks							
La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		5. Puntas de escarificación.		Nota: Para extraer la punta del scaler, repita el procedimiento pero gire en sentido contrario.							
LUBRICACIÓN DEL EQUIPO		2. Realice la limpieza y desinfección según las recomendaciones realizadas		PASOS DE INSTALACIÓN PARA LA TAPA DE LA PUNTA							
 Se recomienda realizar lubricación del equipo, específicamente la punta recta entre paciente y paciente después de esterilizar el equipo, como se muestra a continuación:		3. Realizar el registro de limpieza y desinfección diario		1. Coloque la tapa como se ve en la siguiente figura:							
		4. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto con otro trapo seco.									
		5. No destapar el equipo									
		6. No utilizar otra punta diferente a las entregadas.									
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:											
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.											
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica											
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo											
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.											
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.											
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas											
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.											