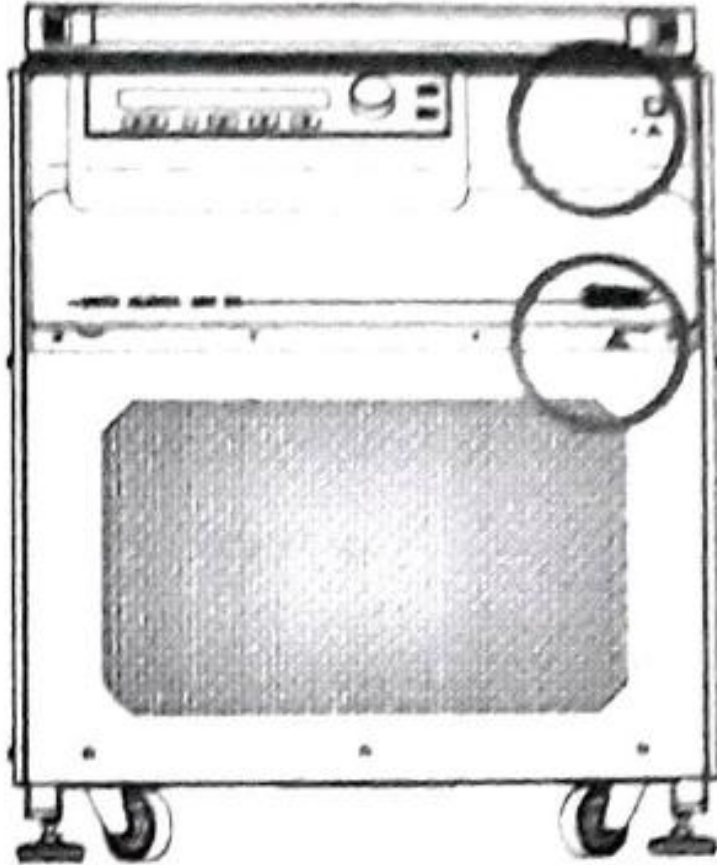
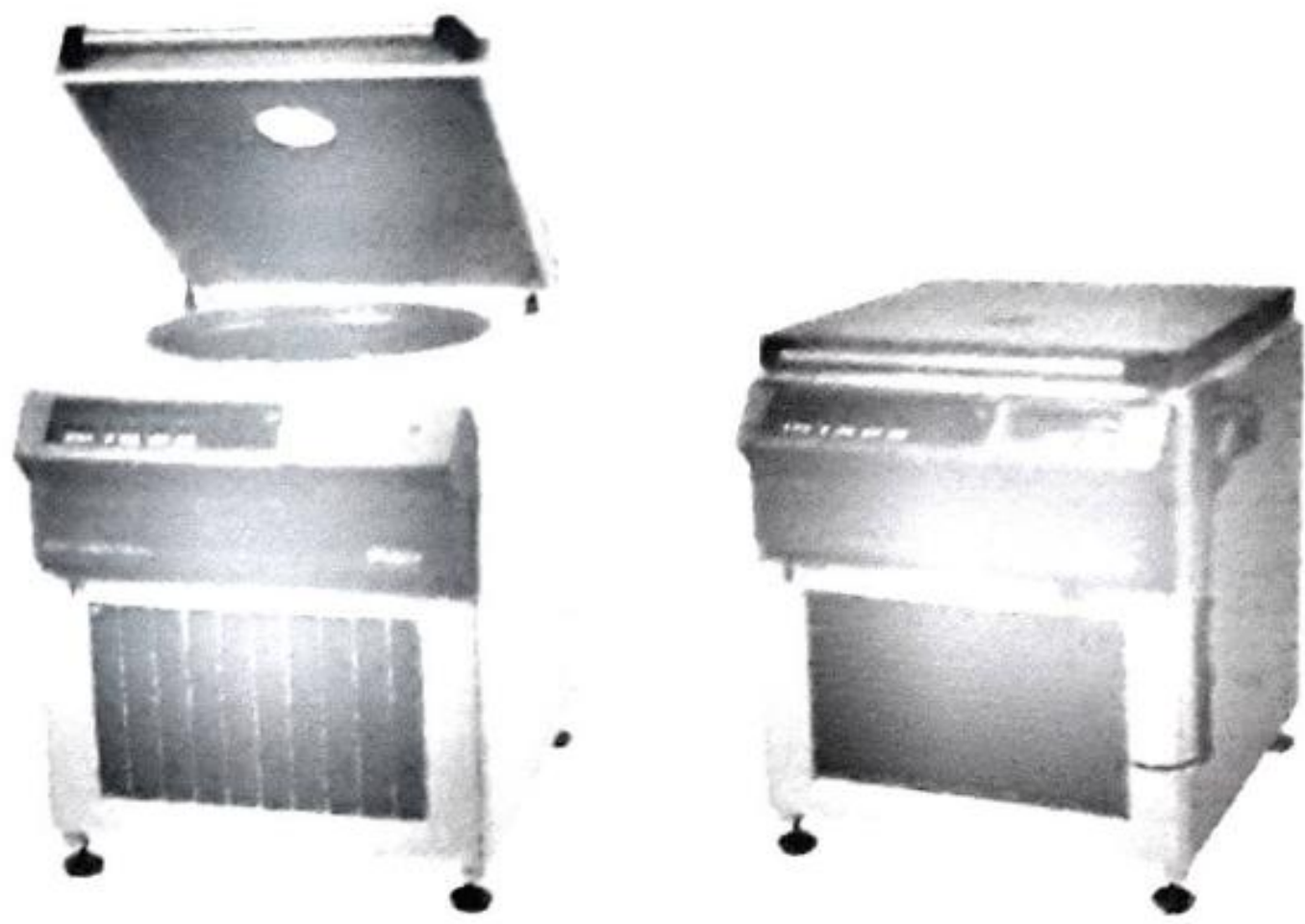
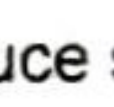
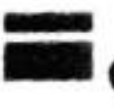


**Ref. Guía Rápida de Utilización Centrifuga Hettich Roto Silenta 630 RS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Encienda la centrifuga del botón de encendido ubicado en la parte frontal inferior del equipo. Luego presione el botón  en el panel de control frontal superior.</p> <p>La tapa se desbloquea por motor, la iluminación de la tecla  se apaga y en el indicador se cambia el símbolo  al símbolo .</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2. Con la tapa de la centrifuga abierta, puede introducir las unidades a separar en los soportes correspondientes y utilizando la acomodación de bolsas sugerido por la casa comercial.</p> <p>Baje la tapa y presione levemente sobre la manija de tubo. El mecanismo de bloqueo funciona eléctricamente. El botón  se ilumina y en la pantalla el símbolo cambia a .</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>3. Pulse la tecla <b>PROG</b> para seleccionar el parámetro PROG-Nr. El campo de entrada se muestra invertido. Con el botón giratorio ajuste la posición de programa deseada y pulse la tecla <b>RCL</b>. Se indican los datos de centrifugado de la posición de programa seleccionada. Tenga a la mano la lista de protocolos de centrifugación validados por la institución y escoja el pertinente para el ciclo que esté realizando.</p>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>4. Inicie el proceso de centrifugación presionando la tecla <b>START</b>. La indicación de rotación  se produce siempre que gire el rotor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>5. Tras finalizar el tiempo o al interrumpir el funcionamiento de centrifugado pulsando la tecla <b>STOP</b>, se produce el funcionamiento hasta parada con el parámetro de salida seleccionado. Tras la parada del rotor parpadea el símbolo  en el indicador hasta que se abre la tapa.</p> |