



INCUBADORA YP2000

1

Incubadora neonatal cerrada doble pared con modo aire y modo bebé para controlar la temperatura, controla humedad y concentración de oxígeno, estos parámetros se visualizan en la pantalla.

2


CARACTERISTICAS



1. Altura regulable
2. Doble cabina
3. Inclinación de cuna regulable
4. Función de temperatura mayor a 37°C
5. Porta chasis para toma de rayos X
6. Control temperatura del aire de 25°C - 37°C
7. Balanza
8. Repisa monitor

3

ALARMAS

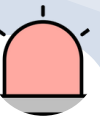

- Alarma por falla en el suministro de energía.
- Alarma por falla en el motor
- Alarma por falla del sensor de aire
- Alarma por falla del sensor de piel
- Alarma por desviación de temperatura (<3°C> aire, <1°C> piel)
- Alarma por sobrecalentamiento >38°C
- Alarma por falla de sensor por flujo de aire
- Alarma por desconexión del Sensor de Piel
- Alarma por mala posición del Sensor de Piel



ADVERTENCIA

- Supervise y registre regularmente la temperatura del bebé para comprobar si la temperatura del paciente es muy alta/baja o sucede cualquier condición inusual
- NO deje la INCUBADORA expuesta a la luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor radiante.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

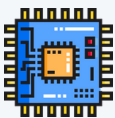

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.



ADVERTENCIA

Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos