




CONNECTOR PANEL

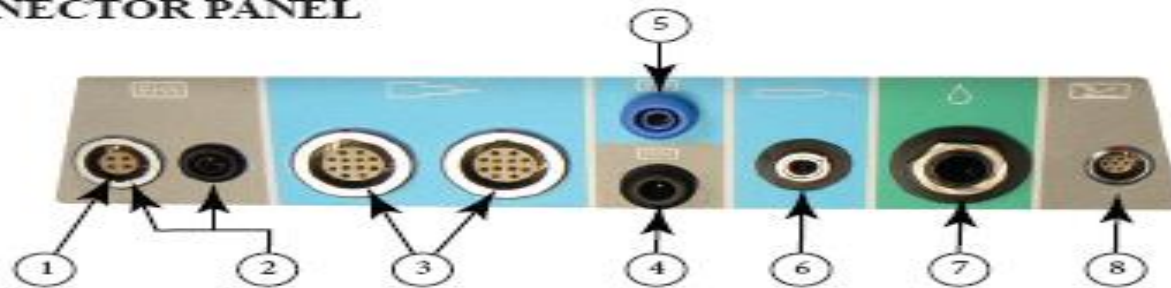

1. Legend EHS® Motor, Midas Rex
2. 1&2. Legend Stylus™ Motor
3. Magnum® II , M5, Visao®, Stylus™ Touch & Spine Shaver Hand pieces
4. Nerve monitor connection for Stim Bur
5. Stim Bur Connection
6. Skeeter® Handpiece
7. Endoscrub® Fingerswitch/Footpedal & IntelliFlow Remote Control Irrigation
8. Footswitch

Irrigation: cc/min. Variar la tasa de la bomba de irrigación. Esta puede (-) disminuir, o incrementar (+) hasta 100 cc/min. Permitiendo encontrar menos obstáculos en aplicaciones de hueso.

Solo se puede cambiar en pantalla.

Speed: Por default la velocidad es de 5000 RPM. Esta puede variar: (-) disminuir, o incrementar (+). Solo se puede cambiar en pantalla.

Por default identifica la pieza de mano (motor/shaver)

Mode:

OSC MODE:

Modo de oscilación que se usa siempre con cuchillas.

FWD MODE:

Modo forward (adelante) usado únicamente con fresas. Default 12000 RPM

Estos modos pueden cambiarse por pantalla y pedal.

Bomba 1: cc/min. Usada para el Endo-Scrub, y tubería de enfriamiento Visao

1

Symbol Pedal Foot: Permite seleccionar entre velocidad variable (como un acelerador, incrementando la velocidad), o velocidad completa programada speed desde el inicio. Únicamente desde pantalla. Esto para funcionar en el pedal de piso.

Bomba 2: cc/min. Tubería de irrigación cuchillas.

2






Pumps: Configuración bombas 1 y 2


Endo Scrub: Por medio de la camisa externa puesta en el lente, limpia rápidamente los residuos que están en el mismo sin necesidad de hacer pausa en Cx para limpiarlo.

Por default la irrigación es de 3, pero es configurable en pantalla.

Flush: enjuagar

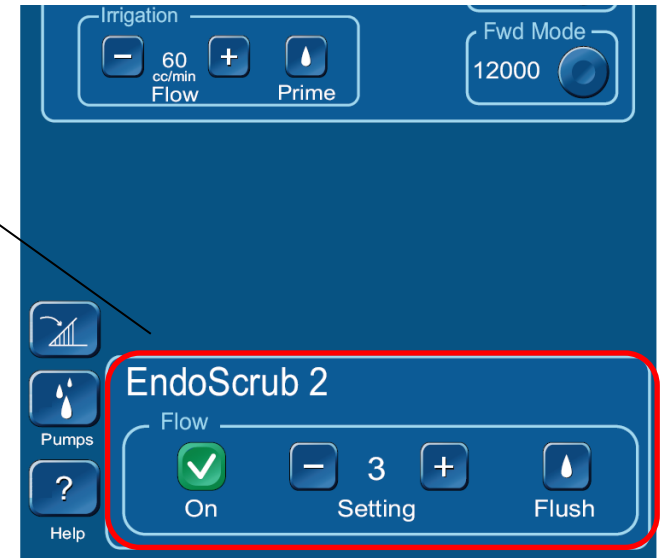

Endo Scrub: Siempre se activa cuando está conectada la pieza de mano M5

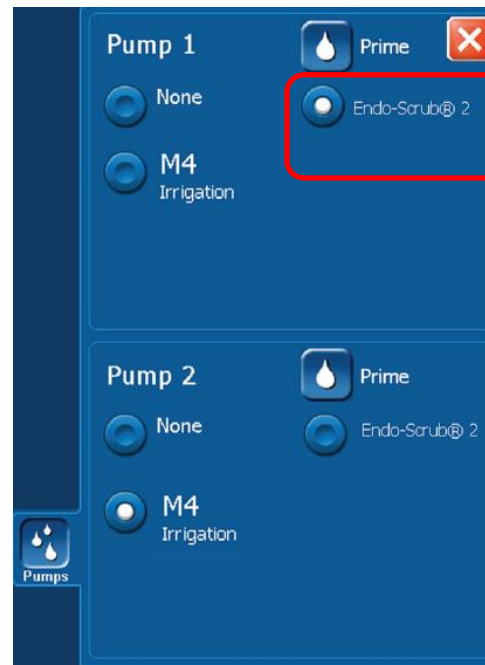

Blade Position: Posición cuchilla.


Hay 2 posibles modos de posición:

Botón IPC: Cuando pare de cortar, la cuchilla quede cerrada.

XPS3000: : Cuando pare de cortar, la cuchilla quede en la última posición del giro.

Botón Triangulo 60°: 2 opciones de posibles: 60° y 180°. Sirve para rotar la cuchilla con el fin de abrirla o cerrarla al momento de entrar en la cavidad nasal. (Abierta si se requiere sección constante y cerrada para ingresar en la cavidad)

1. Si la cuchilla no es rotatable, 180° de giro es recomendado.
2. Si la cuchilla es rotatable, 60° de giro es recomendado.

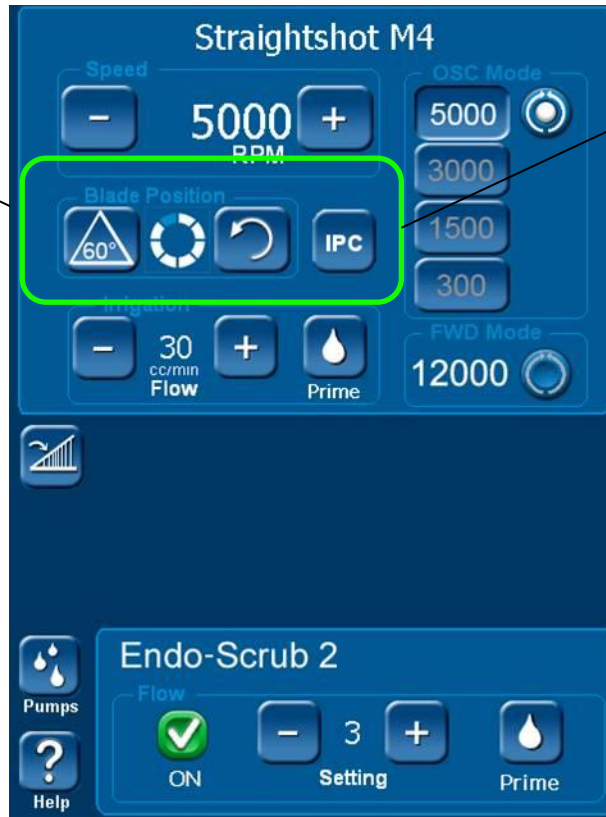

Blade Position: Esta opción permite desatascar las cuchillas durante la cirugía

Boton izquierdo Pedal: Cambiar las RPM en los modos OSC y FWD. En las velocidades establecidas en pantalla.

Boton superior Pedal: Si hay varias piezas de mano (motores – drill) conectadas a la IPC, este botón permite seleccionar la pieza de mano a utilizar. En pantalla se observara los valores por default de cada pieza de mano.



Pedal: Encender o apagar la pieza de mano (motor –drill)

Boton derecho Pedal: Modificar las opciones en Blade Position, de 60° a 180°, y IPC a XPS300

Troubleshooting:

1. Pieza de Mano no funciona:

- Verifique que este correctamente conectada en cualquiera de los puertos del panel de conexión en la zona 3 y haya sido identificada en pantalla. De lo contrario cambie de puerto, o cambie de pieza de mano hasta que la IPC la identifique.
- Verifique que el pedal este bien conectado y funcionando, comprobándolo con los botones que tiene el mismo al mostrar cambios en la pantalla. Si observa que no hay cambios y el pedal no responde, en la parte posterior de la consola hay un interruptor que hará las veces de pedal encendiendo y apagando la pieza de mano, realizando esto de manera manual.

Si al realizar esto último la pieza de mano no funciona, cambie de pieza.

Nota: Recuerde que la pieza de mano no es sumergible. (Solicitar protocolo de limpieza y esterilización).

2. Pedal no funciona:

- Verifique que el pedal esté conectado a la IPC y reconocido en pantalla. De lo contrario, utilice el interruptor que hará las veces de pedal encendiendo y apagando la pieza de mano, realizando esto de manera manual.

3. Consola IPC no funciona:

- Revisar que esté conectado el cable AC a un toma corriente y a la consola. (Encenderla)
Si el problema persiste cambie de IPC.

4. Pantalla IPC no funciona:

- Apagar la IPC, encenderla de nuevo e ingresar al menú antes que termine de cargar la pantalla. En menú ingrese a calibración de pantalla y calibrarla.
Si el problema persiste cambie de IPC.

Para estos problemas y otras situaciones presentadas por favor comunicarse con nuestros Especialistas Clínicos y/o Representante de ventas.