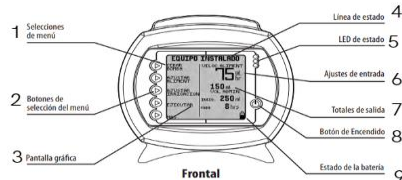
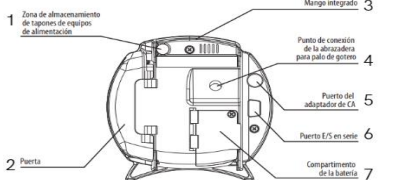




	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				16	09	2024

Nombre del equipo:	Bomba de nutrición	Modelo:	Kangaroo ePump enteral feed	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	COVIDIEN			Clasificación del equipo:	Tratamiento

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
 La bomba para irrigación y alimentación enteral Kangaroo™ ePump™ con abrazadera para palo de gotero es una bomba de alimentación enteral de precisión fácil de usar. Puede programarse de manera fácil para suministrar a los pacientes alimentación continua o intermitente, además de incluir una función de irrigación automática cuando se utiliza con los equipos de irrigación y alimentación Kangaroo™ ePump™.	 - Selecciones de menú - Botones de selección del menú - Pantalla grafica - Línea de estado - Led de estado - Ajustes de entrada - Totales de salida - Botón de Encendido - Estado de la batería	- Pulse el botón de encendido del equipo del panel de control. - Abra la puerta azul que delimita la zona para cargar el equipo para bomba. - Prepare el equipo y el set de bomba - Pare "CEBAR" automaticamente la bomba pulse el botón de cebar bomba. Recuerde que si se utiliza un equipo de irrigación y alimentación pulse "CEBAR IRRIG" y mantenga pulsado hasta que el liquido de irrigación haya alcanzado el nivel de la válvula. finalmente, pulse el botón "CEBAR ALIM". - Utilice los botones de la parte izquierda de la pantalla LCD para definir los parametros de alimentación para el paciente. - Defina los parametros de irrigación/ alimentación - Pulse el botón "EJECUTAR" cuando este liste para comenzar el proceso. - Para detener la operación pulse el botón "PAUSA" o
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Historial: 72 horas Idiomas: 16 idiomas Cebado automático: 30 segundos Opciones de alarma: Volumen de alarma ajustable no crítico Tamaño (cm): 16,8 cm x 16,3 cm x 11,7 cm Tamaño (pulgadas): 6,6 pulg. x 6,4 pulg. x 4,6 pulg. Peso (kg): 1,0 kg Peso (lb): 2,3 lbs Duración de la batería: 15 horas Alarma de oclusión: 15 psi Precisión: +/- 10 % Cable de alimentación: Desmontable Velocidad de irrigación: 1960 ml/h (máximo) Velocidad de flujo: 1-400 (en incrementos de 1 ml) Intervalo de irrigación: 1-24 h en incrementos de 1h. Tensión: Funciona con 9 V CC, 1,5 amperios. Utilice el adaptador de CA para utilizarlo con una toma de corriente.	 - Zona de almacenamiento de tapones de equipos de alimentación - Puerta - Mango integrado - Punto de conexión de la abrazadera para palo de gotero - Puerto del adaptador de CA - Puerto E/S en serie - Compartimento de la batería	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Recuerde que el proceso de limpieza y desinfección se debe de realizar con el producto institucional aprobado. En caso, de no contar con la disponibilidad del producto realizar la desinfección con alcohol al 70% con paños no esteriles. NOTA: Desconecte la bomba de la fuente de alimentación de CA antes de limpiarla. Después de limpiarla, no la conecte a la fuente de alimentación de CA hasta que la bomba y el adaptador de alimentación de CA estén completamente secos. -No utilice limpiadores fuertes.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.

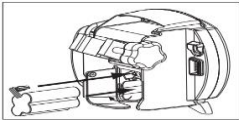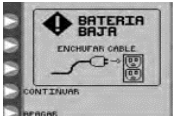	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				16	09	2024
Nombre del equipo:	Bomba de nutrición	Modelo:	Kangaroo ePump enteral feed	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	COVIDIEN		Clasificación del equipo:		Tratamiento	
MODOS DE OPERACIÓN		ERROR DEL SISTEMA		SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA		
MODO ALIMENTACIÓN CONTINUA: El equipo administrará la nutrición enteral a una velocidad constante, hasta que se haya administrado el volumen programado o hasta que se haya agotado el suministro. MODO ALIMENTACIÓN INTERMITENTE: El equipo administrará bolos de nutrición enteral a intervalos de tiempo programados. El volumen del bolo y la velocidad de alimentación también se pueden programar. MODO EZ: El equipo realiza un ajuste limitado que sólo puede utilizarse en el modo de alimentación continua y este suministra alimentación de manera ininterrumpida a una velocidad de 0-400 ml/hr, según lo defina el usuario o hasta que se detenga manualmente. MODO BOLO MÁXIMO: Se puede utilizar para administrar un bolo a una velocidad elevada, similar a la alimentación por gravedad, la solución de alimentación se mueve periódicamente dentro del tubo para impedir bloqueos del juego de alimentación. A intervalos regulares, calculados a partir de la velocidad de alimentación de la bomba programada actualmente, a través del tubo se desplaza 13. Lengüeta de dedo una porción pequeña.		La única forma de salir de un error del sistema es apagar el dispositivo. No se ofrece ninguna opción CONTINUAR debido a la gravedad del error. También aparece un número de error en la pantalla, como referencia. Este número debe notificarse al llamar a la línea de asistencia y servicio al cliente. 		1. Apague la unidad. 2. Afloje el tornillo de la puerta de la batería, situado en la parte trasera de la bomba. 3. Abra la puerta de la batería y desconecte el conjunto de cables. Puede que sea necesario un destornillador de punta plana pequeña para desconectar la lengüeta del conector. 4. Saque la batería de su compartimento. 5. Inserte una nueva batería en el compartimento con el conjunto de cables sobresaliendo. 6. Alinee el conector con el cable rojo situado en la parte superior derecha. 7. Empuje el conector hasta que encaje correctamente. 		
ERROR DE PAUSA		ERROR DE ALIMENTACIÓN, IRRIGACIÓN Ó FLUJO		ADVERTENCIA		
Aparecerá si la bomba ha permanecido inactiva, sin indicarle ninguna instrucción, durante más de 10 minutos. Pulse CONTINUAR para volver a la pantalla anterior. 		Aparece cuando ya no se administra la leche enteral porque la bolsa está vacía o hay un atasco entre la bomba y la bolsa. Compruebe si la bolsa está vacía y vuelva a llenarla según sea necesario. Si la bolsa todavía contiene solución de alimentación, extraiga el casete y compruebe si hay un exceso de espuma o burbujas en el tubo lateral de la bolsa. 		Uso del equipo para bomba >24 horas Se recomienda reemplazar los equipo para bomba después de este tiempo de uso. Este icono es únicamente un mensaje informativo y no requiere realizar ninguna acción. 		
		ERROR DE BATERÍA BAJA		MATRIZ DE LED		
Si no se puede resolver el error, pulse APAGAR para detener la bomba y poner en marcha otra bomba.		La batería durará aproximadamente 30 minutos cuando aparezca esta pantalla:  Enchufe el adaptador de alimentación de CA para comenzar a cargarla.		Indica el estado de la bomba, especialmente en habitaciones oscuras. 1.Verde: Funcionamiento normal. 2.Luz amarilla: Situación informativa. 3.Roja: Alarma de alta prioridad.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						