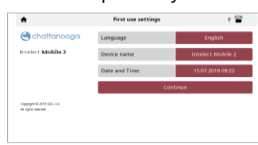
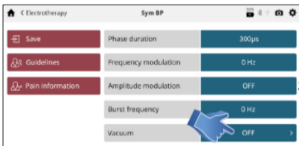


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001		PAGINA 01 DE 01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA 9 MES 09 AÑO 2024
Nombre del equipo:	ULTRASONIDO INTELEC MOBILE 2	Modelo:	CH151201	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	CHATTANOOGA			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		ENCENDER EL DISPOSITIVO	
 El dispositivo Intelect Mobile 2 es un sistema de terapia de electrodos, electroterapia y combinado que cuenta con dos canales; puede usarse con o sin el carro opcional, lo cual permite incluir un módulo de vacío. Este equipo solo se debe utilizar bajo la prescripción y supervisión de un profesional médico autorizado.				Encienda el dispositivo con el interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO en la parte posterior de la unidad. 1. Se mostrará la siguiente pantalla de inicio por unos segundos mientras se inicia el dispositivo:  2. A continuación aparecerá la primer pantalla de configuración que le permitirá al usuario establecer el idioma, el nombre del dispositivo y la hora.  3. Haga clic en el botón "Continue" (Continuar) para ir a la pantalla de inicio.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				PARAR EL TRATAMIENTO O APAGAR	
1.Frecuencia : Doble frecuencia a 1 o 3 MHz, ciclos de trabajo pulsados o continuos (10%, 20%, 50% y 100%). 2.Funcionamiento: La detección de acoplamiento se puede monitorear de forma audible o visualmente 3.Modelo: Intelect Mobile 2 4.Peso: 2.8 kg 5.Referencia de Marca: CH151201 6.Tamaño: 35.5 × 34 × 15 cm 7.Uso: Para detectar cambios en el aspecto y función de los órganos, tejidos y vasos. 8.Pantalla táctil: 7" de alta resolución. 9.Luces: Informativas alrededor de los puntos de conexión 10.Configuración de protocolos sugeridos: (SPS) 11.Librería anatómica: Alta resolución y guías de tratamiento incorporadas		1. Dial de ajuste 2. Botón de comenzar/pausa 3. Botón de «encendido/apagado» Presione y mantenga presionado (2 seg) el botón para APAGAR el dispositivo. 4. Interruptor de encendido/apagado (solo se lo puede activar cuando está conectado a la red eléctrica) 5. Soporte del aplicador de ultrasonido, en ambos lados (izquierdo y derecho) 6. Cable de alimentación de corriente 7. Tapa de la batería 8. Puerto de memoria USB 9. Fijación magnética al carro 10. Tapa del módulo de vacío 11. Asa del dispositivo		-Presione el botón Comenzar/pausa para pausar el tratamiento y a continuación presione el botón de «Stop» (Parar) en la pantalla táctil. Si el dispositivo está conectado a la red eléctrica, presione el botón de "on/off" (encendido/apagado) en el panel frontal y después apague el interruptor en la parte posterior de la unidad. -Si el dispositivo está funcionando con batería, siga el siguiente procedimiento, pero para apagar solamente presione el botón "on/off" en el panel frontal.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001				
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:				
			PAGINA: 01 DE: 01 DÍA: 9 MES: 09 AÑO: 2024				
Nombre del equipo:	ULTRASONIDO INTELEC MOBILE 2	Modelo:	CH151201	Riesgo del equipo:	IIA		
Marca:	CHATTANOOGA			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO		
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		CONTINUACIÓN PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		COMO COLACAR LA BATERÍA			
1. Conecte los cables para ultrasonido y/o estimulación.  2. Conecte el cable de alimentación de corriente en el equipo. 3. Encienda el equipo desde el interruptor de corriente.  Nota: Utilice el Puerto USB para actualización de Software. 4. Seleccione el modo de terapia deseado. 		5. Modifique los parametros para el tratamiento seleccionado.  6. Oprima el botón PLAY para Iniciar el tratamiento o pausar.  7. Finalice el tratamiento. 		1. Desatornille la tapa de la batería ubicada en la parte inferior del dispositivo (2 tornillos). 2. Retire la tapa de la batería. 3. Enchufe la batería nueva al conector de la batería. 4. Inserte la batería en su lugar. 5. Vuelva a colocar la tapa de la batería con los 2 tornillos. COMO SUSTITUIR LA BATERÍA 1. Desatornille la tapa de la batería ubicada en la parte inferior del dispositivo (2 tornillos). 2. Retire la tapa de la batería. 3. Desenchufe y extraiga la batería. 4. Enchufe la batería nueva en el conector de la batería. 5. Inserte la batería en su lugar. 6. Vuelva a colocar la tapa de la batería con los 2 tornillos. Nota: En caso de no usar el dispositivo con la batería instalada, se recomienda conectar el dispositivo a la corriente eléctrica y poner en marcha el dispositivo con el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del dispositivo al menos una vez cada 4 meses para permitir que la batería se cargue. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Mantenga el equipo apagado mientras realiza la limpieza. Después de terminar la terapia, limpie el exceso de gel de la piel del paciente y del cabezal. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.			
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:							
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.							
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica							
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo							
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.							
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.							
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas							
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.							