

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

CÓDIGO: NA


MARCA: MINDRAY

VERSIÓN: 1

MODELO: UMEC-10

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/09/2022

USO DEL EQUIPO

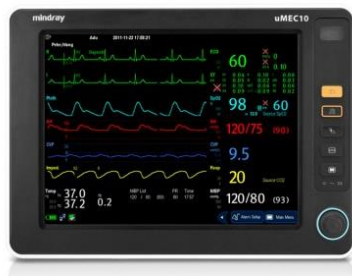

Dispositivo que detecta, procesa y muestra los parámetros fisiológicos de un paciente conectado a éste, en este caso. Este monitor multiparámetros entrega señal de ECG de 5 y 3 derivaciones, Respiración, Sensor de Spo2, 1 Canal de temperatura, NIBP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener conectado el equipo a la red eléctrica
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Tener en cuenta los canales que estén activados para evitar confusiones en la temperatura y presión.

PARTES DEL EQUIPO



Nota: El botón de encendido y apagado se encuentra en uno de los laterales.

1. Piloto de Alarmas
2. Botón para restablecer configuraciones de las alarmas
3. Botón para silenciar o restaurar las alarmas
4. Botón para NIBP
5. Botón para congelar o descongelar las ondas graficas de monitoreo
6. Botón para acceder al menú principal
7. Perilla para desplazarse por las diferentes opciones del monitor, girando hacia la derecha o izquierda y haciendo clic para ajustar
8. Compartimento para papel
9. Conexión para el accesorio de Temperatura
10. Conexión para el accesorio de Saturación
11. Conexión para el accesorio de ECG
12. Conexión para accesorio de NIBP.


MODOS DEL MONITOR

MODO ECG:



1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello.
2. Ubique los electrodos en el paciente.
3. Conecte el cable paciente a los electrodos y al monitor
4. Encienda el monitor y verifique la correcta monitorización.
5. Si es necesario, modifique desde el monitor la derivación del ECG:

[Menú] [Parámetros de ECG] [Otros] y seleccione la derivada correspondiente y aceptar configuración.

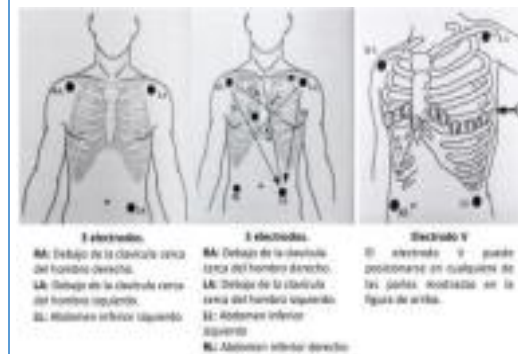

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

CÓDIGO: NA

MARCA: MINDRAY

VERSIÓN: 1

MODELO: UMEC-10

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/09/2022

MODOS SP02:



1. Seleccione el sensor de oximetría adecuado para la entrada del monitor
2. Ubique el sensor en el dedo del paciente
3. Conecte el accesorio al monitor y verifique la correcta monitorización del paciente.

MODOS TEMPERATURA:



1. El monitor viene con un accesorio en forma de moneda de acero inoxidable el cual se coloca sobre la superficie del cuerpo.
2. El monitor cuenta con dos entradas de temperatura, conectar debidamente el cable al monitor en la entrada deseada y configurar las entradas desde el menú del monitor.
3. Ubicar el sensor firmemente en el cuerpo del paciente.
4. Revisar desde el menú la configuración de las alarmas sobre temperatura para adaptarlas al paciente.
5. En tal caso de que la temperatura se encuentre en grados Fº desde el menú se puede modificar la unidad de medida.

MODOS NIBP:



El monitor cuenta con diferentes modos para la toma de presión, con el modo manual, con el modo automático de seguimiento, y modo IBP:

MODOS MANUAL:

1. Encendemos el monitor.
2. Conectamos la válvula de aire con el manguito de presión arterial
3. Confirmamos que el brazalete se encuentra completamente desinflado y conectamos al monitor
4. Presionamos el botón de NIBP y esperamos que inicie la toma de medida.

MODOS AUTOMÁTICO: Se configura directamente desde el menú, y lo iniciamos cuando necesitamos señales de monitoreo continuo, este puede configurar para que tome medidas de presión cada cierto tiempo establecido y estas tomas se guardan en el historial del monitor.



ALARMAS Y POSIBLES ERRORES

El monitor no enciende



Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor.

Uno o varios de los botones del monitor no sirven



Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico.

La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos



Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.

La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos



Verifique que el LED del sensor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE SANTO DOMINGO, C.A.	 UNIVERSIDAD DE MEDIÉLLAN UAM	 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
			MARCA: MINDRAY	VERSIÓN: 1
			MODELO: UMEC-10	FECHA DE ELABORACIÓN: 28/09/2022

CÓDIGO DE COLORES DE ALARMAS	
	Alarma fisiológica detectada de peligro de alto nivel, revisar conexión de accesorios o signos vitales del paciente
	Alarma técnica de alto nivel, revisar baterías y posibles fallas de monitorización

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación IIB de Alto riesgo.	
PASOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR	
1. Verifique que el monitor esté conectado a la red eléctrica. 2. Encienda el monitor. 3. Realice la conexión de los accesorios a utilizar para el monitoreo. 4. Decida que variables quiere monitorear. 5. Chequee que el cable paciente y sensores son correctos, y verifique si el monitor inicia a monitorizar correctamente.	
ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO	
1. Si el monitor presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento. 2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan. 3. Si sospecha que el monitor no funciona correctamente, no lo utilice para ningún tipo de procedimiento o monitorización de un paciente. 4. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una fuente de alimentación con toma tierra de protección	
MODO DEMO	
En el modo de demostración, el monitor puede demostrar sus funciones principales cuando el paciente o el paciente simulador no está conectado. El modo Demo está protegido por contraseña.	
Para ingresar al modo de demostración:	
1. Seleccione [Menú principal][Mantenimiento >>]. 2. Seleccione [Demostración >>]. Ingrese la contraseña requerida y luego seleccione [Ok].	
Para salir del modo de demostración, seleccione [Menú principal][Mantenimiento >>][Salir de demostración].	
MODO ESPERA	
En el modo de espera, puede detener temporalmente la monitorización del paciente sin apagar el monitor. Para ingresar al modo de espera, seleccione la tecla rápida de espera.	