


Manual rápido neuroestimulador MultiStim SWITCH

PAJUNK

MEDIZINTECHNOLOGIE

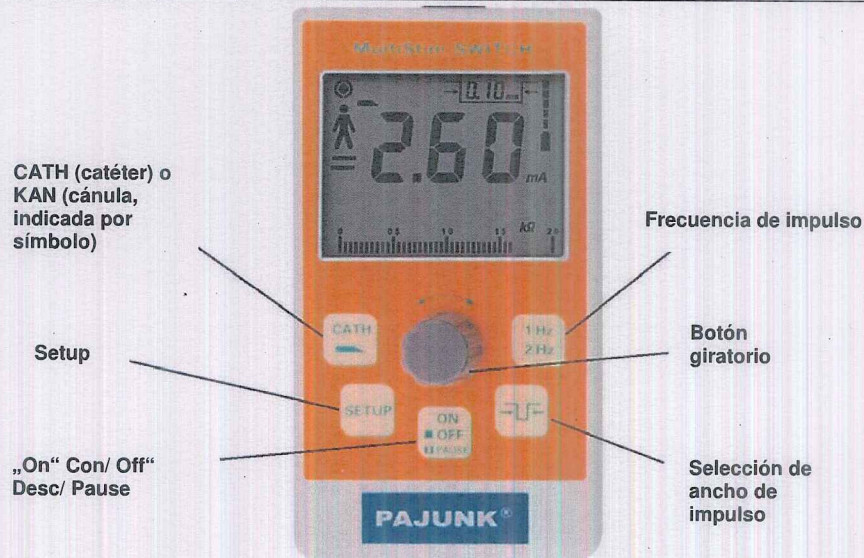

- + Pulse la **tecla ON** una vez para conectar el aparato. (Modo PAUSE → Indicación del display parpadea)
- + Mediante una sola pulsación de la **tecla SETUP** se conmuta al modo de ajuste. (Nivel 1 – selección del volumen)
- + La selección de valores se efectúa sobre el **botón giratorio**.
- + Mediante pulsación prolongada (mín. 2 segundos) de la **tecla SETUP** se almacena los valores actualmente indicado en la pantalla en forma permanente.
- + Durante el almacenamiento se escucha un breve tono de control y el dispositivo cambia al modo PAUSE. (Indicación del display parpadea)
- + Mediante una breve pulsación de la **tecla SETUP** se conmuta al siguiente punto de menú del SETUP.
- + Cuando usted ha ajustado todos los parámetros, pulsa el botón giratorio y llega al modo activo – el dispositivo está listo.

Manual rápido neuroestimulador MultiStim SWITCH

PAJUNK

MEDIZINTECHNOLOGIE



SETUP Nivel 1: Posibilidades de selección por el ajuste del volumen	
0	Mudo
1, 2, 3, 4	Volumen creciente
A4 a A1	Volumen reducido
SETUP Nivel 2: Posibilidad de selección por el cánula	
Posibilidad del ajuste de la intensidad de corriente (0-6,00mA), Frecuencia (1 Hz ; 2 Hz) y ancho de impulso 0,05 a 1,00 ms.	
SETUP Nivel 3: Posibilidades de selección por el catéter	
Posibilidad del ajuste de la intensidad de corriente (0-20,00 mA), Frecuencia (1 Hz ; 2 Hz) y ancho de impulso 0,05 a 1,00ms.	
SETUP Nivel 4: Selección del umbral del tono de advertencia	
0	No valor umbral de resistencia esta ajustado.
3	Cuando la resistencia de circuito de paciente supera el valor de 20 KΩ, se emite un tono doble (p.ej. a la penetración en la cubierta de nervio).
SETUP Ebene 5: Activación de la tabla Choquet (solo en el modo de cánula)	
0	El ancho de impulso esta ajustado manual.
1	Mediante la reducción de la intensidad de corriente, se adapta el ancho de impulso automático. (véase tabla Feugeaus/Choquet)

Por favor observe las advertencias en el manual de instrucciones!