

MD

Durante una emergencia es imprescindible extraer la fuente del paciente y después sacar al paciente de la sala de tratamiento. Siga la secuencia de pasos a continuación. En cada paso, evalúe si la situación de emergencia se ha resuelto. Si no, continúe con el siguiente paso. Observe los protocolos de respuesta de emergencia de su centro. Se recomienda encarecidamente practicar el procedimiento de respuesta de emergencia con todo el equipo de braquiterapia HDR de forma regular. Consulte la información detallada sobre el procedimiento de respuesta en caso de emergencia en el capítulo 5 “Procedimientos de emergencia” en las *Instrucciones de uso de BRAVOS*.

1 Pulse el interruptor de parada de cierre de la consola de la sala de control

Lugar: sala de control	Dispositivo: consola de la sala de control	
Acción:	Resuelto:	No resuelto:
		
1. Pulse el interruptor de parada de cierre de la consola de la sala de control (CRC) o un interruptor de parada de cierre independiente opcional. 2. Verifique que el indicador luminoso de la opción Fuente dentro del blindaje de la CRC esté encendido (ON) y que el indicador de radiación esté apagado. Si el problema se ha resuelto, deténgase aquí. 3. Si el cable de la fuente no se retrae totalmente en el contenedor de seguridad apantallado, tome las medidas correctivas necesarias, libere el interruptor de parada de cierre y vuelva a presionarlo. Repita hasta dos (2) veces, si es necesario, hasta que el cable de la fuente se retraiga por completo. 4. Verifique que el indicador luminoso de la opción Fuente dentro del blindaje de la CRC esté encendido (ON) y que el indicador de radiación esté apagado.		
Si el problema “no se ha resuelto”, continúe con el siguiente paso:		

Clave para los gráficos



Parada



Fuente dentro del blindaje



Radiación (CRC)



Radiación (equipo de carga diferida)

2 Pulse el botón de parada del equipo de carga diferida

Lugar: sala de tratamiento	Dispositivo: equipo de carga diferida	
Acción:	Resuelto:	No resuelto:
		
1. Entre en la sala de tratamiento con un detector de radiación portátil y dosímetro personal. 2. Tome las medidas correctivas oportunas y pulse el botón de parada del equipo de carga diferida. 3. Verifique que el indicador luminoso Fuente dentro del blindaje del panel de visualización del equipo de carga diferida esté encendido y que el indicador de radiación esté apagado. 4. Si es necesario, tome las medidas correctivas oportunas y pulse de nuevo el botón de parada del equipo de carga diferida.		
Si el problema “no se ha resuelto”, continúe con el siguiente paso:		

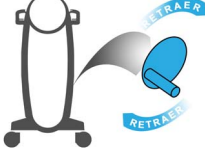


Equipo de carga diferida



Manivela

3 Retraiga el cable de la fuente usando la manivela de emergencia

Lugar: sala de tratamiento	Dispositivos: equipo de carga diferida, detector de radiación	
Acción:	Resuelto:	No resuelto:
		
1. Tome las medidas correctivas oportunas. Tire del asa de la manivela hacia fuera y gírela en el sentido de la flecha hasta que note una resistencia marcada y el nivel de radiación de la sala haya descendido a un valor seguro. 2. Verifique que el indicador de radiación esté APAGADO y que el nivel de radiación en la sala sea seguro. Asimismo, el indicador luminoso de Fuente dentro del blindaje del panel de visualización del equipo de carga diferida debe estar ENCENDIDO.		
Si el problema “no se ha resuelto”, continúe con el siguiente paso:		

(Vaya a la página siguiente)



Detector de radiación

4 Si es posible, extraiga el aplicador del paciente (de lo contrario, continúe con el paso 5)

Lugar: sala de tratamiento	Dispositivos: aplicador, pinzas, contenedor de emergencia, detector de radiación	
Acción:	Resuelto:	No resuelto:

1. Abra el contenedor de emergencia.

2. Extraiga el aplicador del paciente utilizando las pinzas de mango largo, si es posible. Manténgase a la máxima distancia posible del paciente y el equipo de carga diferida.

3. Ponga el aplicador en el contenedor de emergencia. No dañe ni doble el tubo de guía de transferencia.

4. Traslade al paciente a la entrada de la sala de tratamiento y mida sus niveles de radiación.

5. Si la medición confirma que la fuente ya no está en el interior del paciente, asegure la puerta de la sala de tratamiento y comuníquese de inmediato con el responsable de seguridad radiológica.

6. Si la revisión del paciente indica que la fuente sigue dentro del paciente, será necesario extraerla mediante un procedimiento quirúrgico de emergencia. Si se retiró quirúrgicamente, la fuente debe almacenarse en el contenedor de emergencia.

Si el problema “no se ha resuelto”, continúe con la extracción quirúrgica de la fuente.

Clave para los gráficos

Aplicador

Contenedor de emergencia

Paciente

Cabezal de posicionamiento

Fuente

5 Tirar del cable de la fuente hacia fuera del aplicador

Lugar: sala de tratamiento	Dispositivos: aplicador, cable de la fuente, pinzas, contenedor de emergencia, detector de radiación	
Acción:	Resuelto:	No resuelto:

1. Abra el contenedor de emergencia.

2. Desconecte todos los conectores de los tubos de guía de transferencia del cabezal de posicionamiento.

3. Tire del equipo de carga diferida para alejarlo del paciente o maniobre el tubo de guía de la fuente hasta que el cable de la fuente quede visible en el cabezal de posicionamiento.

4. Con ayuda de las pinzas, agarre el cable de la fuente y tire del mismo hasta extraerlo por completo del aplicador y/o del tubo de guía de transferencia.

5. Coloque inmediatamente el extremo activo del cable de la fuente en el contenedor de emergencia.

6. Traslade al paciente a la entrada de la sala de tratamiento y mida sus niveles de radiación.

7. Si la medición confirma que la fuente ya no está en el interior del paciente, asegure la puerta de la sala de tratamiento y comuníquese de inmediato con el responsable de seguridad radiológica.

8. Si la medición indica que la fuente todavía está en el interior del paciente, traslade a la persona nuevamente a la sala de tratamiento y extraiga cualquier aplicador que esté presente.

9. Después de extraer el aplicador, mida los niveles de dosis del paciente para asegurarse de que la fuente ya no esté dentro del paciente.

10. Si la revisión del paciente indica que la fuente sigue dentro del paciente, será necesario extraerla mediante un procedimiento quirúrgico de emergencia. Si se retiró quirúrgicamente, la fuente debe almacenarse en el contenedor de emergencia.

Si el problema “no se ha resuelto”, continúe con la extracción quirúrgica de la fuente.

Póngase en contacto con Varian en [MyVarian.com](https://myvarian.com) lo antes posible después de cualquier tipo de respuesta de emergencia que involucre al sistema del equipo de carga diferida BRAVOS. Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el sistema del equipo de carga diferida BRAVOS deberá notificarse también al fabricante y a las autoridades competentes del estado miembro en el que el usuario o el paciente estén establecidos.