

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

Encendido del equipo

1) Desconecte la unidad FDR Go Plus de la toma de corriente.

a) Todas las luces indicadoras de estado en el panel de control de rayos X se apagarán.

2) Gire el interruptor de encendido a la posición ON

Se activará el indicador de batería en el panel de control de rayos X.



Battery Level


3) Seguridad PID

a) Si la seguridad PID está activada, ingrese la contraseña.

b) Al ingresar con éxito, el proceso de arranque continuará.

Se liberan los bloqueos del sistema y la unidad está lista para ser conducida y manipulada.

4) Presione el botón DR

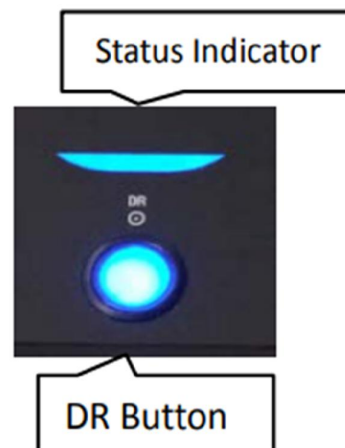

a) El botón DR se volverá azul cuando se active.

b) El software de la consola FDX se iniciará automáticamente.

c) Si la seguridad está activada, ingrese el Nombre de usuario y la Contraseña.

d) La luz indicadora de estado se iluminará cuando se complete el inicio.

5) calentamiento del tubo

El calentamiento del tubo es un procedimiento recomendado.

Procedimiento de calentamiento del tubo

a) Cambie el sistema al modo de radiografía en cassette presionando el botón hasta que el LED verde ilumina.

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS



Protocolo de calentamiento del tubo:

Se deben realizar 3 disparos realizando variación de KV en 80,90 y 100.

b) Presione el botón Cero [0] en el teclado numérico hasta que el LED verde se ilumine luego de esto el sistema cambiará al modo de calentamiento del tubo.

c) En la Pantalla de calentamiento del tubo se evidencian estos valores:

i) 50 - N1

50: visualización inicial de KV

N1: determina el número de exposiciones.

Este es el valor predeterminado cuando se utiliza el Procedimiento de calentamiento del tubo 1.

d) [tUbeUP]

a) El sistema está configurado para el modo de calentamiento del tubo.

e) Botón de modo de radiografía CR: activo.

f) Botón Cero [0]: activo



a) Cierre las cuchillas del colimador.

b) Ajuste el KV a 80.

c) mAs: N1 (no modificar)

d) Hacer la primera exposición.

i) La pantalla KV parpadeará durante unos segundos y cambiará a 90 KV.

ii) Espere 60 segundos entre exposiciones.

e) Repita el proceso hasta alcanzar el KV deseado.


f) Salga del modo de calentamiento del tubo presionando un número de Teclado entre [1] y [9].

g) [tUbeUP] se borra de la pantalla de la consola y el sistema cambia al modo Radiografía de cassette.

h) Al registrar un menú, el sistema volverá al modo DR normal.

Flujo de trabajo

a) Registre un estudio del paciente desde la pantalla RIS.

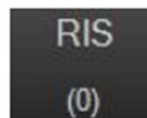

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

b) Seleccione el menú de exposición requerido. Los valores de KV y mAs se registrará en el panel de control de rayos X.



c) Preparación para la exposición

(1) Preparación de rayos X:

(a) Presione el interruptor de mano al primer nivel.

(i) Los indicadores azules parpadeantes en el panel de control de rayos X, la columna del tubo y el interruptor manual se volverán verdes.

(b) Asegúrese de que la luz de exposición lista sea verde.



d) Exposición Completa.

(1) Presione el interruptor de mano al nivel final.

(a) En el momento de la exposición, la lámpara de exposición a rayos X se iluminará y se escuchará un pitido.

(b) Los indicadores KV y mAs parpadearán durante (5) segundos.

(c) El valor de Dosis se mostrará en el Panel de control de rayos X.



e) Finalización y distribución del estudio.

(1) Seleccione el botón Examen completo para enviar el estudio a PACS



Procedimiento de apagado

1) Apague el software de la consola FDX



a) El botón DR se apagará cuando se complete el proceso de apagado.

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

b) Gire el interruptor de encendido a la posición OFF y enchufe la unidad.


c) La carga del sistema se iniciará en función de los requisitos de carga.

Procedimiento de Carga

Esta sección es una revisión de las opciones de carga disponibles.

a) Carga automática

Cuando la unidad está conectada a una toma de corriente con el interruptor de llave configurado a la posición ON, se producirá una carga automática del sistema.

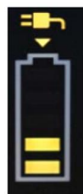

Charging Indicator

(1) Procedimiento:

(a) Conecte la unidad a una toma de corriente.

(b) La carga automática comenzará a la hora programada.

(c) La carga del sistema se indica mediante indicadores de carga parpadeantes en la columna del tubo.

(d) El indicador de batería en el panel de control de rayos X se encenderá entre 1 y 5 barras hasta alcanzar el nivel de carga del 90%.

b) Carga manual

Este procedimiento es el método más eficiente para restaurar el sistema a carga completa.

(1) Procedimiento:

(a) Apague la consola y espere a que el botón DR se apague.

(b) Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado.

(c) Conecte la unidad a una toma de corriente.

(d) Cuando se requiere cargar, se producirá la siguiente actividad:

(i) Indicadores de estado azules en el panel de control de rayos X y el tubo la columna comenzará a parpadear.

(ii) El indicador de batería alternará continuamente entre 1 y 5 barras.

(e) Cuando se haya alcanzado el nivel de carga del 90% o más, el indicador de nivel de batería mostrará (5) barras sólidas.




Battery Charge Level
90% or higher

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

Indicadores de nivel de carga FDR Go Plus

a) Indicador de carga baja

(1) Se iniciará el CHRG (Lámpara de notificación de batería baja) parpadear cuando el indicador de batería está en la última barra.

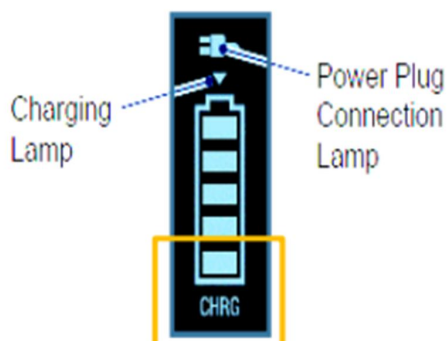

b) Indicador de carga (90%)



(1) El indicador de batería muestra (5) barras sólidas, que indican la batería está cargada al 90% o más.

(2) Todos los indicadores de estado parpadeantes están apagados.

c) Indicador de carga completa (100%)

(1) La lámpara de carga se ilumina cuando la batería el nivel de carga alcanza el 100%.



d) Sin carga del sistema (el nivel de carga de la batería no muestra barras) si no hay indicadores visibles del nivel de batería se recomienda iniciar la carga.

Las duraciones de carga son las siguientes:

- (1) 5 horas = 90% de carga.
- (2) 8 horas = 100% de carga.
- (3) La carga se detiene automáticamente después de 10 horas continuas.



Función de radiografía adicional

Después de que el indicador de batería deje de parpadear y si se necesitan radiografías adicionales son posibles aproximadamente 10 exposiciones más, cuando los parámetros de radiografía están configurados en Radiografía de tórax general.

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

1) Procedimiento:

a) Gire el interruptor de llave a la posición de apagado.

b) Gire el interruptor de llave nuevamente a la posición ON mientras presiona el botón de configuración del usuario.



c) Cuando el LED parpadea en el indicador de batería, la radiografía es posible realizarla.

d) Cuando el sistema se carga y reinicia, la conexión automática a la batería primaria ocurrirá.

Modo de radiografía DR Long Time.

Con esta opción, las técnicas se pueden ajustar por encima del rango programado.

a) Seleccione un menú de exposición registrado.

b) Seleccione y mantenga presionado el botón mAs durante (3) segundos continuos.

El modo de radiografía DR Long Time se activa cuando el LED se ilumina.



c) Establezca los parámetros preferidos de KV y mAs.

d) Máximos mAs disponibles: 320 mAs @ 40-65 KV.

e) KV máximo: 133KV @ 140 mAs.

f) Al registrar un nuevo menú, el modo DR Radiografía de larga duración se desactiva.

El botón LED verde está apagado.

Modo de radiografía en cassette

Esta opción se utiliza para activar la radiografía de cassette CR.

1) Presione el botón del modo de radiografía en cassette durante (3) segundos.



El LED en el botón del modo Radiografía de cassette se ilumina y el sistema cambia al modo de radiografía de cassette.

2) Las siguientes pestañas se resaltan automáticamente:

Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

a) 40 KV @ 0.32 mAs (pantalla predeterminada de KV y mAs)

b) Punto focal pequeño

c) Modo de radiografía en cassette

d) Teclado # 1.



3) Ajuste los parámetros KV y mAs.

4) Preparar y completar la exposición.

5) El sistema volverá al modo de funcionamiento normal al seleccionar un Menú de exposición.


El indicador LED verde se apagará.

Recorrido del sistema (pérdida de potencia)

Cuando la alimentación del sistema no está disponible, los bloqueos del sistema no se activan. Para mover la unidad, se requiere el siguiente procedimiento.

1) Procedimiento:

a) Presione el botón de parada de emergencia.

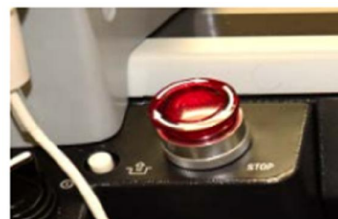

b) Mantenga presionado el botón de liberación de emergencia.



c) La unidad se puede mover con seguridad agarrando la empuñadura.

d) Cuando se suelta el botón de liberación de emergencia, el sistema las cerraduras se activarán, restringiendo el movimiento del sistema.

Seguridad del sistema


1) Para mover la unidad, sujete firmemente la barra de agarre con ambas manos y luego avance.

2) No mueva el sistema sobre escalones o desniveles de más de 2 cm, o pendientes de más de 7 grados, siempre pare el sistema en una superficie nivelada y evitar superficies inclinadas.

3) No coloque las manos sobre la cubierta de retención de la barra mientras sostiene la barra de agarre.


Guía Rápida Equipo Portátil Rayos X FDR Go PLUS

Si sostiene la barra de agarre mientras coloca la mano sobre la cubierta, se puede aplicar una fuerza hacia la parte trasera, haciendo que el sistema móvil se acelere repentinamente y avance.

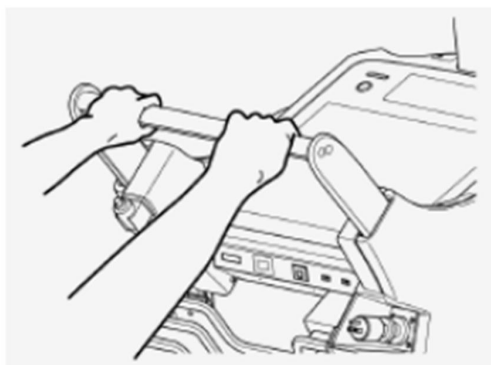


Colimador de Rayos X

Al girar el mando aumenta o disminuye el tamaño de la posición en el campo de irradiación de rayos-X. El mando tiene un indicador del grado de apertura, lo que le permite ver el tamaño del campo de irradiación de rayos X en-fuente-piel a distancias de 1 m, 1,5 m, y 2 m.

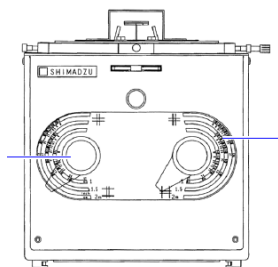

Lámpara de proyección del campo de irradiación

Al pulsar el interruptor de la lámpara se iluminará la lámpara de proyección del campo de irradiación.

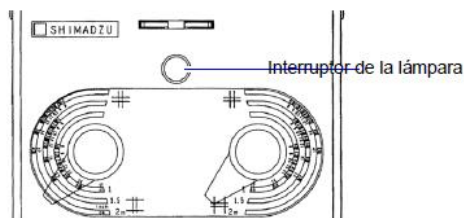

La lámpara de proyección del campo de irradiación se enciende durante unos 30 segundos y luego se apaga automáticamente.

Si se pulsa el interruptor de la lámpara durante 1 segundo, mientras que la lámpara de campo de irradiación está encendida, la lámpara se apagará.

IMPORTANTE: Consultar el Manual o Guía de Operación para conocer más información respecto al uso apropiado del equipo.