 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CENTRO CARDIOVASCULAR	 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES UAM	 Instituto Tecnológico DE ALTA CALIDAD	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
			MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
			MODELO: MCARE300	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo que detecta, procesa y muestra los parámetros fisiológicos de un paciente conectado a éste, en este caso. Este monitor multiparámetros entrega señal de ECG de 5 y 3 derivaciones, Respiración, Sensor de SpO2, 2 Canales de temperatura, NIBP, 1 Canal de IBP, 1 Canal de Capnografía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Mantener conectado el equipo a la red eléctrica
- Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Tener en cuenta los canales que estén activados para evitar confusiones en la temperatura y presión.

PARTES DEL EQUIPO

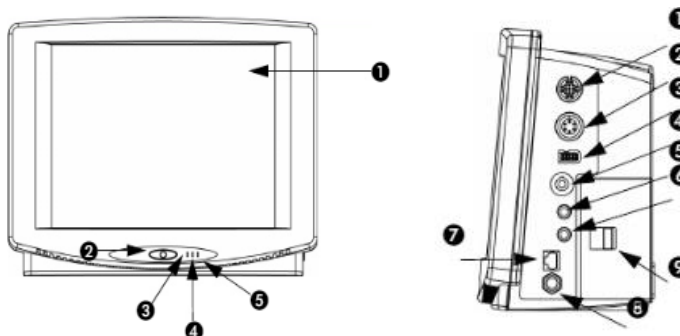

Partes del equipo delanteras:

1. Pantalla Táctil LCD
2. Botón de encendido y apagado
3. Indicador de conexión a la red eléctrica
4. Indicador de carga de la batería
5. Indicador de carga de la batería completa o media

Partes del equipo laterales/ Accesorios:

1. Conexión para el accesorio de ECG
2. Conexión para el accesorio de IBP
3. Conexión para el accesorio de SpO2
4. Conexión para el accesorio de Capnografía Co2
5. Conexión para el accesorio de Temperatura 1
6. Conexión para el accesorio de Temperatura 2
7. Conexión para el TCP
8. Conexión para el accesorio de NIBP
9. Cubierta de la batería


MODOS DEL MONITOR

MODO ECG:



1. Examine la piel del paciente. La piel debe estar limpia y sin vello.
2. Ubique los electrodos en el paciente.
3. Conecte el cable paciente a los electrodos y al monitor
4. Encienda el monitor y verifique la correcta monitorización.
5. Si es necesario, modifique desde el monitor la derivación del ECG:

[Menú] [Parámetros de ECG] [Otros]
y seleccione la derivada correspondiente y aceptar configuración

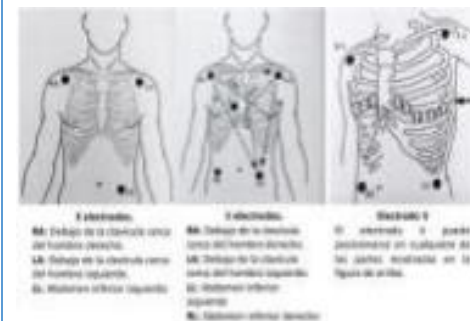

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	CÓDIGO: NA
MARCA: SPACELABS	VERSIÓN: 1
MODELO: MCARE300	FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

MODO SP02:



1. Seleccione el sensor de oximetría adecuado para la entrada del monitor
2. Ubique el sensor en el dedo del paciente
3. Conecte el accesorio al monitor y verifique la correcta monitorización del paciente.

MODO TEMPERATURA:



1. El monitor viene con un accesorio en forma de moneda de acero inoxidable el cual se coloca sobre la superficie del cuerpo.
2. El monitor cuenta con dos entradas de temperatura, conectar debidamente el cable al monitor en la entrada deseada y configurar las entradas desde el menú del monitor.
3. Ubicar el sensor firmemente en el cuerpo del paciente.
4. Revisar desde el menú la configuración de las alarmas sobre temperatura para adaptarlas al paciente.
5. En tal caso de que la temperatura se encuentre en grados Fº desde el menú se puede modificar la unidad de medida.

MODO NIBP:



El monitor cuenta con diferentes modos para la toma de presión, con el modo manual, con el modo automático de seguimiento, y modo IBP:

MODO MANUAL:

1. Encendemos el monitor.
2. Conectamos la válvula de aire con el manguito de presión arterial
3. Confirmamos que el brazalete se encuentra completamente desinflado y conectamos al monitor
4. Presionamos el botón de NIBP y esperamos que inicie la toma de medida.

MODO AUTOMÁTICO: Se configura directamente desde el menú, y lo iniciamos cuando necesitamos señales de monitoreo continuo, este puede configurar para que tome medidas de presión cada cierto tiempo establecido y esta toma se guardan en el historial del monitor.



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Hora de medida | 5. Presión promedio |
| 2. Modo medida | 6. Unidad de medida |
| 3. Límites de alarma | |
| 4. Presión sistólica/Presión diastólica | |

MODO IBP:



1. Seleccionar en el monitor la opción de IBP
2. Preparar el envase con el transductor para la debida conexión.
3. Montar adecuadamente el transductor aplicando suero fisiológico y retirando debidamente el aire del sistema
4. Después de realizar la punción de la línea arterial, conectar al paciente con el cable de IBP suministrado.
5. Poner en cero el sistema de la línea arterial
6. Ajustar en cero el sistema accediendo por el menú
7. Verificar la curva inicial de monitoreo

MODO CAPNOGRAFÍA:

Cuando el accesorio de Co2 sera utilizado por primera vez en el monitor se debe realizar una calibración inicial y también de manera periódica se debe ajustar a cero de la sig. Manera:

Para efectuar una calibración a cero de referencia:

- Toque **EICO₂** en la zona de ondas o en la zona numérica.
- Toque **Cero**. Aparece el mensaje *Calibración a cero de la presión en curso* en la zona de mensajes.

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

CÓDIGO: NA

MARCA: SPACELABS

VERSIÓN: 1

MODELO: MCARE300

FECHA DE ELABORACIÓN: 03/10/2022

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES

El monitor no enciende		Compruebe si el cable de poder está conectado a la energía y debidamente al monitor.
Uno o varios de los botones del monitor no sirven		Trate de mantener el botón presionado durante 30 segundos, si sigue sin funcionar Comuníquese con el personal de mantenimiento biomédico.
La toma del NIBP no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos		Verifique el brazalete de presión no tenga ninguna fuga, verifique que la manguera se encuentre colocada correctamente.
La toma del IBP no me entrega ningún valor ni se ve la gráfica en el monitor		Intentar cambiar cable del IBP y ajustar a cero nuevamente, en caso de no funcionar. Comuníquese con mantenimiento.
La toma del SP02 no me entrega ningún resultado o entrega valores incorrectos		Verifique que el LED del señor de oximetría este encendido, sino comuníquese con el personal de mantenimiento.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.


PASOS DE OPERACIÓN DEL MONITOR

1. Verifique que el monitor esté conectado a la red eléctrica.
2. Encienda el monitor.
3. Realice la conexión de los accesorios a utilizar para el monitoreo.
4. Decida que variables quiere monitorear.
5. Chequee que el cable paciente y sensores son correctos, y verifique si el monitor inicia a monitorizar correctamente.

ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO

1. Si el monitor presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento.
2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo.
3. Si sospecha que el monitor no funciona correctamente, no lo utilice para ningún tipo de procedimiento o monitorización de un paciente.
4. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una fuente con polo.

1. Realizamos el ajuste a cero del sensor
2. Se debe conectar una cánula nasal/ oral
3. Se debe conectar una celda de muestreo colocada en uno de sus extremos que se enchufa en el receptáculo del monitor mCare para el sensor de flujo lateral
4. El otro extremo de la línea se conecta al paciente mediante un conector en T como se muestra en la figura 3.
5. Finalmente, se conecta el módulo de Co2 al monitor.

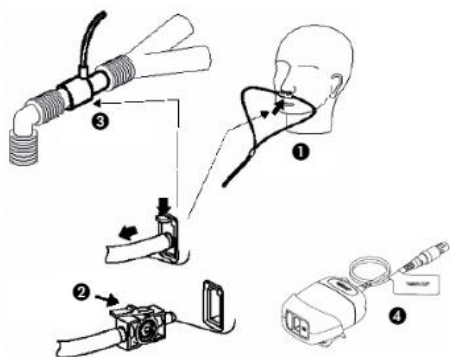

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de Alto riesgo.