


PUESTA EN MARCHA

7000 mesas de operaciones requieren una serie de 110, o 220VAC, 50/60Hz energía eléctrica. Una residencia 6 amperios (por 110VAC) o 3 amperios (por 220VAC) fusibles se encuentran en el panel de fusibles.

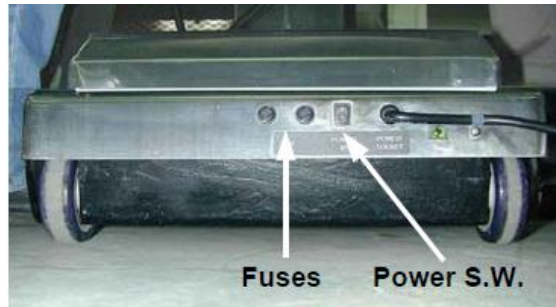

1.3 CONEXIÓN ENTRE LOS CONTROLES / MANO PIE Y DE LA MESA

Antes de conectar la mano y / o controles de pie, se aseguró de las tomas 『toma macho』 y / o controles de pie encaja en 『la toma hembra』 situado en la cabeza de la columna. Después de la inserción plena y seguro el anillo exterior del conector hacia la derecha para completar la conexión.




SECCIÓN 2: INSTRUCCIONES DE USO

2.1 AJUSTE POR CONTROL DE LA MANO

El mando tiene un gancho de clip en la parte posterior del control. Esto permite el almacenamiento del control en los carriles laterales de la mesa. El sistema de control utiliza microprocesadores ubicado en la base de la mesa de control de todas las partes eléctricas y funciones. Para proteger contra accionamiento accidental de la mesa durante un procedimiento quirúrgico, la postura ajuste es necesario **presionando el botón ON / OFF de antemano a continuación la mesa de operaciones**

se puede ajustar la postura de 30 segundos de operación de tiempo válido. Los 30 segundos tiempo de validez se extenderá al pulsar los botones. Todas las teclas de función son internacionalmente reconocidos símbolos y el nombre en Inglés de todas las funciones que permiten una fácil identificación.

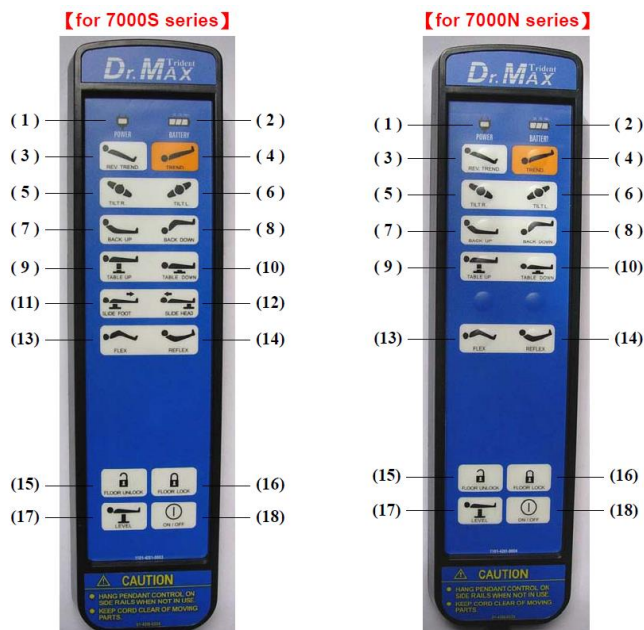

BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO


- (1) LED de alimentación de la red
- (2) segmentos de LED para la carga de la batería
- (3) Trendelenburg
- (4) Trendelenburg
- (5), inclinación lateral derecho
- (6), inclinación lateral izquierda
- (7) una copia de seguridad
- (8) Rompiendo las reglas
- (9) de sobremesa hasta interruptor de alimentación
- (10) Mesa de Down
- (11) Slide a pie
- (12) Slide a la cabeza
- (13) Flex
- (14) Reflex
- (15) Planta de Liberacion
- (16) Planta de cierre
- (17) Nivelación automática de mesa
- (18) (ON / OFF)

Precaución:

1. Los símbolos reconocidos por todas las funciones en el control de la mano son determinados por de pie en la cabecera de la mesa y la cara hasta los pies de gama.
2. Al pulsar dos botones funcionales diferentes al mismo tiempo, el control de mano se bloqueará y congelar todas las operaciones de forma automática, a menos que, el 『botón ON / OFF es』 presiona para reiniciar el sistema.

2.4 ENERGÍA ELÉCTRICA.

1. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica adecuada.
2. Encienda el interruptor de alimentación de la base de la mesa.
3. Pulse el interruptor de encendido en el control de la mano para estar listo para la operación

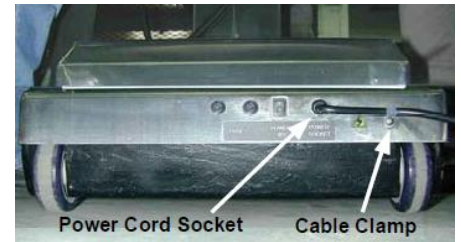

Precaución:

1. Siempre fije el cable de alimentación con la abrazadera del cable para evitar daños como resultado de disparo del equipo quirúrgico.
2. Compruebe siempre el LED iluminado o no, si el LED de alimentación se aligerado, a continuación, los botones funcionales pueden ser operados directamente!

2.5 BLOQUEO Y DESBLOQUEO


1. Pulse el 『ON / OFF』 botón para iluminar el LED de alimentación, luego presionar el PISO 『 LOCK 』 『 o ningún botón postura 』 para iniciar la planta de electro-hidráulico cerraduras en la base de la mesa.
2. Pulse el 『ON / OFF』 botón y luego presionar el botón de desbloqueo 『 』 para desbloquear.

2.6 MESA ARRIBA

Para levantar la mesa, pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar los botones.

2.7 MESA ABAJO

Para bajar de la mesa, pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar los botones.

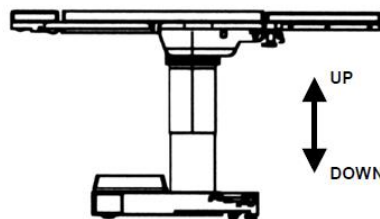


2.8 Trendelenburg

Para colocar la mesa en posición de Trendelenburg (cabeza hacia abajo), pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsando los botones.


ATENCIÓN:

Los símbolos reconocidos por todas las funciones en el control de la mano son determinados por pie en la cabecera de la mesa y de cara al final del pie

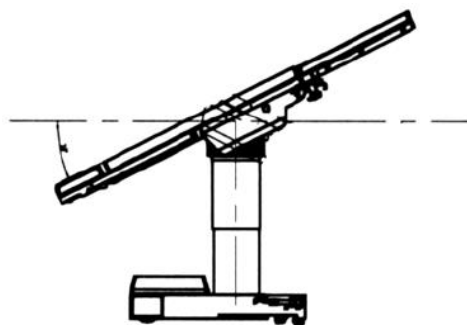

2.9 Trendelenburg INVERTIDO

Para colocar la mesa en un reverso Posición de Trendelenburg (cabeza abajo), pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar el botones.

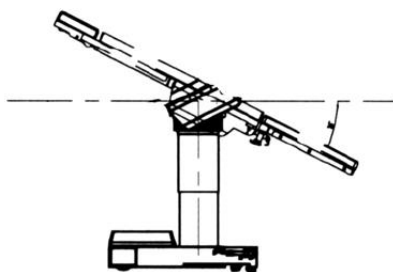


2.10 Inclinación lateral – DERECHO

Para llegar a la inclinación lateral derecho (visto desde cabecera lado), pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsando los botones.


ATENCIÓN:

Los símbolos reconocidos por todas las funciones del control de mano están determinados por pie en la cabecera de la mesa y frente a el pie de fondo.

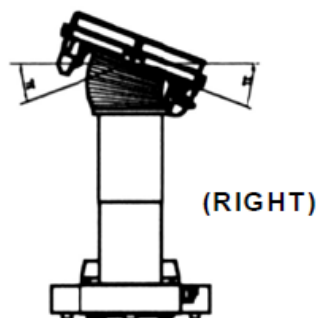


2.11 INCLINACIÓN LATERAL - IZQUIERDA

Para llegar a la inclinación lateral izquierdo (visto desde la cabecera lado), pulse el 『ON / OFF』 a continuación, presione el botón los botones.

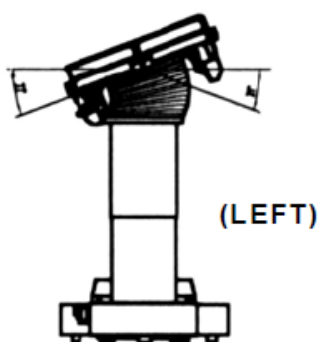


2.12 PLACA DE COPIAS DE SEGURIDAD DE

Para elevar la sección trasera (vista desde cabecera lado) 『pulse el botón ON / OFF』 a continuación, pulsar los botones.

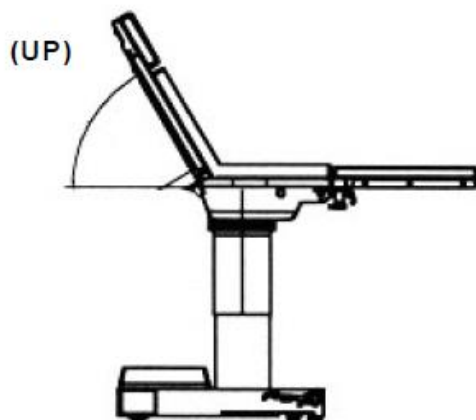

2.13 PLACA VOLVER HACIA ABAJO

Para bajar la sección de la espalda (como se ve desde cabecera lado), pulse el 『botón ON / OFF』 a continuación, pulsar los botones.

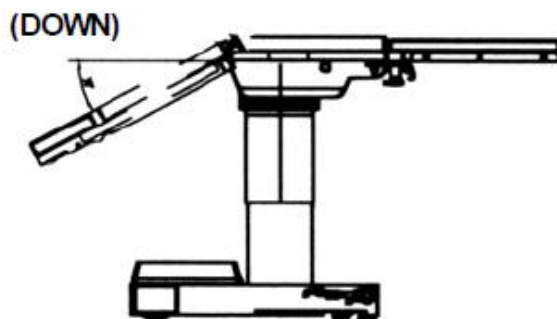


2.14 CORREDERAS CON EL JEFE FINAL (serie 7000S solamente)

Para deslizar la mesa a lado de la cabeza, pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar los botones.


2.15 CORREDERAS DE PIE FINAL (7000S series)

Para deslizar la mesa al lado de los pies, pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar los botones.

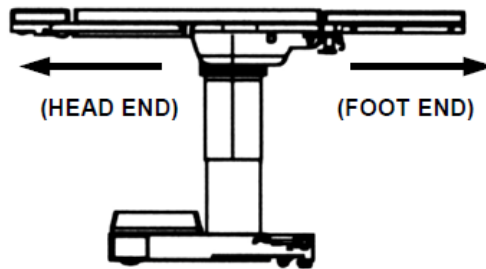


2.16 FLEX (RIÑÓN / ELEVACION vesicula biliar)

Controles pre-programadas las funciones 『inversa Trendelenburg y 『』 atrás alternativamente hasta que un ^ posición de flexión se consigue, pulse el 『ON / OFF』 botón y luego pulsar los botones

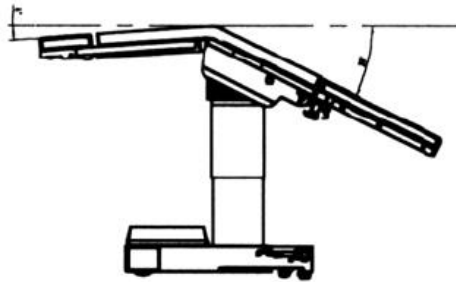

2.17 REFLEX

Controles pre-programadas las funciones 『』 y vuelta 『』 Trendelenburg alternativamente hasta que un reflejo ∨ se alcanza la posición, pulse el 『botón ON / OFF』 presionando los botones.

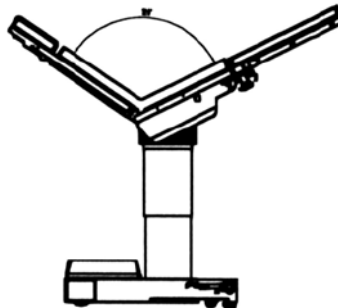


2.18 NIVELACIÓN MESA AUTOMÁTICO

Cancelación de la pre-programados de Trendelenburg / inversa inclinación Trendelenburg, lateral y ajuste de la placa trasera.



☉flexión:

Al apretar el gatillo de flexión en el conjunto de placas de la pierna hacia afuera y levante ligeramente en la placa de la pierna de lado por ferrocarril, la embrague se afloja. Y el individuo la placa se puede ajustar verticalmente.

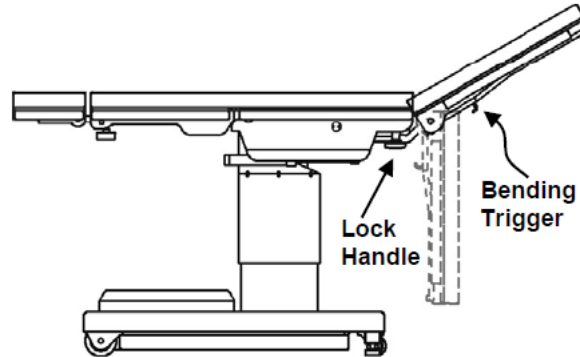

☉apertura y distanciamiento:

Para cambiar la posición de la sección de las piernas en posición horizontal, afloje el mango de bloqueo en un contrato de arrendamiento gire hacia la izquierda. La placa de la pierna de división (s) también permiten a separarse girando el mango de bloqueo en las curvas a la izquierda de arrendamiento de cinco años, levantando la placa de la pierna y sacar la placa de la pierna en posición horizontal. Para colocar la placa de la pierna (s), siga los últimos procedimientos con versiones anteriores y apriete el mango de fijación.

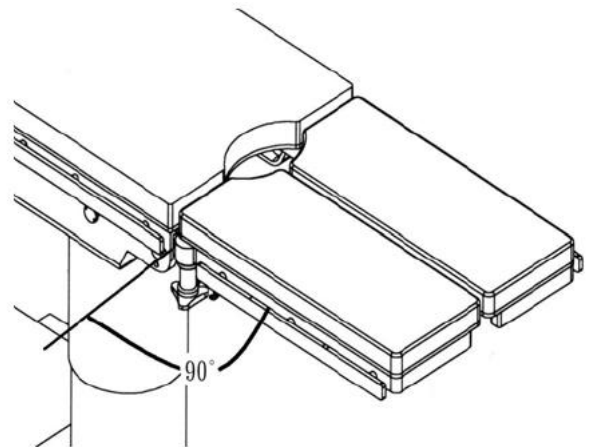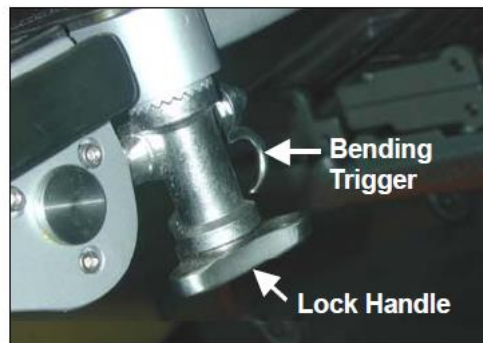


2.22 APOYACABEZAS

1. Una barra de lanzamiento rápido posicionamiento encuentra por debajo y al frente de la reposacabezas se utiliza para subir o bajar el resto cabeza. Tire de la barra hacia el extremo de la cabeza para permitir que el

sección para moverse hacia arriba o hacia abajo. Posicionamiento de 60 ° por encima horizontal a 90 ° debajo de la horizontal en Incrementos de 15 ° está disponible.

2. Suelte la barra para bloquear el reposacabezas en su posición. El resto de la cabeza puede ser quitada aflojando el bloqueo mando y tirar de ella hacia fuera de la placa trasera.

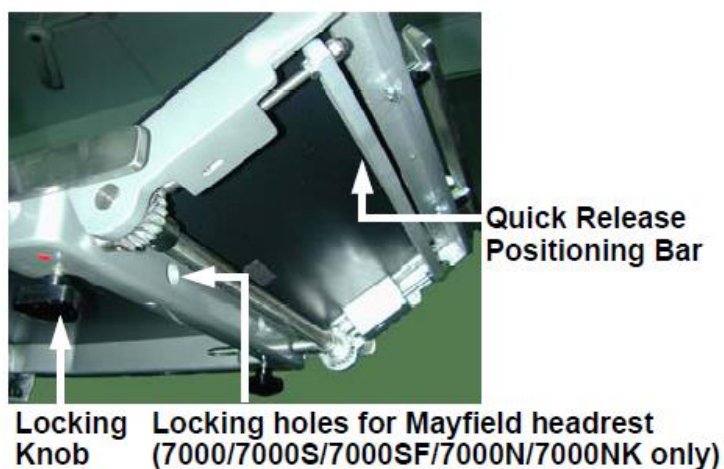


2.23 CONSEJOS ARM

1. Reposicionamiento: Tirando de la palanca de parada para ajustar posición horizontal de hasta 180 °.



1. Eliminación:

El posicionamiento de la fijación de la manija, el brazo bordo será removido de un lado-rail.

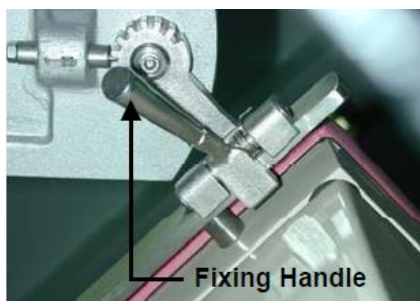

2.24 PLANTA DE AUMENTO DE EMERGENCIA DESBLOQUEAR EL DISPOSITIVO

1. Gire el piso de anulación de emergencia 『』 desbloqueo del dispositivo la izquierda para desbloquear la planta de electro-hidráulico cerraduras.
2. Gire el piso de anulación de emergencia 『』 desbloqueo del dispositivo hacia la derecha con cuidado y completamente para apretarlo.

Precaución:

El 『electro-hidráulico de piso de bloqueo del sistema』 no función, si la anulación de emergencia 『piso Desbloquear』 El dispositivo no está cerrado cuidadosamente y completamente.




©Después del uso de la 『Piso de anulación de emergencia desbloqueo del dispositivo, los pasos siguientes por hacer para restablecer el sistema de mesas.

1. Pulse el 『botón ON / OFF』 (La ronda será la luz verde intermitente indica), a continuación, Desbloquear de prensa 『』 para desbloquear los 2 bloqueos piso electro-hidráulicos. Atención: A pesar de las cerraduras del piso electro-hidráulicos han sido desbloqueados, eléctricos control de desbloquear el piso 2 electro-hidráulico a través de los bloqueos de control de la mano debe por hacer.
2. Pulse el 『botón ON / OFF』 (La ronda será la luz verde intermitente indica), a continuación, pulse 『』 cualquier botón de función del ajuste de mesa para bloquear el 2 electrohidráulico cerraduras del piso.

PRECAUCIONES

1. No coloque el soporte de Brazo sobre los rieles laterales cuando se use el movimiento de espalda, flex o réflex, no sobrepase la línea horizontal de la mesa.

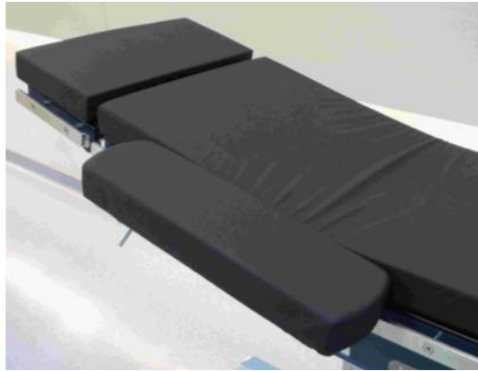

2. No utilice base de columna de la mesa para el almacenamiento.



3. No se sienta en los soportes de pierna puede causar ruptura de la pieza, peso máximo carga 40 kg (88 libras) cada uno. Cuando los soportes estén abiertos abiertas más de 45 sólo cargar bajo 20 kg

