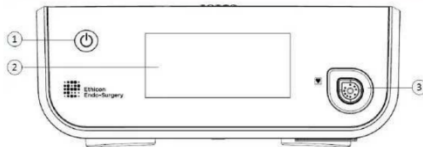
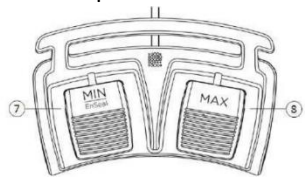


	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: GENERADOR ARMÓNICO	CÓDIGO: NA
	MARCA: ETHICON	VERSIÓN: 1
	MODELO: GEN11	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO   Dispositivo de tipo bisturí ultrasónico para tejidos blandos, encargado de cortar y coagular con un mínimo daño mediante la utilización de una hoja vibrante. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  • Frecuencia oscilante de 55,5 KHz • Temperatura de operación hasta 100C • Modos de operación de: Corte puro, corte-coagulación, coagulación bipolar y microbipolar • Potencia máxima de salida de 300V • Almacenamiento de hasta 200 programas CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  Clasificación IIB de alto riesgo.	PARTES DEL EQUIPO  1. Botón de ON/OFF 2. Pantalla táctil del equipo 3. Conexión del generador  4. Conexión de cable AC 5. Conexión de interruptor de pedal 6. Ecualización de potencial  7. Alimentación mínima de armónico 8. Alimentación máxima de armónico LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO  Se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Prepare el paciente y realice la colocación de electrodos de retorno en la piel del paciente 2. Coloque el dispositivo de sellado en la unidad 3. Conecte los pedales en la parte trasera del equipo 4. Encienda el equipo del botón ON/OFF 5. Espere que el equipo realice la comprobación automática de funcionamiento 6. Seleccione que tipo de activación realizara si por pedal o de forma manual 7. Realice el corte o coagulación deseada 8. Ajuste los valores de potencia desde la pantalla táctil según sea necesario ALARMAS Y POSIBLES ERRORES  <table><tr><td>El generador esta sobrecalentado</td><td>Retire cualquier obstrucción de las tomas de aire del equipo</td></tr><tr><td>Relaje la presión de la cuchilla</td><td>Afloje la presión sobre el instrumento o cámbielo de colocación para que haya menos tejido en las palas</td></tr><tr><td>No queda ningún uso del mango transductor</td><td>Ha llegado a la vida final útil del accesorio, es necesario que este se reemplace</td></tr></table>	El generador esta sobrecalentado	Retire cualquier obstrucción de las tomas de aire del equipo	Relaje la presión de la cuchilla	Afloje la presión sobre el instrumento o cámbielo de colocación para que haya menos tejido en las palas	No queda ningún uso del mango transductor	Ha llegado a la vida final útil del accesorio, es necesario que este se reemplace
El generador esta sobrecalentado	Retire cualquier obstrucción de las tomas de aire del equipo							
Relaje la presión de la cuchilla	Afloje la presión sobre el instrumento o cámbielo de colocación para que haya menos tejido en las palas							
No queda ningún uso del mango transductor	Ha llegado a la vida final útil del accesorio, es necesario que este se reemplace							