


GUÍA MANEJO RÁPIDO MAQUINA TRIMA

Encendido Sistema Trima Accel

Después de haber enchufado el sistema Trima Accel a un toma corriente adecuado, pulse el interruptor situado en la parte superior del costado izquierdo del equipo

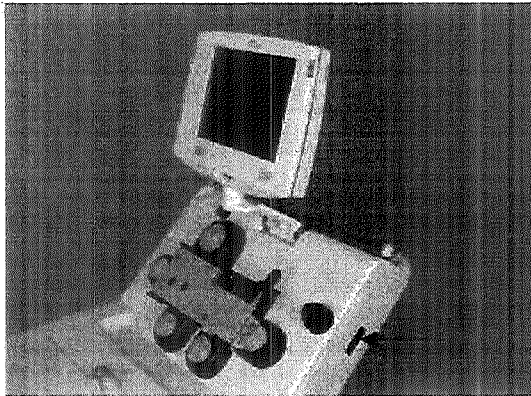

Apagado del Sistema Trima Accel

Para apagar el sistema pulse el interruptor situado en la parte superior del costado izquierdo del equipo. No apague el sistema mientras le muestre un mensaje que espere, ya que podría dañar el disco duro.

Aspectos Generales sobre el Sistema Trima Accel


El sistema Trima Accel emplea una centrífuga de flujo continuo para separar la sangre en los componentes individuales que forman parte de ella. La sangre completa se extrae del donante y se mezcla con el anticoagulante (AC). La sangre y el AC se bombean a un canal (un conducto de plástico que se asienta en una ranura especialmente diseñada del plato de separación de la centrífuga) y después giran a gran velocidad dentro de la centrífuga para que la sangre se separe en sus componentes. Las combinaciones de plaquetas, plasma y hematíes (glóbulos rojos) se recogen en bolsas y el resto de los componentes se devuelve al donante.

Botones e iconos

Los siguientes botones de las pantallas permiten que el usuario haga funcionar y ajuste el sistema Trima Accel:

	El botón Atrás le permite volver a la pantalla anterior. Está situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Este botón sólo está disponible cuando es seguro volver a la pantalla anterior.
	El botón Finalizar proceso detiene el procedimiento de recogida. En la mayoría de las pantallas aparece en la esquina superior derecha. • Si pulsa Finalizar proceso durante un procedimiento, el sistema Trima Accel le pedirá que confirme si desea terminarlo antes de empezar la devolución. • Si pulsa Finalizar proceso durante la devolución, el sistema Trima Accel le pedirá que confirme si desea interrumpir la devolución.
	El botón Finalizar adición , situado en la esquina superior derecha de las pantallas de suministro automático de la solución, detiene la distribución de la solución aditiva.
	El botón Parar , situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, detiene las bombas y la centrífuga.
	El botón Pausa , situado en la esquina inferior derecha de la pantalla, detiene las bombas mientras la centrífuga sigue girando. Después de pulsar el botón Pausa , tiene la opción de volver a la pantalla anterior o poner fin al procedimiento de recogida.
	Los botones de Reloj permiten ajustar el indicador de tiempo mostrado durante el procedimiento de recogida. Se puede ver la hora real o el tiempo transcurrido (duración).
	El botón Inf. donante muestra la pantalla Información del donante, donde se pueden cambiar los valores previos del hematocrito o hemoglobina y del recuento de plaquetas del donante durante el procedimiento de recogida.
	El botón Ajustar muestra la pantalla de Ajustes. En dicha pantalla puede ajustarse el flujo de extracción y retorno, así como realizar los ajustes necesarios en el sistema en caso de producirse reacción en el donante por el AC o de detectar agregación de plaquetas, aire en la línea de plasma o en la de plaquetas o desbordamiento de hematíes.
	El icono de Pulso cerrado indica que la presión de extracción está disminuyendo. Está situado encima del medidor de flujo de extracción y retorno en la pantalla de proceso, y aparece sólo cuando la presión de extracción es baja. Cuando vea este icono, pida al donante que apriete el pulso.
	El botón Procedir hace que aparezca la pantalla de Selección del procedimiento durante un procedimiento de recogida. Permite seleccionar un procedimiento alternativo.
	El icono de Gota verde , asociado con procedimientos de plasma y hematíes, se encuentra en la pantalla de Selección del procedimiento junto al volumen de hematíes. Indica que se necesita solución de reposición para un procedimiento en concreto.
	El icono de Lupa indica que el procedimiento puede requerir que mida el contenido de leucocitos en el producto de plaquetas, basándose en los parámetros del donante previamente introducidos. Tras el período de recogida, en las pantallas del resumen de final de proceso se ofrecen instrucciones para cualquier medición que se requiera.
	El icono "No conecte al donante" es una función de seguridad que aparece en la pantalla hasta que se muestra el botón Preparar al donante . Funciona como recordatorio de que no se debe conectar al donante antes de que el sistema lo solicite. Este icono también se muestra después de desconectar al donante y durante la configuración.
	El asterisco indica que el producto de plaquetas se configuró con una concentración que excede el límite de almacenamiento recomendado. Consulte los procedimientos operativos estándar de su centro sanitario en busca de instrucciones.


Partes Principales del Sistema Trima Accel

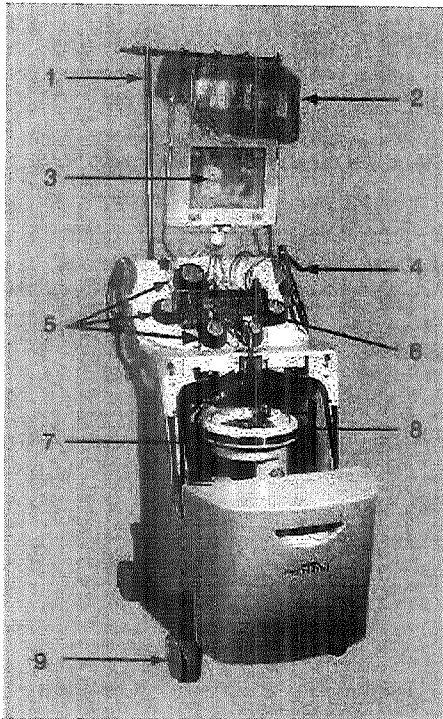

Partes principales del sistema Trima Accel

1. La percha IV para colgar las bolsas de producto.
2. Bolsas de productos. Parte del equipo de líneas
3. Pantalla.
4. Sellador portátil permite sellar y cortar las líneas.
5. Cinco bombas, piezas giratorias que impulsan la sangre, los componentes y las soluciones a través del sistema Trima Accel.
6. El casete parte del equipo de líneas
7. Centrífuga
8. El plato de separación
9. Ruedas.

Bombas del Sistema Trima

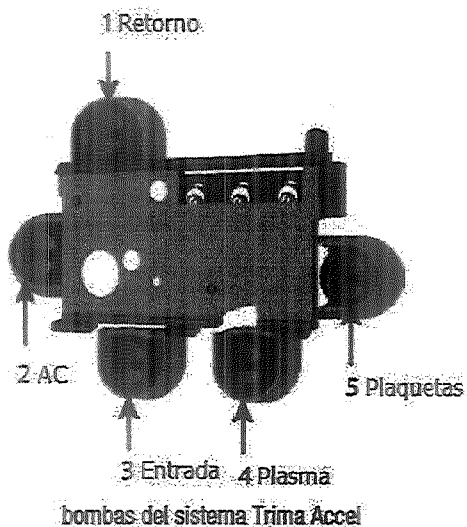


Apertura manual de la puerta de la centrífuga


En el caso de una alarma no recuperable o corte eléctrico, es posible que tenga que retirar manualmente el sistema de líneas. A continuación se detalla el paso por paso para abrir la puerta de la centrífuga manualmente

Nota: Utilice la llave para apertura manual de Trima

1. Quite el protector del orificio de bloqueo-desbloqueo de la centrífuga.

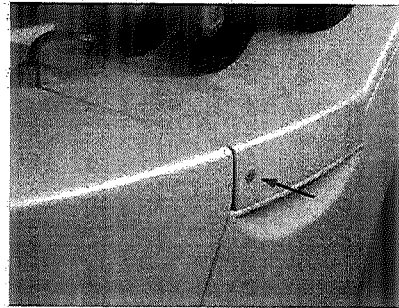

2. Introduzca la llave de la puerta de la centrífuga (o una varilla metálica larga y delgada) en el orificio. Presione hasta oír un clic.

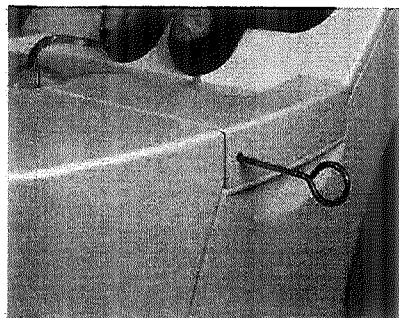

3. Quite la llave.
4. Apriete el pomo de la puerta de la centrífuga y baje suavemente la puerta.
5. Vuelva a colocar el protector en el orificio de bloqueo-desbloqueo.

