


Guía Rápida Monitor Multiparámetros Biolight Q5

Descripción General del Equipo

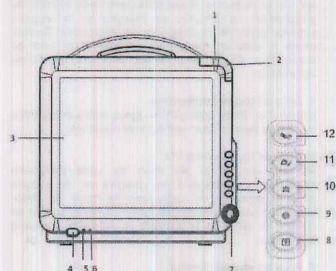

1. Luz indicadora de alarma fisiológica: Cuando se active una alarma fisiológica, se encenderá esta luz como se define a continuación:
- Alarma de nivel alto: La luz titila rápidamente en rojo.
 - Alarma de nivel medio: La luz titila más despacio en amarillo.
 - Alarma de nivel bajo: La luz es amarilla pero no titila.

2. Luz indicadora de alarma técnica: Cuando ocurra una alarma técnica, se encenderá esta luz como se define a continuación:
- Alarma de nivel alto: La luz titila rápidamente en rojo.
 - Alarma de nivel medio: La luz titila más despacio en amarillo.
 - Alarma de nivel bajo: La luz es azul pero no titila.

3. Pantalla

4. Botón de encendido/apagado

5. Luz indicadora de encendido/apagado: Es una luz LED de color verde y naranja que se lee de la siguiente manera:
- Verde: Cuando está conectada la AC.
 - Naranja: Cuando no está conectada la AC y el monitor funciona con batería.
 - Apagado: Cuando no está conectada la AC.

6. Luz indicadora de batería cargándose

- Luz encendida: Cuando se está cargando la batería.
- Apagado: Cuando la batería está cargada completamente o no hay batería en el monitor.

7. Perilla de ajuste: Esta perilla se utiliza para girar a la izquierda o a la derecha para mover el cursor. Presionar para realizar una operación, como por ejemplo, abrir un diálogo de menú o seleccionar una opción.

8. Presione este botón para iniciar o detener la impresión del registro.


9. Presione este botón para congelar o descongelar la forma de la onda.

10. Presione este botón para pausar o reactivar las alarmas.

11. Presione este botón para confirmar todas las alarmas activas. Esto apaga los indicadores de alarmas sonoras y las luces de alarmas.

12. Presione este botón para iniciar o detener la medición de NIBP.

Vistas Laterales

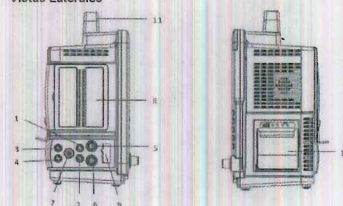

- 12. Conector TEMP1
- 13. Conector TEMP2
- 14. Conector PI 1
- 15. Conector PI 2
- 16. Conector SpO2 (BLT)
- 17. Conector ECG
- 18. Conector PANI
- 19. Ranuras del módulo
- 20. Conector SpO2 (especialmente para Nellcor SpO2)
- 21. Grabador
- 22. Manija

Operación Básica

Encendido del monitor

1. Presione el interruptor de encendido/apagado, la luz de alarma fisiológica se enciende en amarillo, la luz de alarma técnica se encenderá en azul y se apagará, y luego se mostrará la pantalla de inicio.

2. Luego de que desaparezca la pantalla de inicio, el sistema sonará e ingresará a la pantalla principal y, mientras tanto, se apagará la luz de la alarma técnica.

Inicio del monitoreo

1. Decida qué parámetros se monitorearán o se medirán.
2. Instale los módulos o sensores requeridos.
3. Verifique que los módulos o los sensores estén correctamente instalados.
4. Verifique que todos los tipos de configuraciones sean correctos.
5. Comience a monitorear a un paciente. La información detallada se refiere a los capítulos relacionados.

Modo de espera

Seleccione la tecla inteligente **【Menú Principal】** → **【En espera】**, luego seleccione **【SI】** para activar el modo de espera.

Descripción de Pantalla



1. Área de información del paciente

Muestra el número de habitación, el número de cama, el nombre del paciente, la etiqueta del paciente y el estado de sincronía del paciente.

2. Área de alarma fisiológica

Muestra los mensajes de la alarma fisiológica, los mensajes de alarma de nivel medio y nivel bajo se muestran a la izquierda, mientras que los mensajes de alarma de nivel alto se muestran a la derecha.

3. Área de estado de alarma

- ☒ El sonido del sistema está silenciado.
- ☒ El sonido de la alarma está apagado.
- ☒ La alarma está suspendida.

4. Área de parámetros

Está formada por varias áreas de parámetro y muestra los números de las mediciones para cada módulo de parámetros. La etiqueta se muestra en la esquina superior izquierda de cada área de parámetros. Cuando cierra o abre un módulo de parámetro, el área de parámetros de la pantalla se ordenará en forma automática.

5. Área de teclas inteligentes

Muestra las teclas inteligentes; estas teclas inteligentes se utilizan para realizar operaciones comunes.

6. Área de formas de onda

Muestra las formas de onda de cada parámetro fisiológico. La categoría se muestra en la esquina superior izquierda de cada área de forma de onda. Cuando cierra o abre alguna forma de onda, el área de formas de onda de la pantalla se ordenará en forma automática.

7. Área de alarma técnica

Muestra mensaje de la alarma técnica y mensaje de inicio.

USO DE TECLAS INTELIGENTES

La posición de la pantalla que podría tener importancia se conoce como tecla inteligente. Mediante el uso de la tecla inteligente, uno puede ingresar a menús o ejecutar algunas operaciones en forma rápida.

Tecla inteligente	Nota de la tecla inteligente	Tecla inteligente	Nota de la tecla inteligente
◀	Página previa	▶	Página siguiente
🔊	Ajuste volumen	👤	Ingrese menú PANI
📊	Inicie medición STAT	🛑	Detenga medición PANI
📋	Medición de revisión PANI	📄	Rev. Tead.
📶	Conecte ondas	🔌	Cero
⚠️	Ajuste alarma	👤	Gestione paciente
👤	Alta del paciente actual	⚙️	Cfg Módulos
🔌	En espera	🖨️	Pantallas (cambio de pantalla)
📊	Cálculo	📁	Grabadora