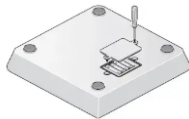
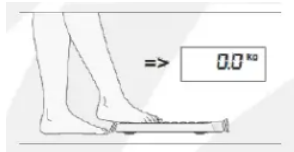


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 16	MES: 08	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	Báscula electrónica	Modelo:	856		Riesgo del equipo:	I
Marca:	Seca			Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		CAMBIO DE BATERÍAS		
 Es un equipo altamente preciso pero al mismo tiempo resistente, siempre establece nuevos estándares con sus desarrollos innovadores para pesar y medir. La báscula para órganos y pañales se utiliza principalmente en hospitales, consultorios generales y centros de atención hospitalaria.		 1.Base 2.Chasis o estructura 3.Botones 4.Pantalla digital		Si en la pantalla aparece:  Debe cambiar las baterías. Necesita 4 pilas de celda redonda tipo AAA de 1.5 V. 1.Desatornille los pernos que aseguran la tapa del compartimiento de la batería y retírela. 2.Inserte las pilas nuevas en el compartimiento de las pilas. 		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		POSIBLES FALLAS O ERRORES		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
1.Capacidad:5 kg, 11 lbs 2.División (g):1 g < 3 kg > 2 g / 0,05 oz < 6,6 lbs > 0,1 oz 3.Alimentación:Batería 4.Dimensiones (AxAxP):265 x 53 x 265 mm,10,4 x 2,1 x 10,4 inch 5.Peso neto:1,9 kg , 4,2 lbs 6.Funciones:TARA, pre-TARA, HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática		1.La pantalla no enciende: Revise que la báscula este encendida, revise las baterías. 2.En la pantalla muestra que la batería se esta agotando: Cambie las pilas. 3.En la pantalla aparece que las baterías estan vacias: Poner pilas nuevas. 4. Aparece en la pantalla que la temperatura ambiente de la báscula es demasiado alta o demasiado baja: Coloque la balanza a una temperatura ambiente entre +10 °C y +40 °C. Espere unos 15 minutos para que la báscula se adapte a la temperatura ambiente y luego vuelva		Verifique que la polaridad sea la correcta 1.Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y atorníllelo firmemente en su lugar.		
RECOMENDACIONES						
1.Guarde el manual de instrucciones y la declaración de conformidad que contiene en un lugar seguro. 2.No deje caer la báscula ni la someta a golpes violentos. 3.Use solo el tipo de batería indicado. 4.Haga que le den servicio a la báscula regularmente 5.Haga que las reparaciones sean realizadas exclusivamente por personas autorizadas.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001		PAGINA 01 DE 01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA 16 MES 08 AÑO 2024
Nombre del equipo: Báscula electrónica		Modelo: 856	Riesgo del equipo: I		
Marca: Seca		Clasificación del equipo: Diagnóstico			
MANDOS E INDICACIONES		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		PESAJE CON FUNCIÓN DE TARA PREVIA	
 1.Pulsación breve de tecla: Activar/desactivar la función PRE-TARA. 2.Pulsación larga de tecla:Memorizar el valor de la tara. 1.Pulsación breve de tecla: Activar/desactivar la función HOLD. 2.Pulsación larga de tecla:Reponer la indicación a cero, Activar/desactivar la función TARA. 1.Pulsación breve de tecla: Conexión/desconexión de la báscula. 2.Pulsación larga de tecla:Conmutación entre g y oz. Nota: No tire las pilas usadas a la basura doméstica. Deseche las baterías en los puntos de recogida cercanos. Cuando compre baterías nuevas, seleccione aquellas con bajo contenido de sustancias nocivas y que no contengan mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb).		1.Presione con un pie la báscula como se muestra en la siguiente imagen, retire el pie y luego aparecerá en pantalla "0.0"  2.Seguido a esto, apóyese sobre la báscula hasta que esta registre su peso como se muestra en la siguiente imagen:  3.La medición habrá finalizado. APAGADO AUTOMATICO La báscula se apaga automáticamente después de 30 segundos. Cuando la báscula está cargada o cuando la función Hold está activada, la báscula se apaga después de 3 minutos.		Si la función de tara previa está activada, se deduce un valor de peso almacenado del peso medido actualmente. Esta función puede ser útil si el peso de un plato no se va a incluir en la pantalla. Start g/oz -Presione la tecla Inicio sin carga en la báscula. y aparecen consecutivamente en la pantalla. A continuación, la báscula se pone automáticamente a cero y está lista para funcionar. -Mientras el peso adicional está en la báscula, almacene el peso (por ejemplo, de un plato) manteniendo presionada la tecla Pretara durante algún tiempo. El valor de tara permanece almacenado incluso después de apagar la báscula. Pretare -Ahora ponga el artículo para pesar en la balanza. La báscula determina el peso. -Presionar brevemente la tecla Pretare resta el peso adicional del resultado de la medición. Ahora puede realizar tantas operaciones de pesaje como desee. -Para volver al modo de pesaje normal, presione la tecla Pretara. -Para apagar la báscula, vuelva a pulsar la tecla Inicio: Start g/oz	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					