


MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA

CPT - CO₂

1 Dispositivo biomédico encargado de la monitorización de la presión parcial de dióxido de carbono (CO₂) exhalado por el paciente, en un tiempo determinado.




2 Al momento de conectar el dispositivo, recuerde que este posee una guía en forma de flecha, la cual indica la forma correcta en la que debe ir el conector, evitando dañar los pines de entrada.

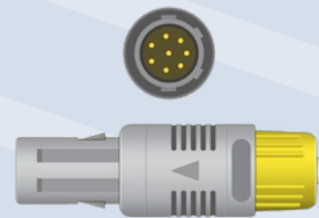

El dispositivo va a mostrar los siguientes parámetros:

- 3) Valor de CO₂ al final de la espiración (ETCO₂)
- 4) CO₂ mínimo inspirado (FICO₂)
- 5) Tasa de respiración de la vía aérea

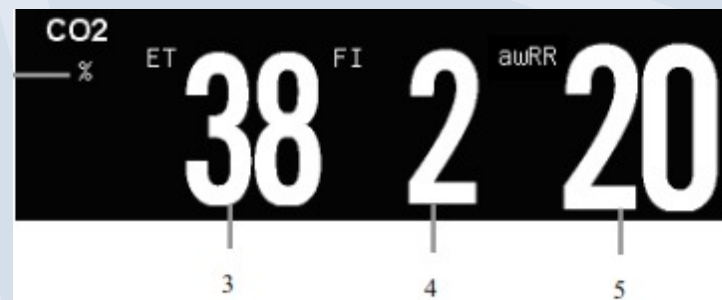


Fase I (A-B)

Fase espiratoria

Fase II (B-C)

Línea de base espiratoria

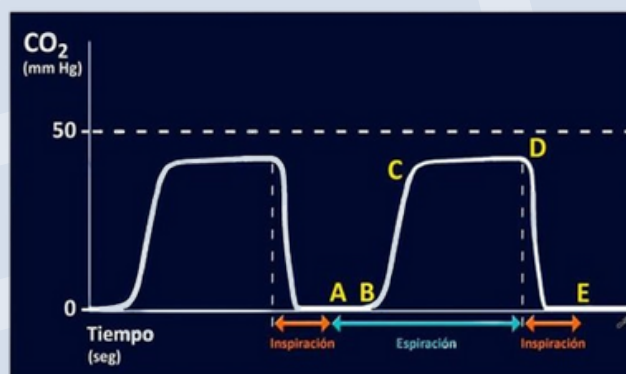

Fase III (C-D)

Fase de meseta

Fase IV (D-E)

Fase inspiratoria

Los rangos normales de CO₂ espirado oscilan entre los 35 y 45 mmHg. Sin embargo, estos pueden variar a causa de una afección clínica inmediata o según la patología.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

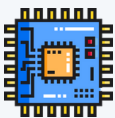

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos