

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
MARCA: MEDEC	VERSIÓN: 1
MODELO: CALEUS 120330M5	FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, la cual tiene como finalidad administrar de manera segura por ventilación espontánea o mecánica gases medicinales que permitan realizar una anestesia adecuada monitorizando al tiempo los signos vitales del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra
- Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas.
- Verifique el suministro adecuado del cilindro de respaldo.
- Verifique la correcta conexión y funcionamiento de los vaporizadores.

PARTES DEL EQUIPO

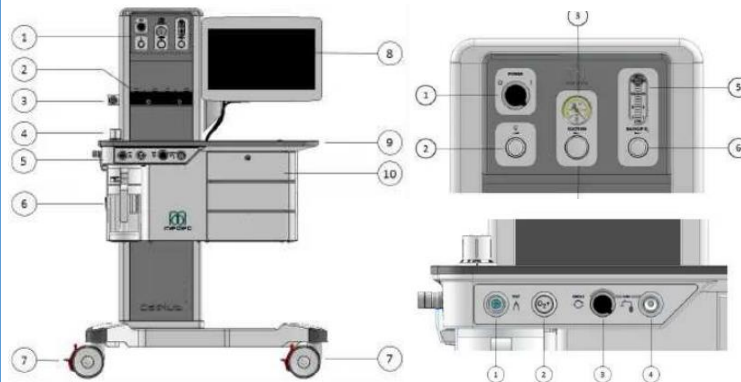

Partes del equipo delanteras:

1. Panel de control de la interfaz
2. Riel selectatec
3. Salida auxiliar de oxígeno
4. Válvula APL, para configuración de la presión
5. Panel de control frontal del equipo
6. Absorbedor de CO₂ sodado
7. Ruedas
8. Pantalla táctil de control
9. Superficie de trabajo
10. Gavetas

Partes de control de la interfaz del equipo:

1. Interruptor de ON/OFF
2. Regulador de luz
3. Manómetro de succión

PRUEBAS DEL SISTEMA



La intervención del usuario no es requerida en esta etapa. El sistema verifica las funcionalidades básicas del sistema: comunicación con los subsistemas, la integridad de la memoria interna y las conexiones de gas.

- El sistema irá realizando pruebas donde se analizan diferentes características, cada vez que pase una prueba se irá mostrando en pantalla con su respectivo progreso.
- En la misma interfaz se puede ingresar casos con datos específicos a gusto de los usuarios

PRUEBAS REALIZADAS AL EQUIPO

1. Prueba de mezclador de gas fresco
2. Test del ventilador
3. Prueba de fugas
4. Pruebas de descarga de oxígeno

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
MARCA: MEDEC	VERSIÓN: 1
MODELO: CALEUS 120330M5	FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2022

PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA SU USO



1. Conecte el equipo a la red eléctrica AC
2. Conecte las mangueras de suministro de gas: Oxígeno y aire
3. Compruebe el funcionamiento de los manómetros de presión
4. Compruebe el funcionamiento del soporte de tubería plástica
5. Conecte el circuito respiratorio del paciente



6. Vacíe y limpie la trampa de agua del equipo
7. Instale o compruebe el funcionamiento de la celda de oxígeno
8. Revise el estado de la cal del canister, si es necesario haga el cambio de la cal
9. Revise el estado de los vaporizadores
10. Encienda el monitor
11. Inicie las pruebas del sistema y siga las instrucciones que este le va indicando para las pruebas en caso de ser necesario.

4. Flujometro de O2 de respaldo

Partes de control frontales del equipo:


1. Conector de prueba adaptado para accesorio en Y
2. Botón para descarga de O2
3. Interruptor de circuito CGO, dirige el flujo del gas
4. Salida del gas común

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO



MODO ESPONTANEO:

1. Inicie el modo manual directamente deslizando el dedo sobre el modo de ventilación

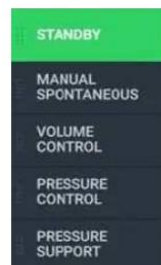


2. Ajuste el flujo de gas fresco según sea necesario
3. Ajuste la válvula APL al límite de presión requerida
4. Utilice la bolsa manual para este tipo de ventilación

CONTROL POR VOLUMEN:

1. Inicie el control por volumen deslizando directamente el dedo sobre la opción del menú
2. Se realiza un pre-ajuste del modo ventilatorio en donde se indica el género del paciente, el peso, la altura y otros datos de ficha clínica

5. Prueba del interruptor de gas fresco
6. Prueba de O2 de respaldo
7. Mediciones del módulo de gas
8. Ventilación con pulmón de prueba

INTERFAZ DEL EQUIPO

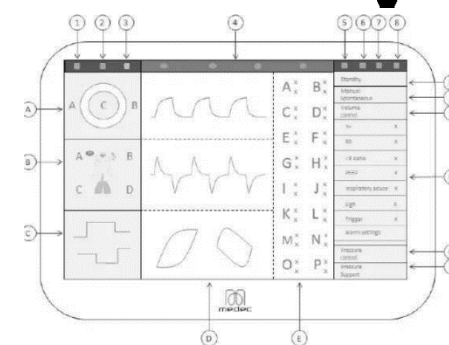

1. Icono de configuración del sistema
 2. Icono de centro de alarmas
 3. Botón de silencio
 4. Área de notificaciones
 5. Icono de captura de pantalla
 6. Temporizador de caso
 7. Hora
 8. Icono de estado de suministro de energía
- A. Rotámetro
B. Paciente
C. Tendencias
D. Curvas y bucles
E. Valores medidos
F. Presión de soporte
G. Control por presión

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: MAQUINA DE ANESTESIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: MEDEC	VERSIÓN: 1
	MODELO: CALEUS 120330M5	FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2022

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.



ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

ALARMAS

BAJA PRIORIDAD		INTERVALO DE 30 SEGUNDOS
PRIORIDAD MEDIA		INTERVALO DE 15 SEGUNDOS
ALTA PRIORIDAD		INTERVALO DE 4 SEGUNDOS

3. Se realiza ajuste de los siguientes parámetros según recomendación del especialista y el anestesiólogo

PARAMETER	RANGE
Tidal volume VTesp	5 - 1600 ml
Respiratory rate FR	2 - 100 bpm
I:E ratio	4:1 - 1:10
PEEP	0 - 30 hPa
Inspiratory pause	0 - 60 %
Breath pattern	Constant flow Decelerating flow Constant pressure
Trigger	Off, 4-100%

4. Cuando se tienen los parámetros listos, se selecciona "Ok" y empezamos a trabajar con los parámetros establecidos.

CONTROL POR PRESIÓN:

1. Inicie el control por volumen deslizando directamente el dedo sobre la opción del menú
2. Se realiza un pre-ajuste del modo ventilatorio en donde se indica el género del paciente, el peso, la altura y otros datos de ficha clínica
3. Se realiza ajuste de los siguientes parámetros según recomendación del especialista y el anestesiólogo

PARÁMETRO	RANGO
Presión máxima - Pmax	4 - 70 hPa
Frecuencia respiratoria	2 - 100 bpm
Relación I:E	4:1-1:10
PEEP	0 - 30 hPa
Tiempo de subida	Lento / Medio / Rápido

PARÁMETRO	Dependencia
Presión máxima - Pmax	UL = Pmax + 5 hPa
FR	Límite superior FR >= FR+1 Límite inferior FR = FR-1
PEEP	Pmax = PEEP + 4 hPa

- H. Configuración
- I. Control por volumen
- J. Modo manual/ Espontaneo
- K. Standby del equipo

CONTROL DE SOPORTE POR PRESIÓN:

1. Inicie el control por volumen deslizando directamente el dedo sobre la opción del menú
2. Se realiza un pre-ajuste del modo ventilatorio en donde se indica el género del paciente, el peso, la altura y otros datos de ficha clínica
3. Se realiza ajuste de los siguientes parámetros según recomendación del especialista y el anestesiólogo

PARÁMETRO	RANGO
Psoporte	0 - 50 hPa
Disparador	4 - 100%
Flujo final	5 - 50%
PEEP	0 - 30 hPa
Tiempo de subida	Lento / Medio / Rápido
FRrespaldo	Apagado, 2-60 bpm
Prespaldo	4 - 70 hPa