

EQUIPO: DESFIBRILADOR

CÓDIGO: NA

MARCA: NIHON KOHDEN

VERSIÓN: 1

MODELO: TEC-7731E

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

USO DEL EQUIPO




Desfibrilador manual TEC-7731E con AED, marcapasos compacto, SpO2 y CO2 opcional. La forma de onda bifásica brinda una efectiva desfibrilación con poca energía, cuenta con DEA y marcapasos no invasivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica AC
- No frote las palas del equipo entre sí, ya que puede formar un arco eléctrico peligroso
- Si las palas están cargadas y ya no se van a usar, descárguelas en la misma plataforma del equipo
- Retire el exceso de gel en las palas.
- Cambie los canales en caso de ser necesario para la monitorización de ECG.

PARTES DEL EQUIPO

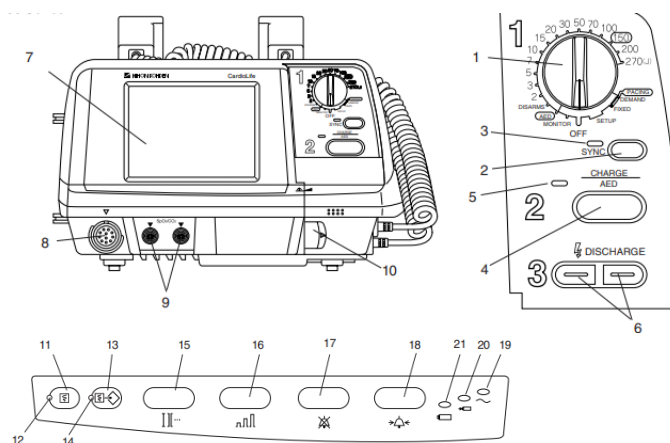

Partes del equipo laterales:

1. Perilla para seleccionar la determinada energía a usar
2. Botón para modo SYNC
3. Piloto de SYNC
4. Botón para cargar las palas con energía
5. Icono de que las palas están cargadas
6. Botón para descargar las palas

Partes del equipo frontales:

7. Pantalla LCD del equipo
8. Conector para accesorio de ECG
9. Conector para accesorio de SpO2 y CO2
10. Conector de paletas

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO



1. Seleccionar energía: Gire el control de selección de energía al nivel de energía deseado. El desfibrilador ya está encendido.
2. Prepare las paletas siguiendo los siguientes pasos:
 - a) Retire las paletas de sus soportes
 - b) sujetando las asas y levantándolas hacia arriba.
 - c) Sosteniendo ambas paletas en una mano, aplique pasta electrolítica a la superficie del electrodo de cada pala.
3. Aplique las palas como se describe en la siguiente figura.



4. Presione CHARGE en la pala Ápex o en el panel frontal del instrumento.
5. Verifique que nadie esté en contacto con el paciente, el cable o cables de monitoreo, los rieles de la cama u otra vía de corriente potencial.

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO		
	EQUIPO: DESFIBRILADOR	CÓDIGO: NA
	MARCA: NIHON KOHDEN	VERSIÓN: 1
	MODELO: TEC-7731E	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/10/2022

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO



1. Mantenga el cable de alimentación alejado del paciente.
2. Conecte la unidad a un enchufe debidamente aterrizado.
3. Asegúrese de que equipos de Rayos-X no estén operando en zonas adyacentes.

Partes del panel de control:

11. Botón para imprimir la monitorización
12. Piloto de que la impresión esta activada en el equipo
13. Botón para acceder al historial de los eventos
14. Piloto de que se esta accediendo al historial de los eventos
15. Botón para cambiar las derivadas del ECG
16. Botón para organizar las ganancias de las gráficas del ECG
17. Botón para silenciar las alarmas
18. Botón para acceder a las alarmas o activarlas
19. Piloto de que el equipo esta conectado a la red eléctrica
20. Piloto de que el equipo se encuentra cargando la batería
21. Piloto de que la batería cargo completamente

MODO CARDIOVERSIÓN:



1. Conecte los electrodos al paciente.
2. Conecte el enchufe del cable del paciente de ECG al conector de entrada.
3. Presione el botón LEAD para seleccionar la derivación usada.
4. Si usa paletas, aplique gel para electrodos en el centro una paleta.
5. Presione el botón SYNC para activar el sincronizador
6. Seleccione el nivel de energía deseado.
7. Presione el botón CARGAR
8. Coloque las paletas y haga la descarga

6. Finalmente descargue la energía sobre el paciente

MODOS DEL EQUIPO



MODO ECG:



1. Prepare completamente la piel del paciente para la fijación del electrodo.
2. Conecte cada cable del cable del paciente de 3 cables (o 5) al electrodo apropiado.
3. Arregle los electrodos como se muestra arriba.
4. Inserte el enchufe del cable del paciente en el conector de ECG de entrada del desfibrilador.
5. Seleccione la configuración de cable adecuada para la configuración de cable presionando el botón LEAD a la posición apropiada: I, II o III.
6. Observe el electrocardiograma del paciente en la pantalla. Ajuste el tamaño de la traza de ECG con el botón TAMAÑO según sea necesario.