


SEER™ 1000 – Instrucciones breves


Preparar e iniciar el ECG

1. Prepare al paciente – afeite y limpie la piel.
2. Colóquelo al paciente los electrodos.
3. Conecte el cable de ECG con los electrodos y el registrador.
4. Inserte la batería en el registrador, con el polo positivo hacia abajo.
5. Pulse la **tecla de eventos** para iniciar el registro.


En la página siguiente se encuentran explicaciones sobre el control de colocación de ECG con la **SEER Mobile App**.

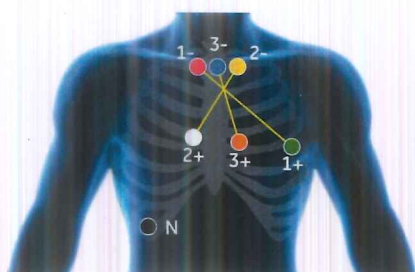

7 electrodos (IEC)
3 canales independientes

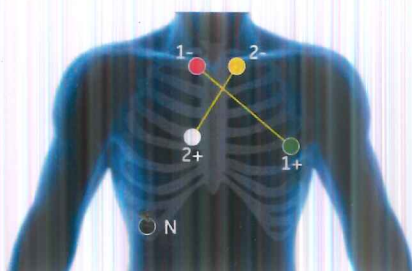


5 electrodos (IEC)
2 canales independientes

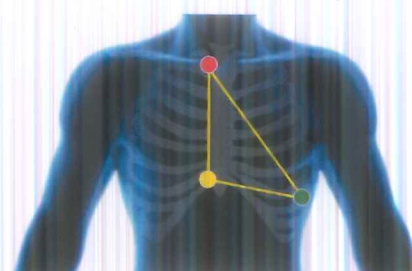

3 electrodos (IEC)
3 canales no independientes

Uso del registrador SEER 1000

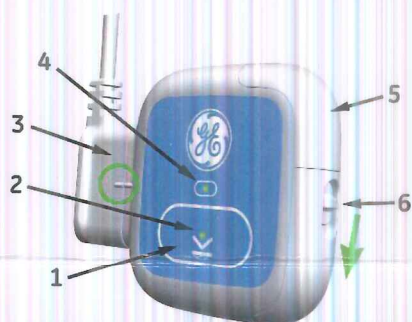

Elemento	Descripción
1 Tecla de eventos	• Pulsar y mantener pulsada hasta escuchar una señal acústica para conectar/desconectar el registrador. • Pulsar durante aprox. un segundo para iniciar un registro o marcar un evento. Se emite señal acústica de confirmación. • Pulsar y mantener pulsada durante el registro hasta escuchar una señal acústica para activar bluetooth.
2 LED de la tecla de eventos	• Emite luz verde: Dispuesto para iniciar el registro. • Parpadea en verde: Realizando un registro. • Emite luz amarilla: Registro anterior guardado. • Parpadea en amarillo: Bajo nivel de batería.
3 Conexión para cable de USB y cable de ECG	• Compruebe que las marcas señaladas en la gráfica con un círculo estén situadas una ante la otra. • Conecte el cable de ECG para el registro. • Conecte el cable de USB para leer el registro.
4 LED de electrodos	• Emite luz verde: Electrodos conectados correctamente. • Parpadea en amarillo: Electrodos no conectados correctamente.
5 Tapa del compartimiento de batería	• Insertar la batería en el registrador, con el polo positivo hacia abajo.
6 Cierre del compartimiento de batería	• Para abrir, empujar el cierre del compartimiento de batería hacia atrás.

Indicación: Cuando el registrador tiene un defecto y necesita servicio, el **LED de la tecla de eventos** y el **LED de electrodos** parpadean, alternando entre amarillo y verde. La información del servicio se encuentra en las instrucciones de uso.

PRECAUCIÓN: Si el cable de USB o el cable de ECG no se enchufan correctamente, esto puede dañar el registrador y los cables.



SEER™ 1000 – Instrucciones breves

Instalar y configurar la app de SEER

Si utiliza Vd. una PC, introduzca el CD y siga las instrucciones. Si utiliza Vd. un aparato móvil con Apple iOS, descargue la app del App Store (Apple), buscando por **SEER 1000**.

En el primer login, el administrador debe introducir y cambiar la contraseña de administrador estándar en la ventana **Administrador**. Después el administrador puede crear IDs de técnico.

Como técnico de ECG, Vd. puede realizar el login con la contraseña de técnico estándar. En el primer login se le requiere a Vd. introducir una contraseña nueva (con ocho o más caracteres).

Contraseñas

Contraseña estándar de administrador: **14012013**

Contraseña estándar de técnico: **20130114**

GE Healthcare le recomienda cambiar la contraseña estándar en su primer login. Utilice siempre la misma contraseña de administrador para conectar todos los programas de software soportados con el registrador (app de iOS, app de PC, CardioDay y CardioRead). La contraseña se transmite al registrador junto con los datos de paciente con el fin de proteger los datos contra el acceso no autorizado.

Símbolos



Acumulador*



Crear un nuevo paciente o una nueva ID de técnico**



Iniciar el registro



Batería desechable Alkaline*



Cambiar los datos de paciente**



Parar el registro



Estado de batería



Seleccionar un paciente o aparato**



Borrar



Impresión de pantalla**



Masculino



Buscar aparato**




Femenino

*seleccionar para indicación exacta del estado de batería

**sólo app de PC

Conectar el cable de ECG con la grabadora y los electrodos

Hay una sola posición correcta para introducir en el registrador el enchufe del cable de ECG. Si el enchufe se introduce incorrectamente, pueden ocasionarse graves daños en el aparato. Los daños derivados del uso inadecuado no están cubiertos por la garantía.

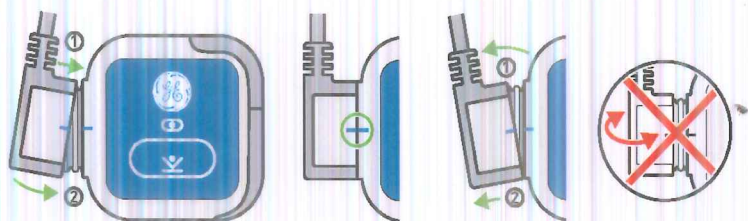

El enchufe y el registrador están posicionados correctamente si las marcas en el enchufe y en el registrador están una delante de la otra, tal y como se muestra con el círculo verde en la gráfica. No introduzca el enchufe en ninguna otra posición.

No fuerza nunca el enchufe hacia la parte delantera o trasera del registrador como lo señalan las flechas rojas en la gráfica a la derecha.

No utilice nunca la fuerza para enchufar el cable de paciente en el registrador. No doble el cable de paciente ni lo enrolle alrededor del registrador.

Saque el enchufe de forma recta del registrador para desconectar el cable del registrador. No tire del cable para separar el cable del registrador.

CE 0197 EAC



Estas instrucciones de uso son creación y propiedad de la GETEMED Medizin- und Informationstechnik AG, Oderstr. 77, 14513 Teltow, Alemania.
DISTRIBUTOR: GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

1015-LAB-0001-Rev-F-SEER-1000-QSG-ES-2018-07-30