



GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO

EQUIPO: MARCAPASOS EXTERNO

CÓDIGO: NA

MARCA: MEDTRONIC

VERSIÓN: 1

MODELO: 5392

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/04/2023

USO DEL EQUIPO



Equipo biomédico encargado de estimular el corazón a través de una vía externa transcutánea o percutánea. Está compuesto por un generador de estímulos conectado a unos electrodos que se aplican y son los encargados de transmitir el impulso eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Batería alcalina de 9 V
- Funcionamiento en un rango normal de 17°C a 33°C
- Vida útil de la batería entre 9 y 17 días
- Modo de estimulación por demanda y asincrónico.


CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de alto riesgo.

PARTES DEL EQUIPO


PARTE A:

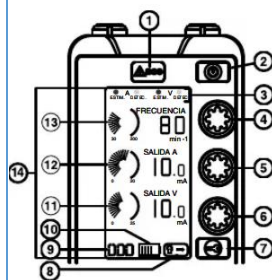

PARTE A:

1. Botón de emergencia
2. Botón de ON/OFF
3. Indicador de estimulación
4. Perilla ajuste frecuencia
5. Perilla ajuste Salida auricular
6. Perilla ajuste Salida V
7. Botón para bloquear
8. Indicador de bloqueo
9. Indicador de MODO
10. Indicador de batería
11. Escala de Salida A
12. Escala de Salida V
13. Escala de frecuencia
14. Pantalla superior

PARTE B:

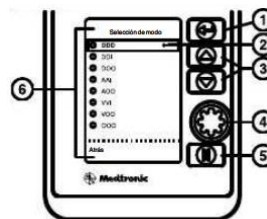

PARTE B:

1. Botón de Intro
2. Indicador de selección
3. Botones de abajo/arriba
4. Perilla de menú
5. Botón de pausa
6. Pantalla inferior

MODOS DE OPERACIÓN

MODO A DEMANDA:



1. Pulse el botón de encendido del equipo
2. Configure el modo a trabajar
3. Ajuste los valores de frecuencia, Salida A y V.
4. Inicie la operación del equipo en el modo seleccionado.

Tabla 1. Modos de estimulación con estimulación a demanda

Tipo de estimulación sin-crona (a demanda)	Modo de estimulación	Resultado
Bicameral	DDD, DDI	La estimulación y la detección se producen en ambas cámaras.
Auricular	AAI	La estimulación y la detección se producen únicamente en la aurícula. No se produce estimulación ni detección en el ventrículo.
Ventricular	VVI	La estimulación y la detección se producen únicamente en el ventrículo. No se produce estimulación ni detección en la aurícula.

MODO ASINCRÓNICO:



1. Pulse el botón de encendido del equipo
2. Pulse el botón de emergencia de monitoreo
3. Ajuste los valores de Salida A y V.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la Institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.