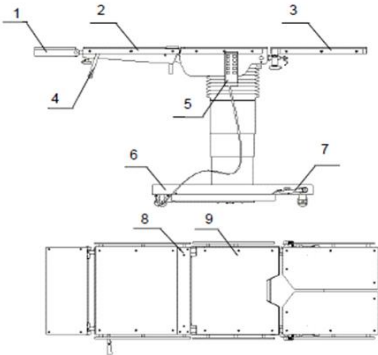


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		FOR-GLO-MAB-012			
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		CODIGO: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 13	MES: 08	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	Mesa de operaciones electrica	Modelo:	OT-300C		Riesgo del equipo:	I
Marca:	Advanced		Clasificación del equipo:		Apoyo Diagnostico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
 El modelo OT-300C es un soporte de apoyo diseñado para procedimientos quirúrgicos, creado para satisfacer las diversas necesidades del mercado y basado en el consejo de los usuarios. Esta mesa de operaciones es ideal para intervenciones generales, cuenta con un sistema eléctrico y un interruptor para controlar su elevación. Su operación es sencilla y confiable, lo que la hace adecuada para diferentes hospitales, ofreciendo un rendimiento fiable y ajustes precisos.				No aplica. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. Recomendaciones: -Todos los cojines son extraíbles y pueden limpiarse individualmente, no los exponga al calor. -Después de cada procedimiento, desconecte el equipo, baje la mesa a la altura mínima y coloque el asiento y respaldo en ALARMAS Y POSIBLES ERRORES 1.Fuente de alimentación de CA está encendida y no hay ningún indicador en el panel de alimentación encendido: Interruptor roto en el panel de alimentación, Reemplace el interruptor verde. 2.Fuente de alimentación de CA esta apagado pero el indicador LED verde está encendido: El fusible F2AL en el panel de energía está quemado, reemplacelo. 3.Cuando utilice la fuente de alimentación de la batería, la mesa de operaciones no puede funcionar y el indicador LED está apagado: a. El fusible F10AL está quemado, b. Las baterías están rotas, C. El sistema de carga de la caja de control está roto.Soluciones: a.Reemplace el fusible F10AL b. Reemplace dos baterías de plomo ácido de 3.3AH y 12v. C. Cambie la caja de control. PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1.Conecte el equipo a la toma de red AC para alimentarlo. 2. Encienda el equipo presionando el interruptor on/off que se encuentra en la parte inferior. 3.Para seleccionar las opciones del control remoto es necesario desbloquearlo, presionando el "candado Abierto". 4.Seleccione el movimiento deseado.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.Dimensiones2070mm/550mm 2.Peso 273 Kg / 607 Lbs 3.Voltaje 110V - 220V 4.Frecuencia 50Hz - 60Hz 5.Potencia alimentación externa 840W 6.Potencia alimentación interna 115W 7.Cable de alimentación 5 Mts 8.Altura sin colchón 700mm 9.Tiempo minimo de carga de baterías (batería totalmente descargada): 6 horas. 10.Autonomia con carga total: 120min. 11.Protección contra penetración de agua IPX0		1.Reposacabezas: Soporte para la cabeza del paciente. 2.Respaldos: Soporte para la espalda del paciente. 3.Reposapiernas: Soporte para las piernas del paciente. 4.Manijas para puente renal: Ajuste para el soporte lumbar. 5.Controles remotos: Control de la mesa a distancia. 6.Bases: Soporte inferior de la mesa. 7.Pedales: Control de la mesa con los pies. 8.Puentes renales: Soporte lumbar para el paciente. 9.Placas para gluteos: Soporte para los glúteos del paciente.				
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						