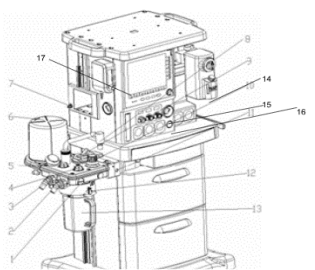
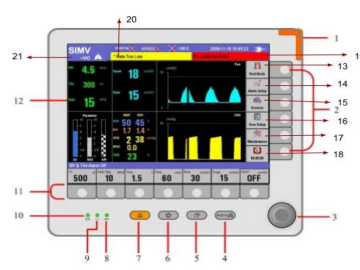


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			
Nombre del equipo:	Maquina de anestesia	Modelo:	WATO EX65 New		Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	Mindray			Clasificación del equipo:	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		14. Botón de ajuste de alarmas		
 Dispositivo compuesto por elementos mecánicos, neumáticos y electrónicos, la cual tiene como finalidad administrar de manera segura por ventilación espontanea o mecánica, gases medicinales que permitan realizar una anestesia adecuada monitorizando al tiempo los signos vitales del paciente.			15. Botón para ajustar pantalla deseada			
				16. Botón para ajustar la compesación del equipo		
				17. Botón para acceder a modo mantenimiento		
				18. Botón para contabilizar el tiempo		
				19. Indicador de alarma tecnica		
				20. Indicador de alarma de apnea		
				21. Indicador de modo ventilatorio		
				ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO		
				1. Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra.		
				2. Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas.		
				3. Asegúrese que los vaporizadores se encuentren bien ajustados cuando se realicen las pruebas y antes de cada intervención.		
				4. No adopte controles de flujo a la fuerza		
				5. No realice calibraciones de flujo cuando el equipo se encuentre operando		
				EN CASO DE ACTIVACIÓN DE ALARMAS		
				1. Compruebe el estado del paciente		
				2. Determine el parámetro de alarma si es tecnica o de apnea.		
				3. Identifique el origen de la alarma		
				4. Realice las acciones pertinentes para eliminar la alarma		
				5. Compruebe el funcionamiento del fuelle		
				6. Compruebe los parametros programados de ventilación		
				7. Compruebe el estado del gas anestésico		
				8. Compruebe el color de la cal sodada del equipo		
				7. Compruebe si el equipo tiene sonidos de fugas		
				8. Revise el estado de batería del equipo		
				9. Revise que la manguera de los gases medicinales esten bien conectadas al equipo		
				10. Revise los circuitos del paciente		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		1. Sensor de O2		1. Icono de alarma		
1. Modos de ventilación multiple: Modo VCV, PCV, PSV + Apnea, Compensación VT, SIMV.		2. Conexión de parte inspiratoria		2. Botones de acceso de menu		
2. Batería: Hasta 90 minutos.		3. Conexión de parte expiratoria		3. Control giratorio de acceso rapido		
3. Tipo de pacientes: Adultos y pediátricos		4. Válvula de chequeo inspiratoria		4. Botón para configuración de alarmas		
4. Pantalla LCD de 12"		5. Válvula de chequeo expiratoria		5. Botón para organizar visualización de la pantalla		
5. Gases anestésicos compatibles: Isoflorane, sevoflorane, halotane, desflurane.		6. Carcasa del fuelle		6. Botón para modo espera		
6. Cilindros de respaldo de 2 o 4 yugo		7. Puerto de retorno de gas AGSS		7. Botón para silenciar alarmas		
7. Canister de cal sodada de 1.5 L		8. Puerto para bolsa manual		8. Indicador de funcionamiento del equipo		
		9. Selección de modo manual- mecanico		9. Indicador de cable de poder ON/OFF		
		10. Válvula APL		10. Indicador de estado de batería		
		11. Conexión para cable O2		11. Selección de parametros de modo ventilatorio		
		12. Botón para aperturar canister		12. Pantalla Screen		
		13. Recipiente de cal sodada		13. Botón para seleccionar modo ventilatorio		
		14. Vaporizador				
		15. Botón de flush O2				
		16. Botón de ON/OFF				
ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				
1.No limpie el monitor con material abrasivo		Se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.				
2. En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco						
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo						
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.						
5. Utilizar alcohol al 70% como producto de contingencia.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E			CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012																										
				VERSIÓN:		001	PAGINA	01	DE	01																						
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA		MES	AÑO																							
15						03	2023																									
Nombre del equipo:		Maquina de anestesia		Modelo:		Wato EX65 New		Riesgo del equipo:	IIB																							
Marca:		Mindray		Clasificación del equipo:		TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO																										
PRUEBAS DEL SISTEMA		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO			PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO																											
La intervención del usuario no es requerida 100% en esta etapa. El sistema verifica las funcionalidades básicas del sistema: comunicación con los subsistemas, la integridad de la memoria interna y las conexiones de gas, mostrando un progreso de las mismas pruebas:		1. MODO CONTROL POR VOLUMEN: 1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent] 2. Seleccione en el menú [VCV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio] 3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados. 4. Pulse el mando giratorio para confirmar Parámetros			1. Conecte el equipo a la red eléctrica AC 2. Conecte las mangueras de suministro de gas: Oxígeno y aire 3. Compruebe el funcionamiento de los manómetros de presión																											
PRUEBAS DEL FUELLE: 1. ponga el sistema en espera y ponga el interruptor en la opción de ventilación manual. 2. Ponga los controles de flujo al mínimo 3. Conecte la pieza en Y, ocluya la salida de gas de la pieza en Y. 4. Pulse el botón de Flush O2 5. Verifique el funcionamiento del fuelle por medio del ciclaje de la máquina, si este fuelle baja, compruebe instalándolo nuevamente.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Range</th> <th>Step</th> <th>Default</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TV</td> <td>20 to 1500 ml</td> <td>20 to 100 ml: 5 ml 100 to 300 ml: 10 ml 300 to 1500 ml: 25 ml</td> <td>500 ml</td> </tr> <tr> <td>Rate</td> <td>4 to 100 BPM</td> <td>1 BPM</td> <td>12 BPM</td> </tr> <tr> <td>I:E</td> <td>4:1 to 1:8</td> <td>0.5</td> <td>1:2</td> </tr> <tr> <td>Plimit</td> <td>10 to 100 cmH2O</td> <td>1 cmH2O</td> <td>30 cmH2O</td> </tr> <tr> <td>PEEP</td> <td>OFF, 4 to 30 cmH2O</td> <td>1 cmH2O</td> <td>OFF</td> </tr> </tbody> </table>			Parameter	Range	Step	Default	TV	20 to 1500 ml	20 to 100 ml: 5 ml 100 to 300 ml: 10 ml 300 to 1500 ml: 25 ml	500 ml	Rate	4 to 100 BPM	1 BPM	12 BPM	I:E	4:1 to 1:8	0.5	1:2	Plimit	10 to 100 cmH2O	1 cmH2O	30 cmH2O	PEEP	OFF, 4 to 30 cmH2O	1 cmH2O	OFF	4. Compruebe el funcionamiento del soporte de tubería plástica 5. Conecte el circuito respiratorio del paciente 6. Instale o compruebe el funcionamiento de la celda de oxígeno 7. Revise el estado de la cal del canister, si es necesario haga el cambio de la cal 8. Revise el estado de los vaporizadores 9. Encienda el monitor			
Parameter	Range	Step	Default																													
TV	20 to 1500 ml	20 to 100 ml: 5 ml 100 to 300 ml: 10 ml 300 to 1500 ml: 25 ml	500 ml																													
Rate	4 to 100 BPM	1 BPM	12 BPM																													
I:E	4:1 to 1:8	0.5	1:2																													
Plimit	10 to 100 cmH2O	1 cmH2O	30 cmH2O																													
PEEP	OFF, 4 to 30 cmH2O	1 cmH2O	OFF																													
PRUEBAS DE VENTILACIÓN MANUAL 1. Ponga el sistema en espera. 2. Conecte la pieza en Y 3. Ajuste la válvula APL en 75 cmH2O 4. Conecte la bolsa de respiración manual 5. Ajuste los controles de flujo a cero 6. Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación manual. 7. Pulse el botón de flush de O2 entre 25 a 35 cmH2O 8. Compruebe el funcionamiento del fuelle 9. Presione continuar en la pantalla		2. MODO CONTROL POR PRESIÓN: 1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent] 2. Seleccione en el menú [MODO P], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio] 3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados. 4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros			10. Inicie las pruebas del sistema y siga las instrucciones que este le va indicando para las pruebas en caso de ser necesario.																											
PRUEBAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 1. Ponga el sistema en espera y conecte la pieza en Y. 2. Ajuste los controles de flujo en cero 3. Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación mecánica y puse flush de O2 hasta que se llene todo 4. Compruebe el funcionamiento del fuelle y del equipo		3. MODO VENTILACIÓN SINCRONIZADA: 1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent] 2. Seleccione en el menú [SIMV-VC], y selecciones [Ajuste modo 3. Seleccione [OK] y ajuste los valores de [RAMPT] [TRIGGER]. 4. En caso de ser necesario, ajuste los demás valores deseados 4. MODO PRESIÓN DE SOPORTE: 1. Seleccione el botón de la pantalla [Modo Vent] 2. Seleccione en el menú [PSV], y selecciones [Ajuste modo Ventilatorio] 3. Pulse el mando de control y ajuste los valores deseados. 4. Pulse el mando giratorio para confirmar parámetros			ALARMAS Y POSIBLES ERRORES <table border="1"> <tr> <td>PVR Demasiado alta/baja</td> <td>Disminuya o aumenta el ajuste de volumen o en caso de ser necesario ajuste los parámetros de las alarmas.</td> </tr> <tr> <td>FiO2 Demasiado alto/baja</td> <td>Disminuya o aumente el flujo de gas de O2, compruebe si hay que cambiar el absorbente del paciente</td> </tr> <tr> <td>Alarma de APNEA</td> <td>Aumente el volumen corriente o la frecuencia de respiración. En caso de ser necesario, aplique ventilación manual.</td> </tr> </table>				PVR Demasiado alta/baja	Disminuya o aumenta el ajuste de volumen o en caso de ser necesario ajuste los parámetros de las alarmas.	FiO2 Demasiado alto/baja	Disminuya o aumente el flujo de gas de O2, compruebe si hay que cambiar el absorbente del paciente	Alarma de APNEA	Aumente el volumen corriente o la frecuencia de respiración. En caso de ser necesario, aplique ventilación manual.																		
PVR Demasiado alta/baja	Disminuya o aumenta el ajuste de volumen o en caso de ser necesario ajuste los parámetros de las alarmas.																															
FiO2 Demasiado alto/baja	Disminuya o aumente el flujo de gas de O2, compruebe si hay que cambiar el absorbente del paciente																															
Alarma de APNEA	Aumente el volumen corriente o la frecuencia de respiración. En caso de ser necesario, aplique ventilación manual.																															
CONEXIÓN PARA MEDICIÓN DE CO2 1. Una el colector de agua al fijador del colector 2. Conecte e instale el módulo de CO2 3. Verifique su correcto funcionamiento. 4. Verifique que la línea de CO2 se encuentra instalada de manera correcta 5. En caso de ser necesario revise la trampa de agua del equipo.		El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																														
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																																
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																																
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																																
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																																
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																																
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																																
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																																