


	1	Conecte la UPS(2KV _a) a red regulada.
	2	Conecte la UPS a regleta /supresor de picos por cable AC.
	3	Conecte supresor de picos a Equipo.
	4	Encienda el equipo con el botón ON/OFF ubicado en el panel de control.
	5	Conecte las sondas al equipo por medio del conector ubicado al costado derecho del equipo.
	6	Verifique la conexión de periféricos.
	7	Seleccione el preset, sobre el cual desea realizar el estudio.



1	Botón ON/OFF	6	Arco métrico
2	Ganancias Parciales	7	Profundidad / Zoom
3	Ganancia General	8	Congelar
4	Modos de manejo	9	Llave extendida
5	Track ball	10	Touch panel

Modulo Wifi	Modulo Bluetooth	Convertidor a HDMI
		
Permite a el equipo de ultrasonido conectarse a una red WIFI de última generación 5G o red de doble banda	Permite conectar inalámbricamente tus proyecto con una PC, Laptop o Smartphone de forma sencilla.	Utiliza este convertidor para conectar dispositivos profesionales de video, como cámaras de TV, a monitores o pantallas con HDMI. Este equipo convierte señal SDI (Interfaz Digital Serial), en formato profesional SD-SDI, HD-SDI y 3G-SDI, en señal digital HDMI.

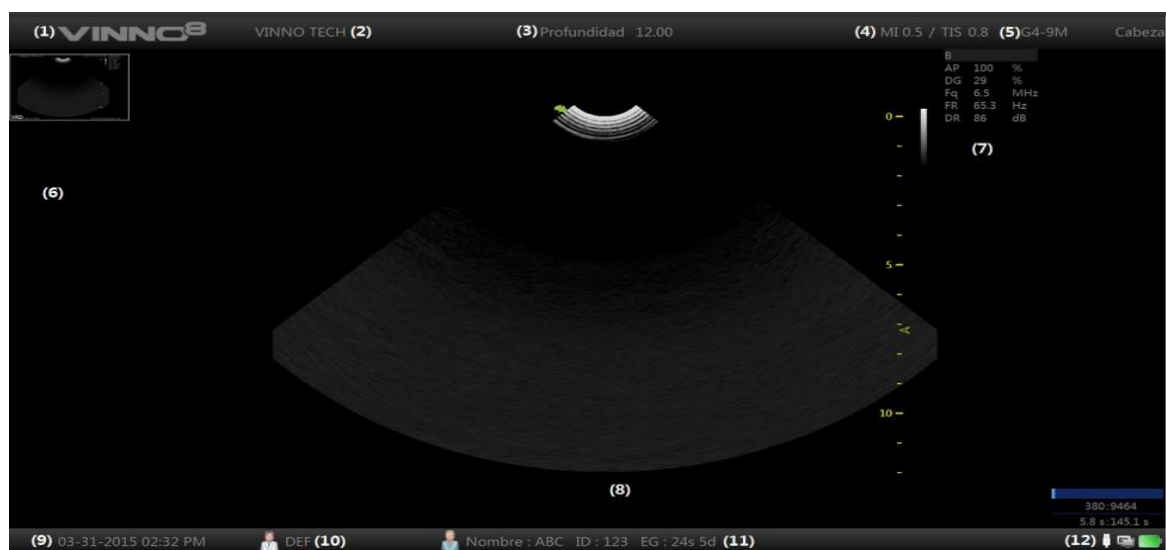

1 Vinno: marca del fabricante.	4 MI, TI: indicar el tamaño de Acústica y Mecánica índice térmico.	7 Este campo indica algunos de los parámetros como ganancia digital, frecuencia, velocidad de fotogramas, la potencia de salida acústica. Los parámetros mostrados son diferentes en diferentes modos.	10 Perf. Médico: este campo muestra el nombre del médico que realiza.
2 Nombre del Hospital: puede ser modificado por el operador para introducir un nombre en particular. El valor por defecto está vacío.	5 Sonda y aplicación: muestran lo que se seleccionan la sonda y aplicación actual y utilizados	8 Área de imagen: es el campo donde se muestra la imagen, incluyendo todas las imágenes del modo como la B, CF / PDI, M, y PW / CW.	11 Información para el paciente: este campo muestra el nombre del paciente actual y de identificación. Si hay alguna información de entrada OB cuando la nueva paciente, pantalla "GA" también.
3 Profundidad: indica la profundidad de la imagen de la exploración está alcanzando.	6 Clip imágenes de mesa: este campo muestra el lote de las imágenes almacenadas temporalmente, que se almacenan en el disco duro.	9 Fecha, Hora: este campo indica la fecha y hora actuales. Esta fecha y hora se pueden modificar en el menú de configuración del sistema.	12 Estado de USB / Red: Mostrar el icono de USB, del servidor de archivos, de red y de Bluetooth.