


Guía Rápida Bascula De Columna 703S

Descripción General del Equipo

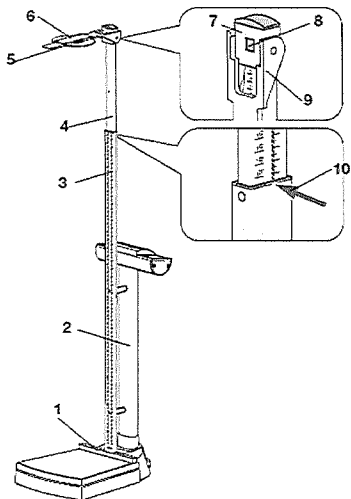

1. Tope para los Talones
2. Columna
3. Elemento telescópico inferior
4. Elemento telescópico superior
5. lengüeta de medición
6. Ensanchamiento de la lengüeta de medición
7. Corredera para la cabeza
8. Enclavamientos
9. Canto de lectura 1
10. Canto de lectura 2

Operación Básica

Medir personas por debajo de 130,5 cm de estatura


1. Desenclavar la corredera para la cabeza presionando sobre el enclavamiento.
2. Bascular la lengüeta de medición hacia arriba hasta que encaje en posición horizontal.
3. Pedir al paciente que se coloque debajo de la lengüeta de medición.
 - Posicionar la espalda hacia el metro de longitudes
 - Postura recta del cuerpo
 - Talones en el tope para los talones
 - Cabeza recta: Línea de Frankfurt paralela a la lengüeta de medición
4. Desplazar hacia abajo la corredera para la cabeza en el elemento telescópico inferior hasta que la lengüeta de medición apoye en la cabeza del paciente.

5. Leer el resultado de la medición en el canto de lectura (canto de lectura 1) de la corredera para la cabeza (en este caso: 113,5 cm).

6. Pedir al paciente que se separe del metro de longitudes.

7. Abatir la lengüeta de medición.


8. Desplazar la corredera para la cabeza hacia arriba hasta que se enclave.

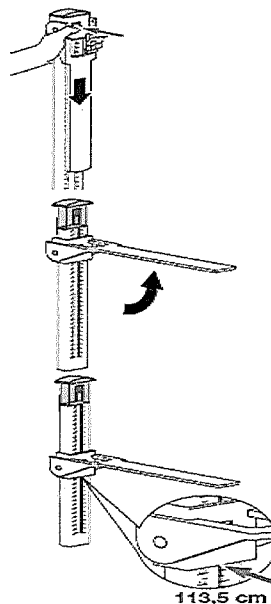

Medir personas a partir de 130,5 cm de estatura

1. Bascular la lengüeta de medición hacia arriba hasta que encaje en posición horizontal.
2. Extraer el elemento telescópico superior hasta que el paciente se pueda colocar cómodamente debajo de la lengüeta de medición.
3. Pedir al paciente que se coloque debajo de la lengüeta de medición.
 - Posicionar la espalda hacia el metro de longitudes
 - Postura recta del cuerpo
 - Talones en el tope para los talones
 - Cabeza recta: Línea de Frankfurt paralela a la lengüeta de medición
4. Desplazar hacia abajo el elemento telescópico superior hasta que la lengüeta de medición se apoye en la cabeza del paciente.
5. Leer el resultado de la medición en el canto de lectura (canto de lectura 2) del elemento telescópico inferior (en este caso: 141, 5 cm).

6. Pedir al paciente que se separe del metro de longitudes.
7. Desplazar el elemento telescópico superior a la posición más baja.
8. Abatir la lengüeta de medición.

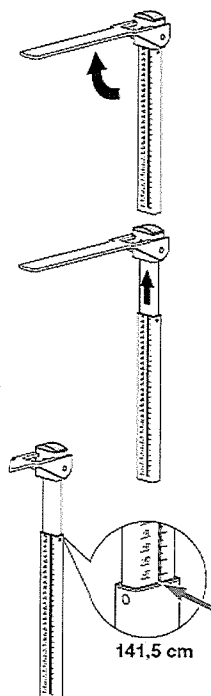

Intervalo	Componente
Antes de cada medición	- Plataforma de pesaje - Corredera para la cabeza con lengüeta de medición
Después de cada medición	- Plataforma de pesaje - Corredera para la cabeza con lengüeta de medición
En caso de necesidad	- Columna y cabezal indicador de la báscula - Elementos telescópicos del metro de longitudes - Ensanchamiento de la lengüeta de medición (si hubiera)

Esterilización

No está permitida la esterilización del aparato.

Limpieza

Si es necesario, limpie la superficie del aparato con un paño suave, humedecido en su caso con una lejía jabonosa suave.

Desinfección

1. Cerciérese de que su desinfectante sea apropiado para superficies sensibles y vidrio acrílico.
2. Siga las instrucciones de uso del desinfectante.
3. Desinfecte el aparato:
 - Humedezca un paño suave con desinfectante y limpie el aparato con él.
 - Siga los intervalos, ver tabla.