

|                                                                                   |                                                                            |                         |                |               |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>"EVARISTO GARCIA " E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |                |               |            |  |
|                                                                                   |                                                                            |                         | <b>VERSIÓN</b> | <b>PÁGINA</b> | <b>DE</b>  |  |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b>     | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |  |




**MONITOR DE SIGNOS VITALES**

**MARCA:** NIHON KOHDEN  
**MODELO:** BSM-2303K


### Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

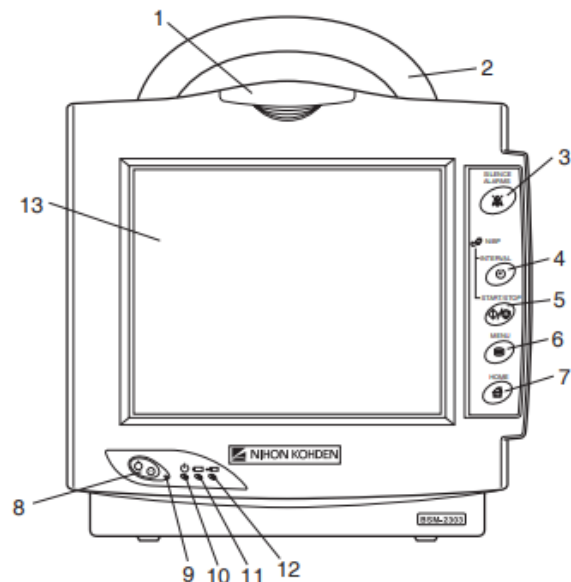

| No. | Nombre                       | No. | Nombre                        |
|-----|------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1   | Indicador de alarma          | 7   | TECLA HOME                    |
| 2   | Asa                          | 8   | Interruptor de corriente      |
| 3   | Tecla SILENCIAR ALARMAS      | 9   | Luz de encendido              |
| 4   | Tecla INTERVALOS PSNI (NIBP) | 10  | Luz de encendido de CA        |
| 5   | Tecla PSNI START/STOP (NIBP) | 11  | Luz de batería                |
| 6   | TECLA MENU                   | 12  | Indicador de carga de batería |

|                                                                                   |                                                                            |                  |         |        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-----|--|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | CÓDIGO           |         |        |     |  |
|                                                                                   |                                                                            |                  | VERSIÓN | PÁGINA | DE  |  |
|                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                                                         | FECHA DE EMISIÓN | DÍA     | MES    | AÑO |  |
|                                                                                   |                                                                            |                  |         |        |     |  |

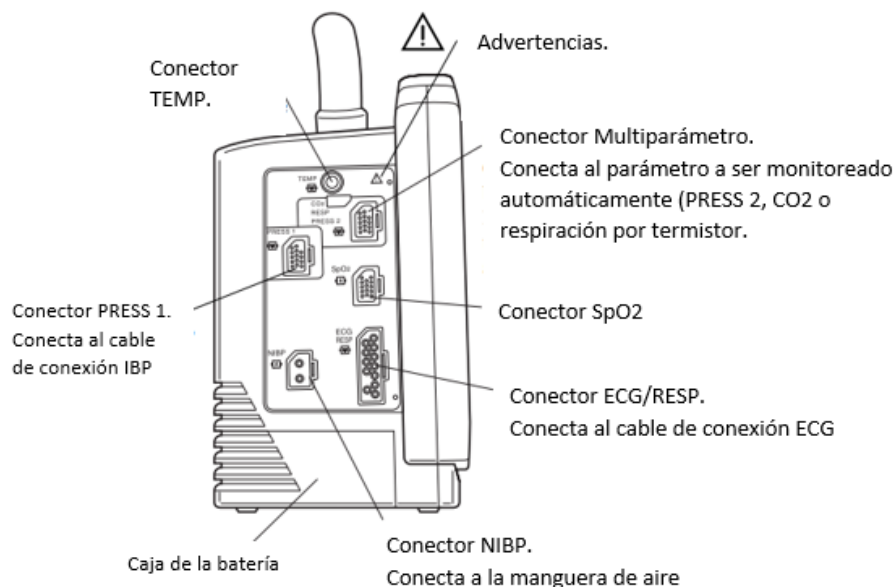

### Ingresar nuevo paciente

- Antes de ingresar un nuevo paciente, borre la información del anterior, seleccione [MENU] → [INFO PACIENTE] → [DELETE ALL], de no hacer esto los datos del paciente anterior se pueden confundir con los del actual.
- En la misma ventana [INFO PACIENTE] ingrese los datos del paciente actual.
- En caso tal de que el paciente tenga marcapasos, active la detección estimulación (pacing detection) de la siguiente forma [MENU] → pulse la tecla [ECG] → [ALARMAS VITALES] → [OTROS VALORES] → selecciones [ACTIV] en la sección [DETECCION ESTIMULACION] (columna de la derecha).

### Monitorización ECG/RESP:

- Seleccione el cable de paciente.
- Conecte el cable de paciente que tiene el electrodo al cable de conexión para ECG y enchufe este al conector ECG/RESP del monitor.
- Prepare la piel del paciente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor este encendido y preparado para monitorizar.
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos, asegúrese de que aparezca el mensaje “ESTIMULACION”, de lo contrario revise la sección “Recomendaciones antes de usar”
- La respiración se puede medir por el método de impedancia cuando los electrodos RA y LL o RA y LA están colocados.

### Monitorización de SpO2:

- Seleccione la sonda acorde al paciente.
- Conecte la sonda al cable de conexión de SpO2 y el cable de conexión al conector de SpO2 del monitor.
- Fije la sonda al paciente.

### Monitorización de la PSNI (NIBP):

- Elija el manguito adecuado para el tipo de paciente.
- Conecte el manguito a la manguera de aire (introduzca la junta del manguito en la manguera de aire y gírela en sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic) y esta al conector NIBP del monitor. Para desconectar el manguito gire la junta del manguito en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Coloque el manguito en el paciente de modo que la marca este alineada con la arteria del paciente. A su vez, asegúrese

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

de que el manguito este a la misma altura que el corazón del paciente.

- Establezca los valores necesarios.
- Comience el proceso de medición, para esto presione la tecla [PSNI START/STOP] para llevar a cabo una única medición.

#### Monitorización de temperatura:

- Seleccione el sensor de temperatura de tipo y tamaño adecuado.
- Enchufe el cable de la sonda al conector TEMP del monitor.
- Ajuste el sensor de temperatura al paciente de manera confiable.
- Modifique los valores necesarios.
- Inicie la monitorización.

#### SÍMBOLOS



ON/OFF



Menú



Funcionamiento  
con batería



Home



Carga de la  
batería



Suspensión de  
alarma

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

| Parte/Accesorio | Limpieza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor         | <ul style="list-style-type: none"> <li>No use un paño seco o abrasivo ni detergentes ácidos o alcalinos.</li> <li>Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con detergente neutro y escurrido.</li> <li>Al terminar limpie el monitor utilice un paño suave y seco para retirar los restos de detergente.</li> <li>Dejar secar al aire.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| ECG/RESP.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>No toque el pin del conector ni moje el conector.</li> <li>Frote el cable del electrodo y el cable de conexión con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol.</li> <li>Seque con una gana o un paño seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| SpO2            | <ul style="list-style-type: none"> <li>No toque los pines del conector ni moje el conector.</li> <li>Frote el cable de conexión con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol.</li> <li>Seque con una gana o un paño seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PSNI (NIBP)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>No moje el conector, no permita que entre líquido en el manguito de goma.</li> <li>Tire cuidadosamente del manguito para extraerlo de la cubierta de tela.</li> <li>Lave la cubierta con detergente neutro y agua. Séquelo bien.</li> <li>Frote el manguito de goma con un paño suave o con algodón impregnado en alcohol desinfectante. Séquelo bien.</li> <li>Para limpiar los tubos, frote con un paño suave humedecido con detergente neutro y agua a unos 40°C.</li> </ul> |

### RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

### ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

|                                                                                   |                                                                            |                         |            |               |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
|  | <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE</b><br><b>“EVARISTO GARCIA “ E.S.E</b> | <b>CÓDIGO</b>           |            |               |            |           |
|                                                                                   |                                                                            | <b>VERSIÓN</b>          |            | <b>PÁGINA</b> |            | <b>DE</b> |
|                                                                                   | <b>NOMBRE DEL FORMATO</b>                                                  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b> | <b>DÍA</b> | <b>MES</b>    | <b>AÑO</b> |           |

## FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

| FALLA                                                   | POSIBLE CAUSA                                                                                                                  | ACCIÓN POR REALIZAR                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El equipo no enciende.</b>                           | Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.                                                               | Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.                                                                    |
|                                                         | Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.                                            | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
| <b>Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo</b> | Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta. | Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión. |
| <b>Medición falsa de los parámetros</b>                 | Ruptura o falso contacto de los cables.                                                                                        | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.                                                                                                            |
|                                                         | Incorrecta colocación de los electrodos ECG                                                                                    | Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.                                                                                                     |
| <b>Descargas eléctricas en el paciente</b>              | Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.         | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
|                                                         | Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.                                                               | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |
| <b>Deterioro de la salud del paciente.</b>              | Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.                                                                 | Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias                                                                                                             |