


 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Excmo. García U.S.F.	 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: DEA	CÓDIGO: NA
			MARCA: SCHILLER	VERSIÓN: 1
			MODELO: FRED EASY	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022

USO DEL EQUIPO



Dispositivo utilizado para restablecer el ritmo cardiaco de una paciente que ha sufrido un episodio de paro cardiorespiratorio, esto mediante la emisión de pulsos bifásicos de desfibrilación.

POSICIONAMIENTO DE LOS ELECTRODOS

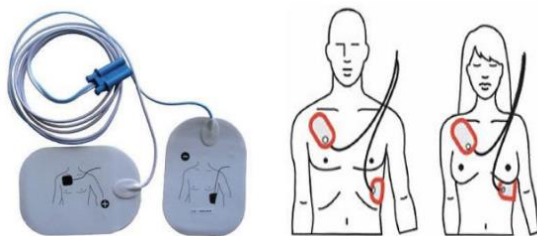

Apex (inferior) + esternón (superior).

PARTES DEL EQUIPO



DIAGRAMA DE PREPARACIÓN:



- Identifique el equipo.
- Instale la batería como se indica.
- Conecte los electrodos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- **Reducido tiempo de carga:** < 10 segundos
- **Pantalla LCD de fácil uso:**
Presentación de tiempo, número de descargas, capacidad de memoria y batería, tipo de electrodo, texto con instrucciones.
- **Análisis seguro y eficaz** para detectar la fibrilación.
- **Configuración estándar de energía:**
Amplio abanico de energía seleccionable:
- Adultos: 1 a 150 J
- Niños: 1 a 70 J (cambio automático al conectar los electrodos pediátricos)
- **ECG y registro de eventos.**
- **Batería de alto rendimiento:**
- Li-MnO₂ : 180 descargas de 150 J ó 6 hrs, 30 min. encendido (sin descargas), apagado: 5 años.
- NiCd (opción): 45 descargas de 150 J ó 1 hr, 30 min. encendido (sin descargas).
- **Auto-test automático.**
- **Gran cantidad de material educativo** disponible (incluyendo un aparato de entrenamiento).

CLASIFICACIÓN DE RIESGO



Clasificación IIB de Riesgo alto.

  		GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: DEA		CÓDIGO: NA	
MARCA: SCHILLER		VERSIÓN: 1	
MODELO: FRED EASY		FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022	

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 	SÍMBOLOS EN LA PANTALLA	ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO 
1) Prepare al paciente sobre una superficie plana y remueva las prendas. 2) Encienda el dispositivo por medio del botón de color verde. 3) Conecte los electrodos en el puerto correspondiente. 4) Coloque los electrodos sobre el pecho del paciente como se indicó previamente. 5) Realice una toma/análisis electrocardiográfico con base en el modo (automático o semiautomático). 6) Realice RCP, esto mediante 2 ventilaciones luego de 30 compresiones. 7) Si la reanimación se realizó correctamente, apague el equipo. 8) Desconecte los parches del paciente. 9) Deseche los parches del paciente.	 Numero de choques desde que el dispositivo es encendido  Capacidad suficiente de batería  Batería agotada  Tarjeta de memoria detectada y porcentaje ocupado  Tarjeta de memoria no reconocida  Parche adulto detectado  Tiempo transcurrido desde que el dispositivo fue encendido RECOMENDACIONES 1) No exponga la batería a altas temperaturas. 2) La batería debe mantenerse a una T° de 15°C a 25°C. 3) Retire los electrodos y la batería antes de limpiar. 4) No intente realizarle algún tipo de actividad a la batería. 5) Los electrodos se sitúan en piel seca, si el paciente presenta grandes vellosidades se debe de rasurar.	1) No utilizar el equipo en áreas con riesgo de explosión. 2) No utilice baterías recargables en el dispositivo. 3) Si va a retirar la batería primero apague el dispositivo. 4) Utilice guantes durante el proceso de RCP. 5) Ubique al paciente en una superficie que se encuentre aislada de la electricidad. 6) Verifique que no exista conexión entre el paciente y terceros durante la lectura de ECG. 7) Por tenga contacto directo con el paciente durante la descarga. 8) No utilice objetos que puedan causar interferencia eléctrica o electromagnética. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.