



Guía rápida

Sistemas de diagnóstico por ultrasonido de la Serie Affiniti

Español

PHILIPS

Contenido

Para facilitar su consulta, cada sección está codificada con un color. El color del título de cada sección se correlaciona con la franja de color en esa sección.

Descripción general del sistema

Componentes del sistema	5
Portacables	6
Puertos	7
Periféricos (opcionales)	8

Controles

Pantalla del monitor	9
Panel de control	10
Teclas virtuales	11
Controles e icono del ratón estacionario	12
Pantalla táctil	13

Realizar un examen

Iniciar un examen de paciente	15
Seleccionar el transductor, la preconfiguración y el modo de tratamiento de imágenes	16
Tratamiento de imágenes por contraste	22
Adquirir imágenes individuales y secuencias	23
Imprimir imágenes	23
Revisar imágenes y secuencias	24
Finalizar examen	24
Exportar exámenes e imágenes	25

Optimización de imágenes

Ganancia de imágenes	27
Profundidad	27
Enfoque	27
Zoom	28
Color	28
Optimización 2D	29
Tratamiento de imágenes mediante armónicos tisulares	29

Mediciones y cálculos

Mediciones no rotuladas	31
Mediciones y cálculos rotulados	35

Anotaciones

Escribir anotaciones	39
Añadir rótulos de anotación y flechas	40
Borrar rótulos y flechas	42
Utilizar marcadores anatómicos	43

Protocolos

Iniciar un protocolo	45
Crear un nuevo protocolo de examen	45
Crear un nuevo protocolo de ecocardiografía de estrés	47

Informes

Ver y editar informes	49
-----------------------------	----

Gestión de energía

Característica de gestión de energía	51
Batería e indicadores del estado de alimentación de CA	51
Información de la batería	52
Modo reposo	52

Sugerencias

Trasladar el sistema	53
Instalar el sistema después de trasladarlo	54
Escáner de código de barras	55
Asistencia técnica para el sistema	56

Acerca de esta guía

Utilice esta *Guía rápida* para ayudarle a realizar un examen ultrasónico paso a paso. Para obtener más información, consulte la *Ayuda* del sistema o el *Manual del usuario*.

Convenciones

En esta *Guía rápida* se utilizan los siguientes términos:


Término	Descripción o acción
Imagen/área de imágenes	Área de exploración ultrasónica en la pantalla de imágenes
Pantalla de imágenes	Información mostrada en la pantalla del monitor
Seleccionar, deseleccionar	Mover el puntero o cursor hasta un elemento y pulsar el botón izquierdo o derecho del ratón estacionario para activar o desactivar el elemento.

En esta *Guía rápida* se utilizan los siguientes estilos de numeración:

Estilo	Descripción
	Indica un componente del sistema o un elemento en pantalla.
	Indica un paso y la ubicación del control o el componente del sistema asociado al paso mostrado en una ilustración.
	Indica un paso sin ninguna leyenda en una ilustración.

Componentes del sistema

- 1 Monitor
- 2 Brazo articulado (sistemas Affiniti 70 y opcional en los Affiniti 50)
- 3 Control de encendido/apagado
- 4 Enchufe para transductor de ECG/visualización fisiológica
- 5 Bahía para periféricos
- 6 Enchufe para transductor de Doppler
- 7 Bandeja para enrollar cables de los transductores
- 8 Traba y freno de la rueda
- 9 Enchufes de los transductores
- 10 Panel de control
- 11 Pantalla táctil

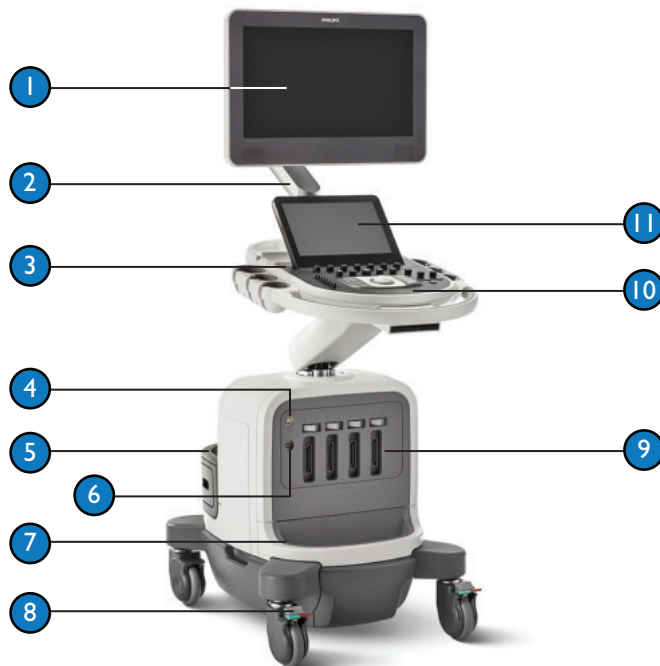

Se muestra el sistema Affiniti 70

Portacables

Los sistemas de ultrasonido serie Affiniti ofrecen una solución de portacables única que mantiene apartados los cables de los transductores y sostiene el peso de los cables mientras se utilizan los transductores.


En el *Manual del usuario* del sistema encontrará información sobre cómo conectar, utilizar y limpiar los portacables.



Se muestra el sistema Affiniti 70


Puertos

- ❶ Puertos USB (uno en cada lado del panel de control, cuatro detrás del panel lateral)
- ❷ Puerto de red
- ❸ Puerto para monitor externo (DisplayPort)
- ❹ Puerto para monitor externo (S-vídeo)
- ❺ Puerto para impresora de vídeo externa

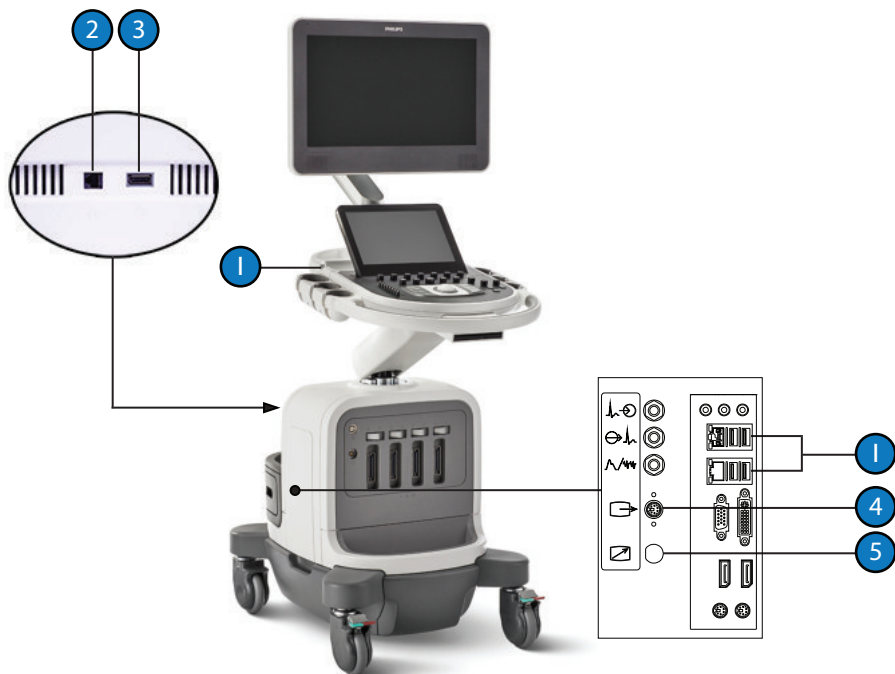

Periféricos (opcionales)

- 1 Escáner de código de barras (se conecta a cualquier puerto USB)
- 2 Impresora blanco y negro de imágenes, formato pequeño (instalada en el canto del panel de control)
- 3 Impresora blanco y negro de imágenes, formato grande (instalada debajo o en el canto del panel de control)
- 4 Grabador DVD (instalado en la bahía para periféricos)
- 5 Impresora blanco y negro de imágenes externa (se conecta detrás del panel lateral)
- 6 Unidad de DVD (instalada debajo del asa)

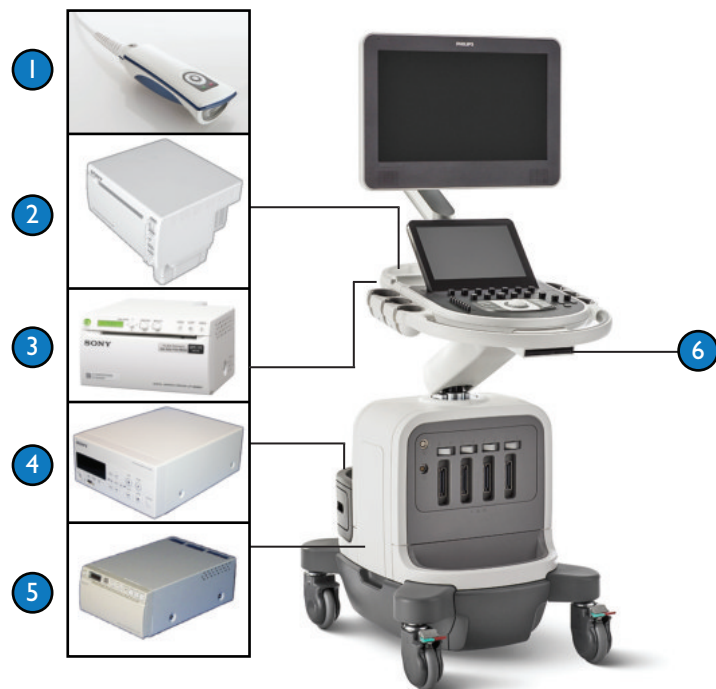


Pantalla del monitor

- 1 Barra del paciente
- 2 Panel izquierdo
- 3 Área de imágenes
- 4 Panel derecho
- 5 Herramientas, estado del ratón estacionario e iconos


Cuando se selecciona la visualización VistaMáx, se ocultan los paneles izquierdo y derecho (a menos que se anclen en su lugar) y queda minimizado el panel de herramientas, estado del ratón estacionario e iconos para que se muestren sólo los rótulos de las opciones de arbitraje del ratón.

Cuando los paneles izquierdo y derecho no se han anclado y permanecen ocultos, para hacer que se muestren sostenga el puntero sobre las áreas izquierda o derecha de la pantalla.

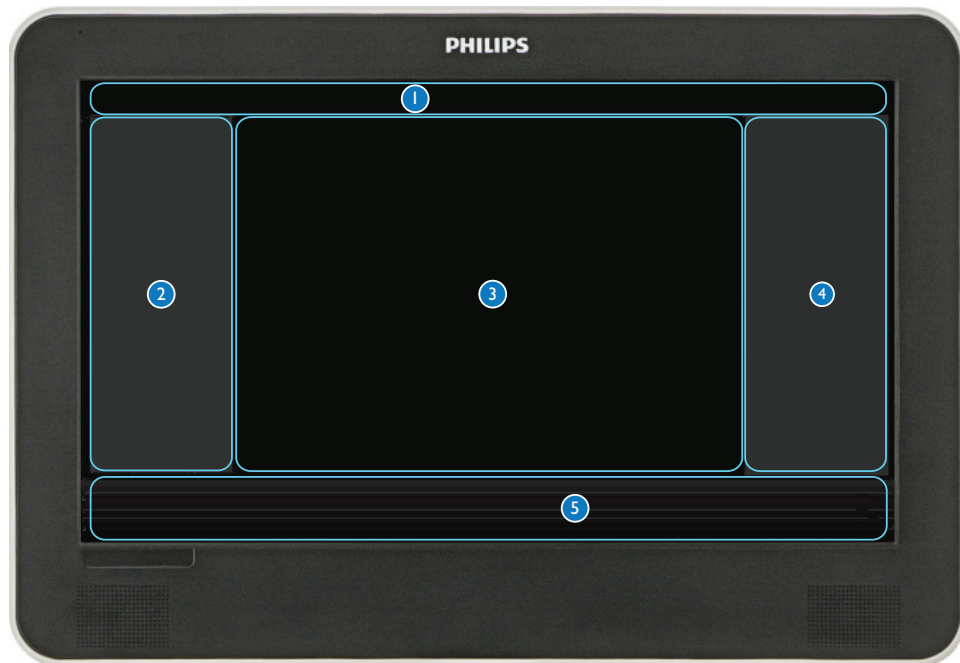

Panel de control

- 1 Pantalla táctil
- 2 Control de encendido/apagado
- 3 Control del modo reposo
- 4 Controles de teclas virtuales
- 5 Controles de modos de tratamiento de imágenes
- 6 Controles deslizantes de CTG
- 7 Controles **Measure**, **ABC Label**, **Erase** y **Pointer**.
- 8 Ratón estacionario y botones del ratón
- 9 Controles **iSCAN**, **Acquire 1** y **Freeze**
- 10 Controles **Dual**, **Depth**, **Focus**, **Acquire 2** y **Acquire 3**
- 11 Control **Zoom**
- 12 Control **Support**

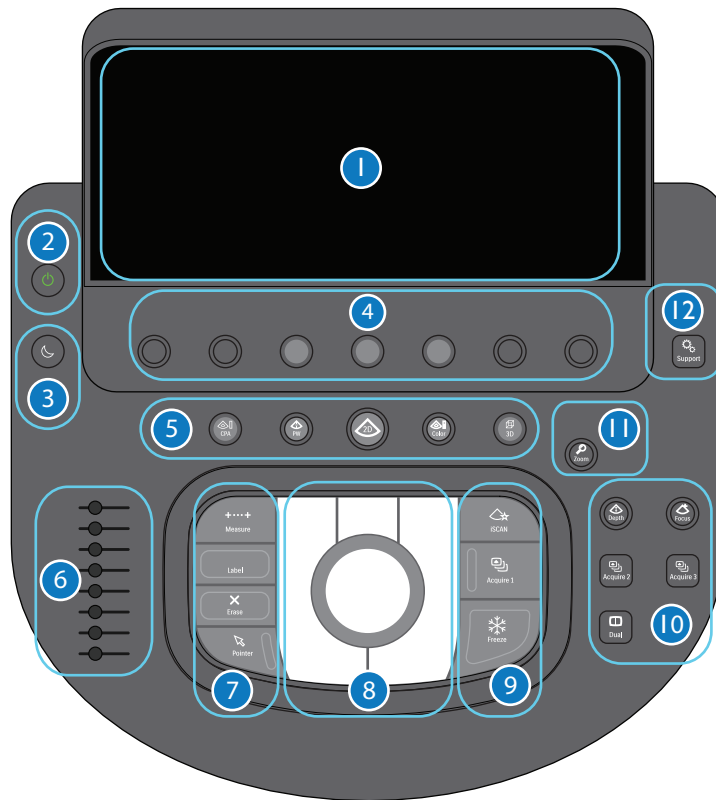

Teclas virtuales

Los controles de teclas virtuales se sitúan a lo largo de la parte de arriba del panel de control. Los correspondientes rótulos de las teclas virtuales aparecen en la parte inferior de la pantalla de imágenes. Los rótulos indican las funciones disponibles, las cuales dependen del modo, preconfiguración y transductor activos.

- Tocar un rótulo de tecla virtual selecciona una función. También se puede pulsar un control de tecla virtual para alternar entre las funciones disponibles.
- Girar el control de una tecla virtual define el valor asignado a la función seleccionada.
- Al tocar el indicador de página aparece la siguiente página de controles táctiles, si hay alguna disponible. También se puede deslizar la punta del dedo a lo ancho de la pantalla táctil para moverse entre páginas.

- 1 Controles de teclas virtuales
- 2 Rótulos de teclas virtuales
- 3 Indicador de páginas de la pantalla táctil



Por ejemplo:

- Para activar la tecla virtual **Opt. 2D**, toque el rótulo de tecla virtual **Opt. 2D** o pulse el control giratorio (control de tecla virtual) debajo del rótulo.
- Para cambiar entre los ajustes de optimización disponibles, gire el control de tecla virtual **Opt. 2D**.


Controles e icono del ratón estacionario

- El icono de las opciones de arbitraje del ratón estacionario, en la pantalla de imágenes, indica las funciones que el ratón ejecuta al pulsarse sus botones y cambia para reflejar la tarea actual.
- En los menús, mediante la esfera del ratón estacionario desplace el puntero hasta un elemento a fin de seleccionarlo o deseleccionarlo y después pulse el botón izquierdo o derecho del ratón.
- Durante las mediciones, los botones del ratón estacionario tienen las siguientes funciones por omisión, a menos que se cambien en las configuraciones de **Análisis**:
 - Izquierdo: cambiar entre puntos de anclaje
 - Del medio: completar mediciones
 - Derecho: cambiar entre puntos de anclaje o iniciar una nueva medición, dependiendo de la aplicación clínica actual

- 1 Ratón estacionario y botones del ratón
- 2 Controles de uso frecuente
- 3 Icono de opciones de arbitraje del ratón estacionario (con rótulos para las funciones de los botones)

NOTE

En la visualización VistaMáx, el que se muestre el icono de las opciones de arbitraje del ratón estacionario dependerá del ajuste de **Estilo de leyenda del ratón para VistaMáx** en las configuraciones.

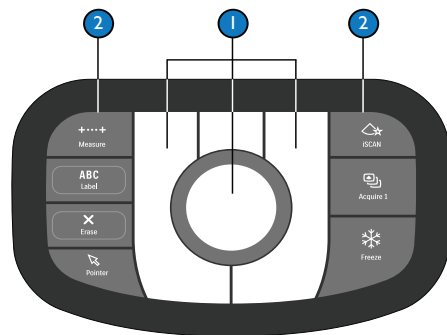


Pantalla táctil

- 1 Área del flujo de trabajo
- 2 Fichas
- 3 Controles
- 4 Rótulos de teclas virtuales
- 5 Transductores y preconfiguraciones
- 6 Herramientas
- 7 Controles de submodo (como **Contraste**, **Biopsia** o **Panorám.**)
- 8 Teclas virtuales de propósito general
- 9 Indicador de páginas de la pantalla táctil
- 10 Teclas virtuales dinámicas para el modo de tratamiento de imágenes



Iniciar un examen de paciente

Al iniciar un examen se deberán rellenar los datos del paciente, seleccionar un transductor y seleccionar un procedimiento y tipo de estudio.

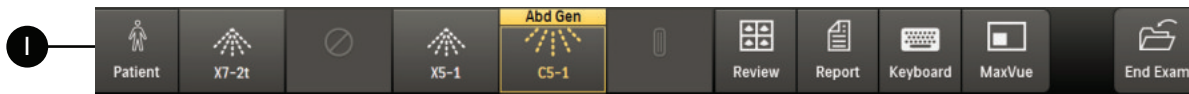

- ❶ Para iniciar un examen, toque **Paciente**.
- ❷ Si el paciente es nuevo, introduzca los datos del paciente (el apellido es necesario). También puede introducir los datos del paciente mediante un código de barras escaneado (consulte “Escáner de código de barras” en la página 55). Para pasar entre los campos, utilice la tecla **Tab** o el ratón estacionario.
- ❸ Seleccione un **Procedim.** y verifique el **Tipo estudio** y después introduzca cualquier historial del paciente que se relacione con el estudio.
- ❹ Haga clic en **Terminado**. Ahora se pueden seleccionar el transductor y la preconfiguración. Consulte “Seleccionar el transductor, la preconfiguración y el modo de tratamiento de imágenes” en la página 16.

Acerca del inicio de exámenes, tome en cuenta lo siguiente:

- Si no están disponibles los datos del paciente, utilice **ID temporal** para iniciar el examen. Se necesitan datos del paciente o una ID temporal para adquirir y guardar información.
- Los datos del paciente se pueden introducir dentro de las 24 horas a menos que el sistema esté configurado para **Enviar al adquirir** o para la exportación por lotes. Consulte la *Ayuda* del sistema.
- Si el sistema está conectado a un sistema de información de pacientes en la red, se puede seleccionar el paciente en la lista de trabajo de la modalidad.
- Al final del examen, para guardar los datos del estudio y salir del examen, toque **Fin exam.**

Seleccionar el transductor, la preconfiguración y el modo de tratamiento de imágenes

Las preconfiguraciones incluyen la optimización por omisión de imágenes, opciones de cálculo y ajustes de modo. Las preconfiguraciones disponibles dependen del transductor. Durante un examen, se puede cambiar de transductor y de preconfiguración según se necesite.


- 1 Conecte un transductor. En la parte superior de la pantalla táctil aparecen los nombres de todos los transductores conectados.
- 2 Toque el nombre de un transductor.
- 3 Toque una de las aplicaciones clínicas o preconfiguraciones que se muestran.

Los transductores y preconfiguraciones activos quedan resaltados en color ámbar.

Modos de tratamiento de imágenes activados desde el panel de control

- 1 Sistemas con opciones cardíacas: **CW** (Doppler continuo) muestra un espectro de información de flujo sanguíneo a lo largo de una línea de interrogación. Sistemas sin opciones cardíacas: **CPA** (Color Power Angio) proporciona información sobre amplitud de color (excluyendo velocidad).

- 2 **PW** (Doppler pulsado) muestra un espectro de información de velocidad de flujo sanguíneo utilizando un volumen de muestra discreto en una ubicación específica.
- 3 **2D** muestra una imagen 2D y vuelve al tratamiento de imágenes 2D desde cualquier modo.
- 4 **Color** muestra velocidades de color direccional con una imagen 2D.
- 5 **3D** muestra una ficha de pantalla táctil donde se enumeran los modos 3D disponibles, los cuales dependen del transductor y la preconfiguración activos, y, en exámenes de cardiología, muestra automáticamente una imagen 3D.

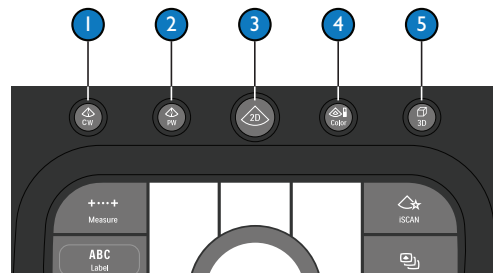

Para utilizar el tratamiento de imágenes 2D, color o CPA:

- ① Pulse **2D** o **Color**, o según como se haya configurado el sistema, pulse o toque **CPA**.
- ② En color o CPA, ajuste el tamaño y la posición del recuadro de ROI mediante el ratón estacionario.
- ③ Para optimizar la imagen, utilice las teclas virtuales.

Para utilizar Doppler pulsado (PW) o Doppler continuo (CW):

- ① Pulse **PW** o (en sistemas con opciones cardíacas) **CW**.
- ② Para colocar el volumen de muestra de Doppler pulsado (punto de interrogación), utilice el ratón estacionario.
- ③ Para activar la visualización espectral, pulse el botón del medio del ratón estacionario.
- ④ Para optimizar la pantalla, utilice las teclas virtuales.
- ⑤ Para realizar mediciones, pulse **Freeze** y comience una medición.
- ⑥ Para salir de Doppler, pulse **2D**.

Para iniciar el tratamiento de imágenes 3D:

- ① Pulse **3D**.
- ② Consulte “Utilizar el tratamiento de imágenes 3D” en la página 21.

NOTA


Cuando se activa 3D desde 2D, la posición lateral de la ROI 3D en color hereda sus propiedades de la posición de la ROI 2D en color.

Modos de tratamiento de imágenes activados desde la pantalla táctil

- 1 **Elastografía** (elastografía de deformación y de onda de cizalla hepática) muestra información (un elastograma) sobre la rigidez o elasticidad de un tejido. Sólo está disponible con ciertos transductores. Encontrará información detallada y procedimientos completos en la *Ayuda* del sistema.
- 2 **Modo M** muestrea a través de la imagen 2D para presentar estructuras de movimiento en función del tiempo sobre una visualización de barrido.
- 3 **CPA** (tratamiento de imágenes Color Power Angio) proporciona información sobre amplitud de color (no la velocidad). CPA puede estar en el panel de control, en vez de la pantalla táctil, según cuál sea la configuración de su sistema.
- 4 **TDI** (tratamiento de imágenes Doppler tisular) muestra información de motilidad tisular para imágenes 2D. Se puede utilizar conjuntamente con Doppler pulsado y color.

NOTA

Algunos modos de tratamiento de imágenes pueden no estar disponibles, dependiendo de la configuración de su sistema.

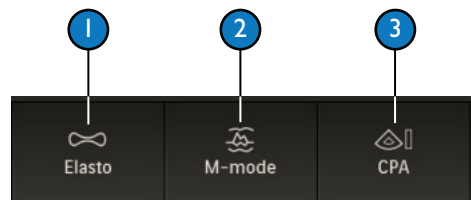

Para utilizar el modo M:

- 1 Toque **Modo M**.
- 2 Desplace la línea M hasta la anatomía de interés mediante el ratón estacionario.
- 3 En aplicaciones no cardíacas, pulse el botón del medio del ratón estacionario para visualizar el trazo. En aplicaciones cardíacas, el trazo aparece automáticamente.
- 4 Utilice el ratón estacionario para ajustar la línea M.
- 5 Para realizar mediciones, pulse **Freeze** y comience una medición.

Para utilizar el tratamiento de imágenes CPA:

- ① Pulse **CPA**.
- ② Ajuste el tamaño y la posición del recuadro de ROI mediante el ratón estacionario.
- ③ Gire **2D** para ajustar la ganancia 2D y gire **CPA** para ajustar la ganancia CPA.

Para utilizar TDI:

- ① Optimice una imagen 2D y después siga uno de estos procedimientos:
 - Para iniciar Doppler tisular 2D, toque **TDI**.
 - Para iniciar Doppler tisular en modo M, toque **TDI** y después toque **Modo M**.
 - Para iniciar Doppler tisular PW, toque **TDI**, coloque el cursor y después pulse **PW**.
- ② Para colocar la línea de interrogación, utilice el ratón estacionario.
- ③ Para optimizar la imagen, utilice las teclas virtuales.

Para iniciar la elastografía de compresión (deformación) o de onda de cizalla:

- ① Seleccione un transductor y una preconfiguración que sean compatibles con elastografía.
- ② Toque **Elastografía**.
- ③ Siga uno de estos procedimientos:
 - Para iniciar la elastografía de compresión (deformación), toque **Deform. elastogr.**, si es que aún no está seleccionada.
 - Para iniciar la elastografía de onda de cizalla, toque **PQ de elast.**
- ④ En la *Ayuda* del sistema encontrará información sobre cómo completar mediciones de elastografía y guardar imágenes y resultados.

Modos de tratamiento de imágenes 3D y xPlane

NOTA

Algunos modos de tratamiento de imágenes 3D pueden no estar disponibles, dependiendo de la configuración de su sistema, el transductor y la preconfiguración.

- **3D** muestra datos de volumen 3D procedentes de una adquisición de barrido único.
- **4D** muestra una adquisición continua de múltiples volúmenes 3D que captura datos 3D y movimiento (4D).
- **iSTIC** muestra múltiples ciclos cardíacos fetales en un barrido único, adquiridos con un transductor xMATRIIX o mecánico; el sistema procesa entonces los datos adquiridos para calcular la frecuencia cardíaca fetal y crear una secuencia Cineloop de volumen de un solo ciclo cardíaco compuesto.
- **STIC** muestra múltiples ciclos cardíacos fetales en un barrido único que se ha adquirido con un transductor mecánico. El sistema procesa los datos adquiridos para calcular la frecuencia cardíaca fetal y crear una secuencia Cineloop de volumen de un solo ciclo cardíaco compuesto.
- **Vista previa 3D zoom** muestra la imagen en la vista previa de xPlane. También se utiliza para entrar en Zoom 3D desde el zoom bidimensional o el de xPlane.
- **Vol. completo** muestra un volumen tan ancho en el plano azimutal como en el plano de inclinación vertical, lo que permite capturar todo el corazón en el volumen.
- **3D a mano alzada** presenta una serie de fotogramas 2D sin calibrar en la memoria de Cineloop. Después de la adquisición, el sistema renderiza una imagen de volumen 3D a partir de los fotogramas 2D.
- **Panorámica 3D** muestra una vista extendida de un volumen 3D, lo que vuelve posible habilitar la adquisición de más anatomía en un solo volumen. Pueden llevarse a cabo mediciones no rotuladas en la vista de renderización de volumen y mediciones rotuladas en las vistas multiplanares.
- **xPlane** muestra simultáneamente dos imágenes ortogonales en tiempo real.

Utilizar el tratamiento de imágenes 3D

Para realizar un tratamiento de imágenes Live 3D con un transductor que no sea xMATRIX:

- ① Seleccione un transductor y una preconfiguración. (Lo que elija aquí y la configuración de su sistema influirán sobre qué modos de adquisición 3D van a estar disponibles).
- ② Pulse **3D** y toque uno de los controles de adquisición 3D.
- ③ Cuando esté preparado para iniciar el tratamiento de imágenes 3D, toque **Iniciar 3D**.
- ④ Para congelar o detener el tratamiento de imágenes 3D, toque **Detener 3D**.
- ⑤ Utilice los controles de pantalla táctil **3D** para optimizar y manipular los datos 3D.
- ⑥ Guarde los datos 3D mediante los controles situados en la pantalla táctil o en el panel de control.
- ⑦ Para salir del tratamiento de imágenes 3D y volver al tratamiento de imágenes 2D en tiempo real, pulse **2D**.

NOTA

Al activar el tratamiento de imágenes xPlane desde 3D, los siguientes ajustes del tratamiento de imágenes 3D heredan sus propiedades desde los ajustes de xPlane entre paréntesis: posición lateral de la ROI 3D en color (posición lateral de la ROI de xPlane en color); tipo de inclinación 3D (tipo de inclinación xPlane); inclinación de MPR 3D (inclinación de xPlane); giro de MPR 3D (giro de xPlane).

Para realizar un tratamiento de imágenes Live 3D con un transductor xMATRIX:

- ① Seleccione un transductor y una preconfiguración. (Lo que elija aquí y la configuración de su sistema influirán sobre qué modos de adquisición 3D van a estar disponibles).
- ② Pulse **3D** para iniciar la adquisición 3D en tiempo real (Live 3D). La imagen 3D aparecerá en la pantalla.
- ③ Utilice los controles de pantalla táctil **3D** para optimizar y manipular los datos 3D.
- ④ Para guardar los datos 3D, pulse el control **Acquire** que esté configurado para este propósito.
- ⑤ Para salir del tratamiento de imágenes 3D y volver al tratamiento de imágenes 2D en tiempo real, pulse **2D**.

NOTA

Cuando se activa 3D desde 2D, la posición lateral de la ROI 3D en color hereda sus propiedades de la posición de la ROI 2D en color.

Para utilizar el tratamiento de imágenes xPlane:

- ① Seleccione un transductor xMATRIX y toque **xPlane**.
- ② Toque **Inclinación** para seleccionar **Vertical** o **Lateral**.
- ③ Para colocar el indicador de inclinación a lo largo de la anatomía de interés, utilice el ratón estacionario.
- ④ Para aplicar esa inclinación a una imagen de flujo de color, pulse **Color**.
- ⑤ Para girar la imagen, mueva el control **iRotate**.
- ⑥ Para ampliar la imagen, pulse **Zoom**, coloque el recuadro de zoom en la anatomía de interés y vuelva a pulsar **Zoom**.

NOTA

Al activar el tratamiento de imágenes xPlane desde 3D, los siguientes ajustes del tratamiento de imágenes xPlane heredan sus propiedades desde los ajustes de 3D entre paréntesis: inclinación de xPlane (inclinación de MPR 3D); giro de xPlane (giro de MPR 3D).

Tratamiento de imágenes por contraste

- ① Seleccione un transductor que sea compatible con el tratamiento de imágenes por contraste.
- ② Toque **Contraste**.
- ③ Comience el tratamiento de imágenes. Ajuste la **Potencia de salida** y la CTG sólo en la medida en que resulte necesario.
- ④ Después de que se haya inyectado el agente de contraste y esté finalizado el enjuague con solución salina, toque **Temporiz. contraste**.
- ⑤ Si desea utilizar flash, siga uno de estos procedimientos para disparar los fotogramas flash:
 - Toque **Flash**.
 - Regule los ajustes para **Fotogramas flash** y **Potencia de flash** en la pantalla táctil **2D** o en la **3D**.
- ⑥ Para adquirir una secuencia de contraste, pulse el control **Acquire** que esté configurado para adquirir secuencias. Si cambia cualquier ajuste (ganancia, profundidad, etc.) durante la adquisición, ésta se detendrá de inmediato. Para reanudarla, pulse de nuevo **Acquire**.
- ⑦ Para restablecer el temporizador durante una nueva inyección de agente de contraste, vuelva a tocar **Temporiz. contraste**.

Adquirir imágenes individuales y secuencias

Es posible adquirir y guardar un fotograma individual o una secuencia Cineloop. El fotograma o secuencia se guardan en el estudio del paciente, quedando disponible una miniatura en la visualización de tratamiento de imágenes en tiempo real y en la pantalla de revisión.

Los controles **Acquire** pueden configurarse para imprimir, guardar imágenes en el disco duro y enviar a servidores PACS. Encontrará instrucciones de configuración en la *Ayuda* del sistema.

Para adquirir una imagen fija:

- ① Pulse **Freeze**.
- ② Utilice el ratón estacionario para desplazarse hasta el fotograma que desea adquirir.
- ③ A fin de adquirir la imagen, pulse el control **Acquire** que esté configurado para adquirir imágenes individuales.

Para adquirir secuencias de imágenes:

- ① Utilice la tecla virtual **Duración secuencia** para establecer la duración de la secuencia.
- ② Durante el tratamiento de imágenes en tiempo real o al revisar una secuencia Cineloop, pulse el control **Acquire** que esté configurado para adquirir secuencias de imágenes.

Imprimir imágenes

Para imprimir imágenes fijas:

- ① Configure los controles **Acquire** e **Impresión alternativa** en las configuraciones.
- ② Muestre la imagen en tiempo real o congelada que desea imprimir.
- ③ Siga uno de estos procedimientos:
 - Pulse el control **Acquire** que esté configurado para imprimir imágenes.
 - Toque **Impresión alternativa** o algún otro control de impresión.

NOTA

También puede configurar los controles **Acquire** para que inicien y detengan la grabación en DVD.

Revisar imágenes y secuencias

Para revisar las imágenes y secuencias adquiridas de un examen:

- ① Toque **Revisión**.
- ② Utilice **Página** para ir pasando por las miniaturas disponibles.
- ③ Toque **Fmto. pant.** para presentar una sola imagen a pantalla completa o 4 imágenes.
- ④ Pulse **Freeze** para detener la reproducción de una secuencia.
- ⑤ Utilice **Vel. cine** para regular la velocidad de reproducción de una secuencia.
- ⑥ Toque de nuevo **Revisión** para cerrar el modo revisión y volver al tratamiento de imágenes en tiempo real.

Finalizar examen

Para finalizar un examen:

- ① Toque **Paciente**.
- ② Si resulta necesario, actualice los datos del paciente.
- ③ Toque **Fin exam**.

Exportar exámenes e imágenes

Para exportar un examen en DICOM:

- ① Finalice el examen.
- ② En el directorio de pacientes, seleccione uno o más exámenes. Para seleccionar todos los exámenes, haga clic en **Selecc. todo**.
- ③ Haga clic en **Enviar a**.
- ④ En el cuadro de diálogo **Enviar a**, seleccione uno o más destinos: **Red** o **Soporte**.
- ⑤ Para eliminar información de identificación de los datos de DICOM que se envían con el examen, seleccione **Desidentificar datos de DICOM**, si está disponible.
- ⑥ Para enviar los exámenes seleccionados, haga clic en **Aceptar**.

Para exportar una imagen:

- ① En la pantalla **Revisión**, seleccione una o más imágenes.
- ② Haga clic en **Enviar a**.
- ③ En el cuadro de diálogo **Enviar a**, seleccione uno o más destinos: **Red**, **Soporte** o **Formato PC** (JPEG o AVI).
- ④ Para eliminar información de identificación de los datos de DICOM que se envían con el examen, seleccione **Desidentificar datos de DICOM**, si está disponible.
- ⑤ Para enviar las imágenes seleccionadas, haga clic en **Aceptar**.

Ganancia de imágenes

- 1 Para ajustar automáticamente el brillo global, pulse **iSCAN** o toque **Explor. autom.**
- 2 Para ajustar el brillo a varias profundidades, utilice los controles deslizantes de **CTG**.
- 3 Mueva un control giratorio a fin de ajustar la ganancia para ese modo.
- 4 Para ajustar el brillo a lo largo de los bordes laterales de la imagen, utilice los controles deslizantes de **CGL** en la pantalla táctil.

Profundidad

- 3 Para aumentar o reducir el campo de visión, gire **Profundidad**. La profundidad aparece en el lado inferior derecho de la pantalla. En las configuraciones, puede seleccionar que se muestren marcadores de profundidad sobre todo el costado de la imagen.

Enfoque

- 4 Para ajustar la profundidad focal 2D, gire **Enfoque**. El indicador de zona focal se encuentra a la derecha de la imagen. Para cambiar el rango de la zona focal, pulse **Enfoque** y después mueva el control giratorio.



Zoom

- ① Para ampliar la visualización de toda la imagen, gire **Zoom**.
- ② Para ampliar una región de interés específica:
 - a. Pulse **Zoom** para que aparezca un recuadro de ROI.
 - b. Ajuste el tamaño y la ubicación del recuadro de ROI con la esfera del ratón estacionario y sus botones izquierdo y derecho.
 - c. Pulse el botón del medio del ratón para ampliar el contenido del recuadro de ROI.
 - d. Utilice el ratón estacionario para panoramizar el contenido del recuadro de color, o gire **Zoom** a fin de ampliar más la imagen. (La característica de panoramizar no está disponible en el modo color).

Color

Para mejorar la identificación de la velocidad de flujo:

- ① Toque **Mapa color** para aplicar diferentes mapas cromáticos.
- ② Toque **Línea base** para cambiar la posición de la línea base cero.
- ③ Toque **Opt. flujo** para optimizar la sensibilidad de la imagen de color o de CPA en función del estado de flujo.

- ④ Toque **Opt. frec.** para ajustar la frecuencia de color.
- ⑤ Toque **Escala** para ajustar la escala de velocidad de color.



Optimización 2D

Varios ajustes optimizan entre resolución y penetración. Los ajustes disponibles dependen del transductor activo. Utilice la tecla virtual **Opt. 2D** para establecer la optimización de tratamiento de imágenes a frecuencia básica. El icono de fusión indica el ajuste.

- **Res.** optimiza para resolución de áreas de interés a profundidades superficiales.
- **Gral.** optimiza el balance entre los ajustes de **Res.** y **Pen.** para requisitos de tratamiento de imágenes generales.
- **Pen.** optimiza para una mejor penetración de áreas de interés a profundidades mayores.



Tratamiento de imágenes mediante armónicos tisulares

La optimización del tratamiento de imágenes mediante armónicos mejora la definición de bordes y reduce los artefactos a varias profundidades. Utilice la tecla virtual **Armónicos** para activar o desactivar el tratamiento de imágenes mediante armónicos. En el tratamiento de imágenes mediante armónicos:

- Los nombres de los ajustes de optimización 2D incluyen **Armón.** Por ejemplo, **PenArmón.**
- El icono de fusión indica el valor actual, mostrando un círculo alrededor del ajuste de optimización de tratamiento de imágenes a frecuencia básica.

NOTA

En el caso de pacientes que presentan dificultades técnicas para el tratamiento de imágenes, a fin de reducir la oscuridad de la parte más profunda de la imagen, gire el control **Armónicos** hasta desactivarlo, después seleccione el ajuste **Opt. 2D: Pen.**, ajuste el enfoque a la profundidad máxima mediante el control **Enfoque** y mueva los controles deslizantes inferiores de **CTG** hacia la derecha.



Mediciones no rotuladas

Las mediciones no rotuladas disponibles dependen de la preconfiguración activa del examen. Los resultados se visualizarán y se incluirán con la imagen, pero no se importarán en el informe.

Mediciones lineales

Para realizar una medición sencilla en 2D, Doppler o modo M:

- ① Pulse **Freeze**.
- ② Pulse o toque **Measure/Medición** y después toque **Herramientas**.
- ③ Seleccione una herramienta de medición.
- ④ Utilice el ratón estacionario para colocar el primer cursor de medición.
- ⑤ Siga uno de estos procedimientos:
 - Para finalizar una medición de profundidad, pulse el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final**. en las configuraciones.
 - Para continuar con una medición de distancia, haga clic para anclar el primer cursor de medición y mostrar el segundo.
- ⑥ Coloque el segundo cursor de medición.

- ⑦ Para finalizar la medición de distancia, pulse el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final**. en las configuraciones.
- ⑧ Adquiera un fotograma único mediante el control al que dicha función se haya asignado en las configuraciones.



Mediciones de trazo continuo

Realice mediciones de trazo en 2D o Doppler. Los resultados se visualizarán y se adquirirán con la imagen, pero no se importarán en el informe.

Para realizar una medición de trazo continuo:

- 1 Pulse **Freeze**.
- 2 Pulse o toque **Measure/Medición** y después toque **Herramientas**.
- 3 Toque **Trazo continuo** para mostrar un cursor de medición.
- 4 Utilice el ratón estacionario para llevar el cursor de medición al perímetro de la forma que desea medir y haga clic para colocar el cursor de medición.
- 5 Utilice el ratón estacionario para guiar el cursor de medición alrededor del perímetro de la forma. A medida que desplace el cursor de medición, la forma se irá trazando en la pantalla.

NOTA

Si invierte la dirección del ratón estacionario, irá borrando el trazo.

- 6 Para finalizar la medición, pulse el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final**. en las configuraciones.



Medición automática de la frecuencia cardíaca

La frecuencia cardíaca se puede medir automáticamente para incluirse en el informe del paciente, si está activo un trazo de ECG y si el ajuste **Herramienta Frec cardíaca** en las configuraciones de **Análisis** está establecido en **Automático**:

- ① En modo 2D, toque **Modo M** o pulse **PW** o **CW**.
- ② En aplicaciones no cardíacas, pulse el botón del medio del ratón estacionario para visualizar el trazo. En aplicaciones cardíacas, el trazo aparece automáticamente.
- ③ Pulse **Freeze**.
- ④ Pulse o toque **Measure/Medición** y después toque **Herramientas**.
- ⑤ Toque **Frecuencia cardíaca**. La frecuencia cardíaca aparecerá en los resultados y en el informe.

En la *Ayuda* del sistema encontrará información sobre cómo obtener la frecuencia cardíaca basándose en datos de visualización fisiológica.

NOTA

Al iniciar un examen, se debe pulsar **Medición** en el panel de control para que aparezca la ficha **Medición** en la pantalla táctil. De ahí en más, podrá acceder a la ficha tocando **Medición**.

Mediciones en modo M y Doppler

Para entrar en modo M o Doppler y realizar una medición:

- ① En modo 2D, toque **Modo M** o pulse **PW** o **CW**.
- ② En aplicaciones no cardíacas, pulse el botón del medio del ratón estacionario para visualizar el trazo. En aplicaciones cardíacas, el trazo aparece automáticamente.
- ③ Pulse **Freeze**.
- ④ Pulse o toque **Measure/Medición** y después toque **Herramientas** en la pantalla táctil.
- ⑤ Toque un rótulo de medición para que aparezca un cursor de medición.
- ⑥ Utilice el ratón estacionario para colocar el primer cursor de medición y haga clic para anclarlo.
- ⑦ Utilice el ratón estacionario para colocar el segundo cursor de medición y haga clic para anclarlo. Las mediciones y los cálculos aparecerán en los resultados.
- ⑧ Para finalizar la medición, haga clic con el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final**, en las configuraciones.

Mediciones de análisis de High Q

Las mediciones de High Q están disponibles en todas las preconfiguraciones no cardíacas.

- ① Obtenga la imagen Doppler que desea medir.
- ② Siga uno de estos procedimientos o los dos:
 - Toque **Trazo medio**. El trazo medio aparecerá en color rosa en la forma de onda Doppler espectral.
 - Toque **High Q**. El trazo apical aparecerá en color azul en la forma de onda Doppler espectral.
- ③ Toque **Dirección** para seleccionar **Arriba**, **Abajo** o **Ambos**. (La dirección del trazo establece las partes de la forma de onda Doppler que se incluirán en el trazo medio o apical).
- ④ Toque **Ajustar** para seleccionar **Marcadores** y poner en su sitio los marcadores izquierdo y derecho.
- ⑤ Toque **Ilustrar** para modificar el trazo y los puntos Doppler.
- ⑥ Toque **Ajustar** para seleccionar **Trazo**.
- ⑦ Seleccione el puntero sobre el trazo que desea ajustar y lleve el trazo a la posición deseada arrastrándolo con el ratón estacionario.
- ⑧ Toque **Ajustar** para seleccionar **Puntos**.
- ⑨ Utilice el ratón estacionario para cambiar de posición uno o más puntos.
- ⑩ Para finalizar el trazo y mostrar las mediciones High Q, toque **Ajustar** y seleccione **Des**.

Mediciones y cálculos rotulados

Las mediciones y cálculos rotulados disponibles dependen de la preconfiguración del examen, el modo de tratamiento de imágenes y la configuración de su sistema. Las mediciones y cálculos rotulados se pueden finalizar desde estos dos lugares:

- **Lista de cálculos** (en el lado izquierdo de la pantalla)
- Pantalla táctil

La **Lista de cálculos** y la pantalla táctil se pueden configurar en las configuraciones de **Análisis** (consulte la *Ayuda* del sistema). Los cambios que se introducen en una de ellas, automáticamente se reflejan en la otra.

Cuando se finaliza una medición o cálculo, aparece una marca de verificación junto al correspondiente rótulo en la pantalla táctil y los resultados se muestran aquí:


- Área de resultados en la pantalla de imágenes
- **Lista de cálculos**
- Informe (donde se pueden editar resultados durante o después del examen)

Es posible asignar mediciones y cálculos personalizados al formato de informes estructurados DICOM. Encontrará más información en la *Ayuda* del sistema.

NOTA

Para quitar mediciones de la imagen, pulse **Erase**.

- 1 Pulse **Freeze**.
- 2 Pulse **Pointer**.
- 3 En la **Lista de cálculos**, haga clic en la medición que desea utilizar.
- 4 Utilice el ratón estacionario para colocar cursores de medición y realizar mediciones.
- 5 Para finalizar la medición, pulse el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final** en las configuraciones.

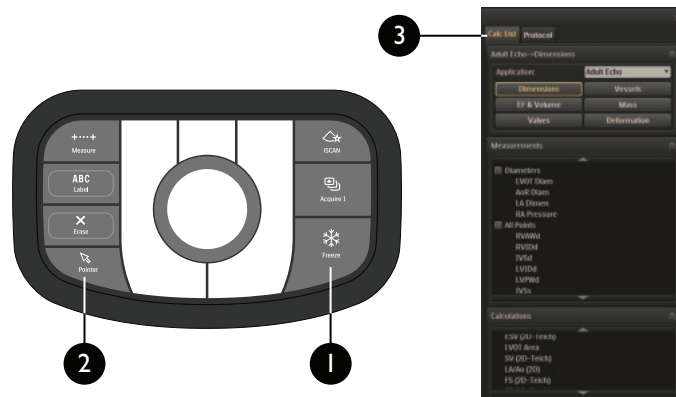

Para realizar mediciones o cálculos rotulados desde la pantalla táctil:

- ❶ Pulse **Freeze**.
- ❷ Pulse **Measure** y toque la ficha **Paquete de cálculos**.
- ❸ Toque un rótulo de medición o de cálculo.
- ❹ Utilice el ratón estacionario para colocar los cursores y realizar mediciones. Los resultados aparecerán en la pantalla. Los resultados de los cálculos se visualizarán debajo de los resultados de las mediciones, una vez completadas todas las mediciones necesarias.
- ❺ Para finalizar la medición y para que los resultados se muestren en la **Lista de cálculos** y en el informe, pulse el botón del ratón estacionario al cual se haya asignado **Final**. en las configuraciones. Aparecerá una marca de verificación en el rótulo correspondiente en la pantalla táctil.




Escribir anotaciones

Para escribir un rótulo en la posición de inicio por omisión:

- 1 Pulse **ABC Label** para entrar en el modo anotación.
- 2 Utilice el teclado de la pantalla táctil para escribir libremente.
- 3 Vuelva a pulsar **ABC Label** para salir del modo anotación.

Para introducir texto en cualquier lugar de la pantalla:

- 1 Pulse **ABC Label** para entrar en el modo anotación.
- 2 Utilice el ratón estacionario para colocar el cursor en cualquier lugar de la pantalla.
- 3 Utilice el teclado de la pantalla táctil para escribir libremente.

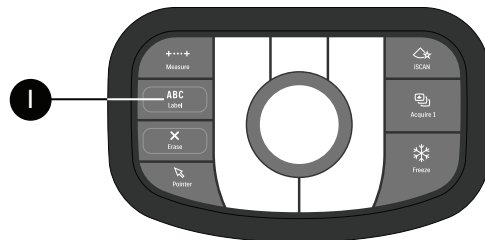


Añadir rótulos de anotación y flechas

Puede introducir texto en la pantalla utilizando listas de anotaciones, que incluyen rótulos específicos de cada examen. Si la sustitución de texto está habilitada, puede sustituir un rótulo con otro definido anteriormente.

Para añadir rótulos a una imagen:

- 1 Pulse **ABC Label**.
- 2 Toque **ABC Rótulos**.
- 3 Utilice el ratón estacionario para colocar el cursor de texto en el área de imágenes.
- 4 Toque un rótulo para que aparezca en el área de imágenes.
- 5 Para colocar otro rótulo, repita los pasos 2 al 4.

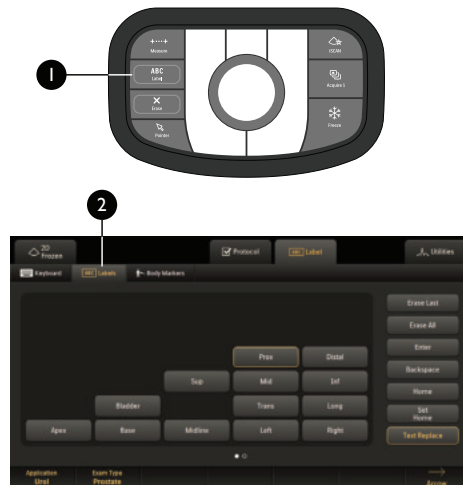

I Pulse **ABC** Label.

③ Pulse la tecla virtual **Flecha**.

⑤ Haga clic para anclar la flecha.



Borrar rótulos y flechas

Después de añadir un rótulo o una flecha a una imagen, ya no los puede cambiar de sitio. Tiene que borrar el rótulo o la flecha y volver a añadirlo.

Para borrar un rótulo:

- ① Pulse **ABC Label**.
- ② Toque **ABC Rótulos**.
- ③ Haga clic en el rótulo que desea borrar.

NOTA

Para borrar una sola palabra en un rótulo, ponga el cursor a la derecha de la palabra y toque **Retroceso**.

- ④ Toque **Borrar última** para borrar el rótulo seleccionado, o toque **Borrar todo el texto** para borrar todos los rótulos en la imagen. Si toca **Borrar última** repetidas veces, se irá borrando cada rótulo en el orden inverso a como se los colocó en la imagen.

NOTAS

- También puede pulsar **Erase** en el panel de control para eliminar todos los rótulos de la imagen.
- Cuando se toca **Borrar última**, se borran sucesivamente todas las flechas en la pantalla antes de que se empiecen a borrar los rótulos de texto.

En la *Ayuda* del sistema encontrará información sobre cómo configurar las listas de anotaciones.


NOTA

Cuando se cambia la visualización entre la estándar y la de VistaMáx, podrían desaparecer los rótulos y flechas que estuvieran en la pantalla.

Utilizar marcadores anatómicos


Para colocar y mover un marcador anatómico:

- 1 Pulse **ABC Label**.
- 2 Toque **Marcadores anatómicos**. En la ubicación por omisión aparecerá el marcador anatómico por omisión para el transductor y la preconfiguración elegidos.
- 3 Para sustituir al marcador por omisión, toque otro marcador anatómico.
- 4 Mediante el ratón estacionario, seleccione y mueva el marcador anatómico en la pantalla de imágenes.
- 5 Haga clic con el botón izquierdo o derecho del ratón estacionario hasta que se resalte el icono del transductor.
- 6 Utilice el ratón estacionario para colocar el icono del transductor.
- 7 Para hacer que cambie el ángulo del transductor, mueva la tecla virtual **Girar transductor**.

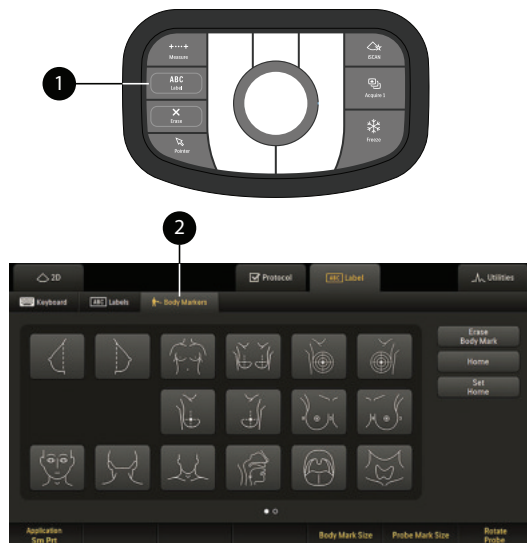

Para borrar un marcador anatómico:

- 1 Pulse **ABC Label**.
- 2 Toque **Marcadores anatómicos**.
- 3 Toque **Borrar marcador anatómico** o pulse **Erase**.

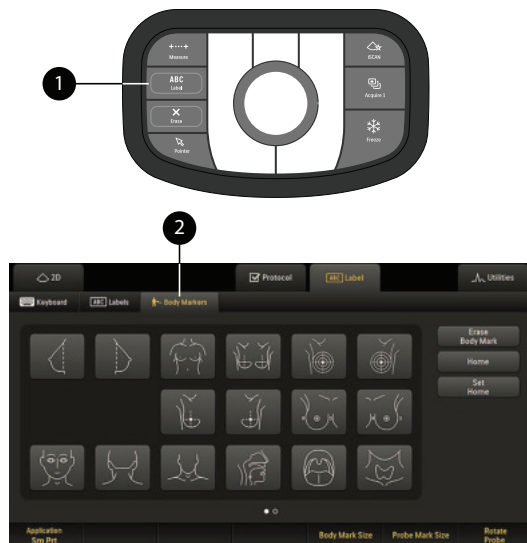

Iniciar un protocolo

Philips proporciona un conjunto estandarizado de vistas que ayudan a navegar por el flujo de trabajo de un examen mediante la automatización de muchas de las tareas de la interfaz de usuario, entre ellas las anotaciones y mediciones.

- ① Toque el nombre del transductor que desea utilizar.
- ② Seleccione una aplicación clínica o preconfiguración.
- ③ Toque **Protocolos de estrés** o toque **Protocolos de examen**.
- ④ Toque el protocolo para su examen.

Crear un nuevo protocolo de examen

El protocolo puede ser completamente nuevo, o bien creado sobre la base de uno de los protocolos por omisión del sistema.

- ① Toque el nombre del transductor que desea utilizar.
- ② Toque **Protocolo**.
- ③ En el panel izquierdo de la pantalla de imágenes, haga clic en la ficha **Protocolo**.
- ④ Siga uno de estos procedimientos:
 - Toque **Crear**, o bien toque **Duplicar** y después toque el protocolo sobre la base del cual desea que se defina el nuevo.
 - En la ficha **Protocolo**, haga clic con el botón derecho del ratón en el protocolo sobre la base del cual desea crear el nuevo y después haga clic en **Duplicar** o en **Nuevo**.
- ⑤ En el cuadro de diálogo **Nuevo protocolo**, escriba un nombre para el protocolo personalizado.

- ⑥ Haga clic en **Propiedades** y realice los cambios que desea para el protocolo.
 - Seleccione **Latidos** o **Tiempo** en el menú **Método**.
 - Seleccione **Prospectiva** o **Retrospectiva** como **Tipo de adquisición**.
 - Seleccione **Vista** u **Ord. cron.** en el menú **Mostrar según**.
 - Para iniciar una grabación en DVD durante la ejecución de un protocolo, seleccione **Inicio automático DVR**.
 - Para iniciar un temporizador durante la ejecución de un protocolo, seleccione **Inicio autom. del temporizador**.
 - Para habilitar el modo automático, seleccione **Conmut. autom. del modo tratam. imágs.**
- ⑦ Para permitir que múltiples aplicaciones tengan acceso al protocolo personalizado, seleccione las aplicaciones en la sección **Aplicaciones** del cuadro de diálogo **Propiedades del protocolo** y después haga clic en **Aceptar**.
- ⑧ En la lista de protocolos, haga clic en el signo más (+) para expandir el protocolo, si fuera necesario.
- ⑨ Edite la vista actual en **Propiedades de la vista**. Repita el procedimiento para las demás vistas, según resulte necesario.
 - Seleccione un **Nombre de vista**.
 - Seleccione el control **Modo de imágenes** que corresponde a la vista.
 - Si ha seleccionado un modo de tratamiento de imágenes compatible con 3D, haga clic en **3D** y después seleccione un **Modo 3D**.
 - Seleccione el **Tipo de adquisición**.
 - Si ha seleccionado **Secuencia** en el menú **Tipo de adquisición**, seleccione **Duración**.
 - Seleccione el tipo de **Visualiz. de imágenes**.
 - Seleccione un **Ángulo de giro**.
 - Añada un rótulo de anotación o marcador anatómico a la vista.
 - Añada una medición a la vista.
- ⑩ Si desea modificar el orden de los protocolos o las vistas que figuran en la lista, seleccione un elemento y haga clic en  o en  para cambiarlo de lugar. También puede hacer clic en el protocolo o vista en la lista y arrastrarlo hasta la nueva posición.
- ⑪ Haga clic en o toque **Guardar protocolo** o **Guardar y salir**.

Crear un nuevo protocolo de ecocardiografía de estrés

El protocolo puede ser completamente nuevo, o bien creado sobre la base de uno de los protocolos por omisión del sistema.

- ① Toque el nombre del transductor que desea utilizar.
- ② Siga uno de estos procedimientos:
 - Toque **Protocolo** y después la ficha **Protocolos de estrés**.
 - Haga clic en la ficha **Protocolo** en el lado izquierdo de la pantalla y después haga clic en el signo más (+) junto a **Protocolos de estrés**.
- ③ Siga uno de estos procedimientos:
 - Toque **Crear**, o bien toque **Duplicar** y después toque el protocolo sobre la base del cual desea que se defina el nuevo.
 - En la lista **Protocolos de estrés**, haga clic con el botón derecho del ratón en el protocolo sobre la base del cual desea crear el nuevo y después haga clic en **Duplicar** o en **Nuevo**.
- ④ En el cuadro de diálogo, escriba un nombre para el protocolo personalizado y después haga clic en **Aceptar**.

- ⑤ Haga clic en **Propiedades**.
- ⑥ En el área **Propiedades del protocolo**, haga los cambios que desee para el protocolo personalizado.
 - Seleccione **Latidos** o **Tiempo** en el menú **Método**.
 - Seleccione **Prospectiva** o **Retrospectiva** como **Tipo de adquisición**.
 - Seleccione **Uno** o **Cuatro** para el número de **Secuencias por vista**.
 - Seleccione **Completa** o **Cuádr.** para el **Formato de imagen**.
 - Seleccione **Vista**, **Etapas** u **Ord. cron.** en el menú **Mostrar según**.
 - Para postergar la selección de imágenes, seleccione **Aplaz. autom. selección de imágenes**.
- ⑦ En la lista de protocolos, haga clic en el signo más (+) para expandir el protocolo.

⑧ Seleccione una etapa y realice los cambios que desee en el área de propiedades de la etapa. Repita el procedimiento para las demás vistas, según resulte necesario.

- Seleccione si desea que la etapa sea de **Múltiples ciclos**.
- Para iniciar una grabación en DVR durante la ejecución de un protocolo, seleccione **Inicio automático DVR**.
- Para iniciar un temporizador durante la ejecución de un protocolo, seleccione **Inicio autom. del temporizador**.
- Para postergar la selección de imágenes, seleccione **Aplaz. autom. selección de imágenes**.
- Para crear una nueva etapa, haga clic en **Crear etapa**.
- Para crear una nueva etapa que sea igual a la etapa seleccionada, haga clic en **Duplicar etapa**.
- Para eliminar una etapa, haga clic en **Eliminar etapa**.

⑨ En el protocolo, haga clic en el signo más (+) para expandir la etapa.

⑩ Seleccione una vista y realice los cambios que desee, repitiéndolos para otras vistas si fuese necesario.

- Para cambiar la vista, seleccione una entre las que se incluyen en el menú **Nombre de vista** o escriba un nuevo nombre para la vista.
- Seleccione un **Modo**.
- Seleccione una **Longitud**.
- Para añadir nuevas vistas, haga clic en **Crear vista**.
- Para quitar vistas, haga clic en **Eliminar vista**.
- Para añadir la misma vista a todas las etapas de un protocolo, haga clic en **Añadir vista a todas las etapas**.

⑪ Haga clic en o toque **Guardar protocolo** o **Guardar y salir**.

Ver y editar informes

Durante o después de un examen, utilice **Revisión** para examinar las imágenes y secuencias adquiridas durante el examen. Utilice **Informe** para revisar las mediciones, datos del paciente e imágenes que desea incluir en el informe, y para añadir comentarios y hallazgos. Utilice **Revisión** o **Informe** para exportar, cerrar o abrir estudios.

El sistema crea múltiples informes para los exámenes adjuntados, a menos que usted lo configure para que genere un solo informe por estudio. Encontrará información detallada en la *Ayuda* del sistema.

Es posible crear plantillas de informe personalizadas. Encontrará más información en la *Ayuda* del sistema.

A fin de abrir un informe para un examen guardado:

- ① Toque **Revisión**.
- ② Seleccione el examen que desea y después haga clic en **Abrir**. El examen se abrirá en modo revisión.
- ③ Para ver el informe, toque **Informe**.

Para añadir imágenes a un informe:

- ① Toque **Revisión**.
- ② Seleccione una o más imágenes haciendo clic en el número que aparece sobre la imagen o bien haciendo clic en **Selecc. todo**.
- ③ Haga clic en **Enviar al informe**.
- ④ Para ver el informe, toque **Informe**.

A fin de ver o editar un informe para un examen activo:

- ① Toque **Informe**.
- ② Haga clic en **Editar informe**.
- ③ Haga clic en la ficha correspondiente al tipo de información que desea editar.
- ④ Edite los hallazgos, comentarios y mediciones según se necesite.

Característica de gestión de energía

CUIDADO

La opción de batería sólo asegura que el sistema se ponga en marcha rápidamente y que se desplace con facilidad. No pueden realizarse exploraciones mientras se funciona en modo batería.

El sistema incluye una característica de gestión de energía que monitoriza el nivel de carga de la batería opcional y notifica al usuario cuando la carga está baja. Además, la característica de gestión de energía puede apagar el sistema de forma segura antes de que la batería se descargue por completo.

El nivel de carga de la batería se indica mediante iconos en la pantalla del sistema. Para obtener información sobre la batería, haga clic en los iconos.

Batería e indicadores del estado de alimentación de CA



El sistema recibe corriente alterna y la batería está cargada en un 80 a 100 %.



El sistema recibe corriente alterna y la batería está cargada en un 60 a 80 %.



El sistema recibe corriente alterna y la batería está cargada en un 40 a 60 %.



El sistema recibe corriente alterna y la batería está cargada en un 20 a 40 %.



El sistema recibe corriente alterna y la batería está cargada en un 0 a 20 %.



El sistema recibe alimentación de corriente alterna y la batería no está cargada o se halla desconectada.

Información de la batería

- Cuando despache o transporte el sistema, cerciőrese de que las baterías estén quitadas o insertadas de forma invertida, con las partes superiores apuntando hacia abajo, para impedir una descarga eléctrica.
- La batería se carga siempre que el sistema esté enchufado en una toma de corriente alterna.
- Cuando el sistema está encendido y se encuentra en modo reposo, está alimentado por las baterías.
- Para que la batería se cargue más rápidamente, apague el sistema.
- Cargue la batería siempre que el icono de batería esté rojo.
- El sistema se cierra automáticamente cuando el nivel de carga baja a un nivel crítico. Para prolongar la duración de la batería, enchufe el sistema en una toma de corriente alterna tan pronto como el icono de batería se vuelva rojo.
- Si el icono de batería en el panel de control no aparece cuando el sistema está enchufado adecuadamente en una toma de corriente alterna, póngase en contacto con el representante del servicio técnico de Philips.
- Si resulta necesario cambiar las baterías, consulte el documento *Service Manual* o póngase en contacto con el representante del servicio técnico de Philips.

Modo reposo

CUIDADO

El modo reposo funciona como se describe a continuación cuando el sistema incluye la batería opcional. Sin la batería, igual es posible poner el sistema en modo reposo, pero si durante ese estado se desconectase el cable de alimentación, el sistema quedaría sin energía eléctrica.

Para poner el sistema en modo reposo, pulse  o desenchufe el cable de alimentación.

Para reactivar el sistema, conecte el cable de alimentación a fin de restaurar la corriente alterna y pulse .

Trasladar el sistema

ADVERTENCIA

No deje colgando el cable de alimentación de ninguno de los ganchos para cables ni del asa en la plataforma rodante. Si se levanta la plataforma, puede dañarse el cable o la unidad del enchufe de alimentación.


- ① Pulse  para iniciar el modo reposo, o desenchufe el cable de alimentación. También puede pulsar  para apagar el sistema.
- ② Apriete las palancas de liberación del asa delantera y utilice el asa para centrar el módulo de control y ponerlo a una altura que facilite el traslado del sistema.
- ③ Desconecte todos los cables externos, incluidos los de alimentación, de la red y de dispositivos externos. Asegure todos los cables, transductores y accesorios para que no interfieran con las ruedas.
- ④ Trabe el brazo del monitor ejerciendo presión para consolidar las secciones articuladas del brazo.
- ⑤ Ponga las trabas de giro.
- ⑥ Traslade la plataforma rodante utilizando el asa delantera.

Instalar el sistema después de trasladarlo

CUIDADO

Si el sistema no funciona de la forma esperada en su nuevo emplazamiento, póngase en contacto de inmediato con el representante del servicio técnico de Philips. Los componentes están instalados de manera segura y pueden tolerar un nivel considerable de empujones; sin embargo, un empujón excesivamente brusco puede averiarlo.

- ① Coloque el sistema en su posición y ponga los frenos; después conecte el cable de alimentación, el de la red y otros cables.
- ② Pulse el botón de liberación para soltar el monitor de la posición de traba utilizada durante el transporte.
- ③ Ajuste la posición del monitor.
- ④ Apriete las palancas de liberación en el asa delantera y coloque el módulo de control en la posición deseada.
- ⑤ Pulse  para encender el sistema.

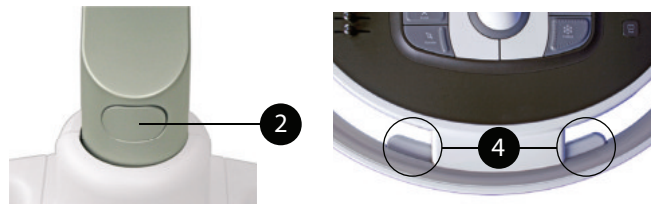

Escáner de código de barras

Con un escáner de código de barras se puede hacer lo siguiente:

- Introducir datos de paciente
- Seleccionar y revisar un examen
- Seleccionar un paciente en una lista de trabajo

Para introducir datos de paciente mediante un código de barras:

- ① Conecte un escáner de código de barras aprobado por Philips a un puerto USB del sistema de ultrasonido.
- ② Toque **Paciente**.
- ③ Escanee el código de barras.
- ④ Confirme que se hayan rellenado los campos correctos con la información escaneada.
- ⑤ Si desea introducir datos procedentes de códigos de barras en otros campos, seleccione manualmente el campo y después repita los pasos 3 y 4.
- ⑥ Cuando haya terminado, haga clic en **Terminado**.

En la *Ayuda* del sistema o en el *Manual del usuario* encontrará información detallada sobre el escáner de código de barras y sus otros usos.

Asistencia técnica para el sistema

Cuando se pulsa el control **Support**, se accede a la **Conexión con la asistencia técnica de Philips**. Las siguientes tareas se pueden realizar en **Conexión con la asistencia técnica de Philips**:

- Configurar su sistema
- Configurar y gestionar la red para el sistema
- Gestionar servicios remotos (los servicios remotos dependen de la configuración del sistema)
- Monitorizar su sistema, recopilar y reportar información de rendimiento
- Conectarse remotamente con el centro de servicio técnico de Philips

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Reservados todos los derechos.

La reproducción o transmisión completa o parcial, de cualquier modo o mediante cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o de otro tipo, está prohibida sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor.

Impreso en EE. UU.

4535 619 49191 Rev. A ABR 2018

CE0086

